




PELVI.Loc

TL-3DSR -XS-S-M-L / TL-W -S-M-L-XL

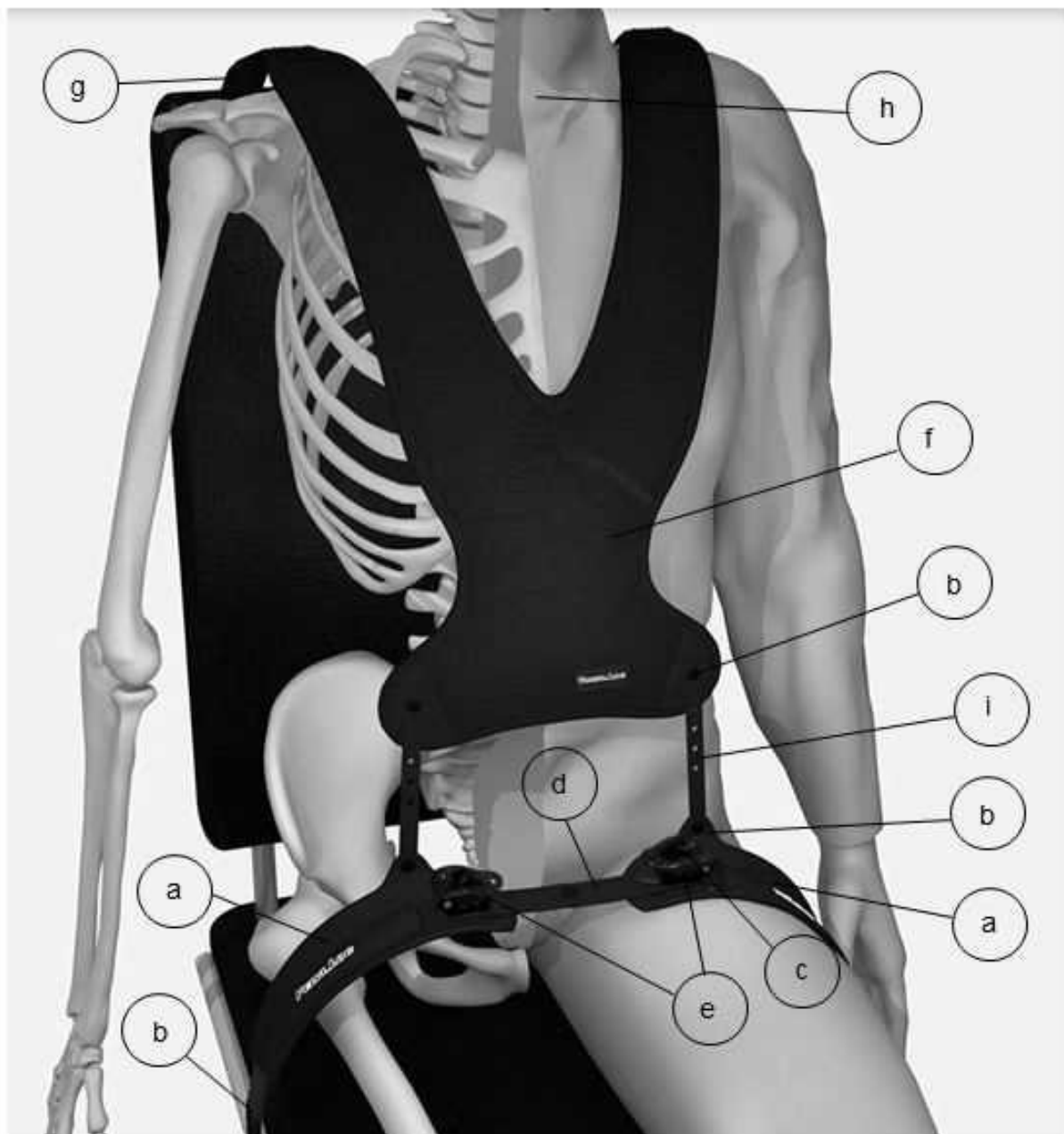

For sikker brug af dette produkt bedes De læse denne montage- og brugsanvisning, inden det tages i brug første gang.

Anvendelsesområde

Denne Torso.Loc TL-3DSR i forbindelse med TL-W hjælper med bedre positionering og bækkenretraktion for personer med begrænset mobilitet på en siddeflade fx. kørestol, siddeskål, terapistol, reha-buggy

Påtænkt patientgruppe:

- Børn, unge og voksne
- Køn: kvinder og mænd

Modtagelseskontrol

Pak produktet helt ud og kontroller at forsendelsen er komplet og fri for transportskader. Hvis De konstaterer, at der mod forventning er fejl ved forsendelsen, så, skal:

1. De reklamere med det samme hos fragtmanden
2. lade skaden / fejlen føres til protokol
3. omgående informere os eller Deres faghandler

Leveringsomfang

- 1) 1 x TL-3DSR ikke formonteret
- 2) 1 x TL-W ikke formonteret
- 3) 1 x I informationer om online download af montage- og brugsanvisning / vejledning

Kombination af medicinsk udstyr

Egnet til hjælpemidler, der er beregnet til brug af en bækkenretraktionssele i forbindelse med overkropspositioneringsvest..



Anvendelsesformål

Denne Torso.Loc TL-3DSR i forbindelse med Torso.Loc TL-W hjælper personer med begrænset mobilitet specielt med bækken-lår-positionering og overkropspositionering, forhindrer at bækkenet glider fremad, og overkroppen vipper fremad.



Montage

- Montagen skal udføres af en person med fagkendskab.
- 1. Puderne (a) placeres altid i lårområdet. – Tandbæltet (b) fastgøres til kørestolen.
 - Logoet på puden er derefter læsbar forfra!
- 2. Juster afstanden til puderne med hulremmene (d).
Bækkenretraktionsbæltet strammes ved at aktivere skraldespænderne (e).
 - Leddet på tandbåndet skal så sidde midt mellem puderne.
 - Tandremmen trækkes maksimalt så langt ud, at der stadig er to tænder fri bag hvert skraldespænde (e).
- 1. Derefter fastgøres tandremmen til kørestolens rammerør.
 - a. (Montage –følg anvisning).
- 2. Tandremmen (b) spændes lige meget på begge sider og så meget, at der stadig er plads til en flad hånd mellem lår og puder.
- 3. Efter behov kan enderne af tandremmen afkortes halvrundt. Enderne af den afkortede tandrem afgrates i givet fald risiko for tilskadekomst!
- 4. Kontroller at tandremmen sidder godt fast og låseanordningen på begge sider!
- 5. Læg vesten (f) på overkroppen. – Selebæltet (g) fastgøres på begge sider af kørestolen (skrues på eller med et klaspænde.25 mm)
 - Logoet på puden kan derefter læses forfra.
- 6. På neoprenvesten indstilles afstanden til halsen (h) via selebæltet, så der ikke er fare for strangulering.
- 7. De to hulremme (i) skrues sammen med TL-3DSR og TL-W. Det overskydende stykke af hulremmen afkortes i givet fald.
Neoprenvesten strammes ved indstilling af hulremmene (i)
 - Neoprenvesten skal tilpasse sig midt på kroppens kontur.
- 8. Let efterspænding og positionering af neoprenvesten sker via selebæltet (g).
- 9. Skulderselen (g) spændes lige meget på begge sider og så meget, at der stadig er plads til en flad hånd mellem hals og pude (risiko for rødmen af huden).
- 10. Efter behov kan enderne af selebåndet (g) afkortes).



Brugsanvisning



Sikkerhedsadvarsler

Trods den stabile konstruktion er hulremme, tandremme og puder udsat for en vis slitage. Derfor anbefales det at kontrollere PELVI.LOC® grundigt hver 3. måned. Her skal man også være opmærksom på, at nitter og skrueforbindelser sidder godt fast!

- Før brug skal man kontrollere, at produktet er i brugsejnet tilstand og sidder korrekt – risiko for uheld!
- Beskadigede komponenter såsom hulrem (f), tandrem b) eller puder (a), vest (f) må ikke være lappet eller limet og sat i igen - risiko for uheld!
- Sæt dig ikke på polstringen – fare for tryksteder specielt på grund af skraldespændet (erne)!
- Løft ikke kørestolen op over Torso.loc - Risiko for uheld!
- Pas på at hænderne ikke kommer i klemme mellem hulrem og ramme- og sæderør – fare for kvæstelse!

Brugsbegrænsninger / uønskede bivirkninger

- Torso.Loc må ikke anvendes i området, hvis der er pudetryksteder,
- sår eller andre ikke helede skader – risiko for tilskadekomst!
- Torso.Loc må ikke anvendes ved knoglesvind, glasknogler eller kraftigt nedsat blodgennemstrømning – fare for tilskadekomst!
- Efter rengøring kontrolleres det, at Torso.Loc fungerer korrekt!
- En beskadiget Torso.Loc skal omgående fornyes – fare for uheld!



Pas på:

Torso.Loc er ikke en del af tilbageholdelsessystemet for kørestolen og/eller brugere ved transport i et handicapkøretøj.

- Hverken producent eller salgsaftdeling kan gøres ansvarlig for skader eller risici, hvad angår produktansvar, som er forårsaget af børn uden opsyn, i sammenhæng med produktet!

Anvendelse

1. Ved brug af Torso.Loc placeres puderne (a) på låret.



Pas på:

Vær opmærksom på, at der ikke er nogen genstande under puderne. Sådan undgås smertende tryksteder.

2. Så føres tandremmen (b) gennem den aktuelle skralde. Derved aktiveres det tilhørende skraldespænde (e).
3. Derefter spændes tandremmen (b) så meget, at der endnu er plads til en flad hånd mellem lår og puder.
4. Sørg for at, skraldespænderne (c) griber ind i tænderne på tandremmen!
 - Udfør en trækprøve!

Ved åbning af Torso.Loc aktiveres skraldespændet (c), og tandremmen trækkes ud. Pas på at puderne ikke kommer i klemme mellem egerne på drivhjulet!

Rengøring og desinfektion

- Egnet til vaskemaskine op til 40 grader.
- Kemotermisk desinfektion mulig ved tilsætning af ELTRA 40 til vaskeprogrammet
- Må ikke slynges.
- Ikke egnet til tørretumbler

Vedligeholdelse

Torso.Loc skal kontrolleres regelmæssigt for skader og funktion

Reparationer

Defekte Torso.Loc skal omgående udskiftes.

Bortskaffelse

- Apparatets emballage kan afleveres til genbrug.
- Metaldele kan afleveres til genbrug.
- Kunststofdele kan afleveres til genbrug af kunststoffer.
- Bortskaffelsen kan ske i henhold til de relevante nationale, lovmæssige bestemmelser.
- Spørg venligst by-/kommuneadministrationen om lokale virksomheder med bortskaffelse

Tekniske data TL-3DSR

Sædebredde:	XS	16 til 24 cm
Pudestørrelse:	XS	18x7 cm
Vægt:	XS	Ca.220 g
Teoretisk brudsted:	XS	ved ca. 60 kg

Sædebredde:	S	20 bis 32 cm
Pudestørrelse:	S	21x8 cm
Vægt:	S	Ca. 220 g
Teoretisk brudsted:	S	ved ca. 60 kg


Sædebredde:	M	30 bis 40 cm
Pudestørrelse:	M	25,5 x 8 cm
Vægt:	M	Ca. 280 g
Teoretisk brudsted:	M	bei ca. 80 kg

Sædebredde:	L	36 bis 46 cm
Pudestørrelse:	L	26,5x8,5 cm
Vægt:	L	Ca. 280 g
Teoretisk brudsted:	L	bei ca. 80 kg

Tandrem str.: XS-S	1,9 x 0,2 x 40 cm
Tandrem str.: M-L	2,4 x 0,2 x 40 cm

Tekniske data TL-W


Vare nr.	A	B	C	D	E	F
TL-W-S	31	22	12	16	4	12
TL-W-M	38	29	16	19	5	13
TL-W-L	47	37	19	22	6	14
TL-W-XL	55	45	24	26	6,5	17

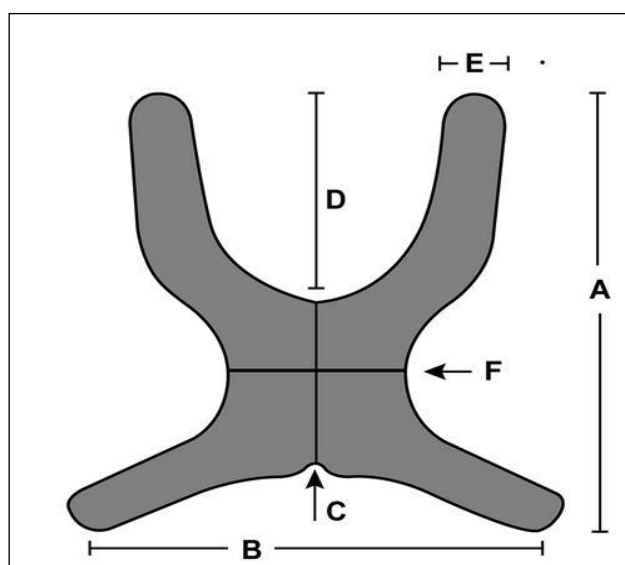

Produktet er
latexfri



Opbevarings- og transportforhold

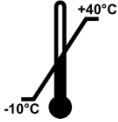	Temperaturområde for langtidsopbevaring fra -10°C til +40°C. Kortvarige temperaturspidser, f.eks. under transport, fra -20°C til +60°C tolereres godt af materialet og påvirker ikke produktets sikkerhed og ydeevne.
	Beskyt mod fugt under opbevaring og transport

Garanti

Vi påtager os garantien i henhold til lovbestemmelserne i henhold til lovbestemmelserne. Garantien gælder for materiale- og produktionsfejl. Undtaget herfra er sliddele og dele/komponenter, der er underlagt normalt slid samt skader, der som følge af overdrevet belastning, „forkert brug“, voldsom beskadigelse eller ændring/istandsættelse, der ikke er tilladt. I tilfælde af, at der skal ydes garanti, bedes De kontakte Deres faghandler, hvor De har købt dette produkt. På grund af produktansvar må reparation, vedligeholdelse- og istandsættelsesarbejde kun udføres af en autoriseret faghandler, med anvendelse af originale reservedele.



Producent:

A2J GmbH

Am Fuchsberg 13

D-87452 Altusried

Fon: +49 (08373) 987269

Fax: +49 (08373) 987276

eMail: info@a2j-intl.com

Internet: www.a2j-intl.com



Dette produkt er i overensstemmelse med de væsentlige krav i EU-forordning 2017/745 om medicinsk udstyr - forordning om medicinsk udstyr (MDR)

Opdateret 01.01.2025

Ret til tekniske ændringer forbeholdes.