



PELVI.LOC® PL - OPS - mål posisjonering av overkropp



For trygg bruk av dette produktet må denne monteringsveiledningen og bruksanvisningen leses før første bruk og følges



Bruksområde – formål

PELVI.LOC® OPS-mål brukes for bevegelseshemmede personer, særlig for plassering av overkropp og bekken i rullestol og/eller bilsete, slik at bekkenet ikke kan gli forover.

Tiltenkt pasientgruppe:

- Barn, ungdommer og voksne
- Kjønnsnøytral

Kontroll ved mottatt levering

Pakk ut produktet fullstendig og kontroller om forsendelsen er fullstendig og uten transportskader. Hvis du oppdager at forsendelsen har en uventet feil:

1. Reklamer umiddelbart til transportøren
2. Få registrert skaden/feilen
3. Informer oss eller fagforhandleren umiddelbart

Inkludert i leveringen

- 1) 1 x **PELVI.LOC**[®] PL - OPS-mål forhåndsmontert
- 2) 1 x informasjon om nedlasting av monteringsveiledning og bruksanvisning

Kombinasjon av medisinsk utstyr

Egnet for hjelpemidler som er tiltenkt for bruk av bekkenholdebelte med overkroppsposisjonering.

Montering



Monteringen bør utføres av en person med fagkunnskaper.

1. Før ryggbeltet (gråfarget) gjennom setet og ryggspalten, lukk den bak hodestøtten og stram beltet.



Bruksanvisning



Sikkerhetshenvisninger

Til tross for den stabile konstruksjonen, er komponenter som belter, borrelåser og skulderseler utsatt for en viss grad av slitasje. Derfor anbefales det at **PELVI.LOC**[®] OPS-mål kontrolleres grundig hver 3. måned. Her er det viktig å sjekke at sømmene sitter godt!

- Forsikre deg selv om at produktet er i feilfri stand og sitter korrekt før bruk – fare for ulykker!
- Skadde komponenter, som belter/stropper, borrelåser eller polstre, må ikke repareres eller limes og tas i bruk igjen – fare for ulykker!
- Ikke sitt på polstrene – fare for trykkpunkter, særlig pga. spennene (d)!
- Ikke løft rullestolen over **PELVI.LOC**[®] OPS-mål – fare for ulykker!

Bruksbegrensninger / uønskede bivirkninger

- Ikke bruk **PELVI.LOC**[®] OPS-mål dersom det er trykksteder, sår eller andre aktuelle skader i området rundt polsteret – fare for skader!
- Ikke bruk **PELVI.LOC**[®] OPS-mål ved osteoporose, medfødt benskjørhet eller alvorlige kardiovaskulære sykdommer – fare for skader!

- Se til at **PELVI.LOC**[®] OPS-mål fungerer riktig etter rengjøring!
- Et skadet **PELVI.LOC**[®] OPS-mål bør skiftes ut umiddelbart – fare for ulykker!



OBS:

- **PELVI.LOC**[®] OPS-mål er ikke en del av et sikringssystem for rullestolbrukere og/eller passasjerer som sitter i rullestol under transport i transportkjøretøyer for bevegelseshemmede.
- I henhold til produktansvarsbestemmelsene kan ikke produsenten eller distributører gjøres ansvarlig for skader eller risikoer som forårsakes av barn uten tilsyn i sammenheng med produktet!

Bruk

1. Ta på sittebuksen (a) i skrittet opp til ca. navlehøyde. – Fest skulderselene (b) godt fast til sittebuksen med borrelåsen.



OBS: Pass på at det ikke befinner seg gjenstander under polsteret! Slik unngår du vonde trykksteder.

1. Fest midjebeltet (c) under lett spenning med borrelåsen.
 2. Låseklemme (d) (lukkes hvis den finnes), pass på at det fortsatt er nok plass til en flat hånd mellom magen og polsteret.
 3. Forsikre deg om at låsen (d) er i inngrep!
- Utfør en trekktest!

Dersom posisjoneringssystemet til **PELVI.LOC**[®] OPS-mål løses utilsiktet under bruk, kan dette utbedres ved å stramme på nytt.

For å åpne **PELVI.LOC[®] OPS-mål** trykkes låsen (d) dersom denne finnes og midjebeltet åpnes.

- Pass på at polstrene på skulderselene ikke kommer inn i spilene på drivhjulet!

Rengjøring og desinfisering

- Egnet for vaskemaskin på opptil 40 grader.
- Kjemotermisk desinfeksjon er mulig ved å tilføre ELTRA 40 i vaskeprosessen
- Må ikke sentrifugeres
- Ikke egnet for tørketrommel
-

Vedlikehold

PELVI.LOC[®] OPS-mål må kontrolleres regelmessig for skade og riktig funksjon.

Reparasjoner


Et defekt **PELVI.LOC**[®] OPS-mål må skiftes ut umiddelbart.

Avfallshåndtering

- Enhetens emballasje kan resirkuleres.
- Metalldelene kan resirkuleres som skrapmetall.
- Plastdelene kan resirkuleres.
- Avfallshåndtering gjøres i samsvar med de gjeldende nasjonale lovbestemmelser.
- Hos kommunen kan du få informasjon om lokale miljøstasjoner.



OPS-målark

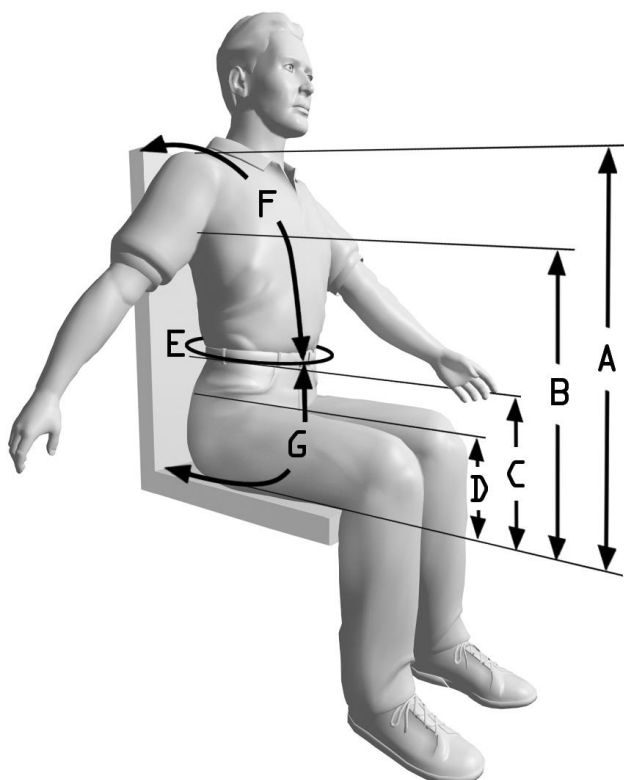

Dimensjoner

A	Sete – skuldre	cm
B	Sete – armhulehøyde	cm
C	Sete – midje	cm
D	Sete – lårhøyde	cm
E	Midje – omkrets	cm
F	Skuldre – midje	cm
G	Setemål (ryggstøtte – midje)	cm

Måles over klærne uten tillegg

Høyde på ryggstøtte	cm	
Bredde på ryggstøtte	cm	
Avstand mellom hodestøtterør	cm	
Gjennomføringsmulighet	Ja	Nei
Sete – ryggstøtte		
Rullestoltype		

Ønskede låsetyper

Trykklås for åpning med 2 fingre Art. No.:KSS-50	☐
Trykklås for åpning med 3 fingre Art. No.:KSS-S-50	☐
Trykklås for åpning med 3 fingre, vendt innover Art. No.:KSS-S-50 180°	☐
SKS-30-SF Stikkylås med sikkerhetsfunksjon (stiftåpning)	☐

uten lateks





OBS: Bare et omhyggelig utfylt målark kan sikre god

posisjonering av overkroppen!



OBS: Ved festing av *PELVI.LOC*[®] OPS-mål i en vanlig personbil,

må personen alltid sikres med den vanlige 3-punktlåsen i bilen i tillegg!

Betingelser for lagring og transport

	Temperaturområde ved langfrtidig lagring -10 °C til +40 °C. Midlertidige temperaturopper, f.eks. i forbindelse med transport, på -20 °C til +60 °C tolereres godt av materialet og påvirker ikke sikkerheten og ytelsen til produktet.
	Beskyttes mot fuktighet under lagring og transport

Garanti

Vi gir en garanti for dette produktet i samsvar med lovkrav. Dette dekker material- og bearbeidingsfeil. Utelukket fra denne er slitasjedeler og deler/komponentgrupper som er utsatt for normal slitasje, samt skader som er et resultat av overdreven belastning, «ikke-forskriftsmessig bruk», voldsom skade eller utillatt endring/repasasjon. I garantitilfelle henvender du deg til fagforhandler, hvor du har kjøpt dette produktet. På grunn av produktansvar får reparasjon-, vedlikeholds- og istandsettingsarbeid kun utføres av autorisert fagforhandler ved bruk av originale reservedeler



Produsent:

A2J GmbH

Am Fuchsberg 13

D-87452 Altusried

Tlf: +49 (08373) 987269

Faks: +49 (08373) 987276

e-post: info@a2j-intl.com

Internett: www.a2j-intl.com



Dette produktet er i samsvar med de grunnleggende kravene i EU-forordning 2017/745 om medisinsk utstyr – Medical Device Regulation (MDR)

Utgave 01.01.2025

Med forbehold om tekniske endringer