



PELVI.LOC® PL-3DSRR - XS -S - M - L



For sikker bruk av dette produktet, vennligst les og følg denne monterings- og bruksanvisningen før første bruk



Bruksområde

PELVI.LOC® PL-3DSRR er til bruk av personer med nedsatt bevegelighet, spesielt for bekkenplassering i rullestoler og aktivitetsrullestoler og forhindrer at brukeren glir fremover.

Beregnet pasientgruppe:

- Barn, ungdom og voksne
- Kjønn: kvinner og menn

Mottakskontroll

Pakk ut produktet helt og kontroller at forsendelsen er fullstendig og uten transportskader. Hvis du opplever at forsendelsen har en uventet feil, så:

1. Klag straks til transportøren
2. Få registrert skaden / feilen
3. Informer oss eller forhandleren din umiddelbart

Leveringsomfang

- 1) 1 x **PELVI.LOC®** PL-3DSRR -XS, -S, -M, -L ikke forhåndsmontert
- 2) 1 x Informasjon for online nedlasting av monterings- og bruksanvisningen

Montering



Monteringen må utføres av en person med spesialkunnskap

1. Plasser polsteret (a) på bekkenområdet/hoftebøyen. – Skrallespennen (e) er festet til rammerøret på rullestolen. (Følg monteringsanvisningene)
2. Tannbeltet (b) festes til rullestolen med spennen eller skrallespennen (e).
 - Logoen på polsteret kan dermed leses forfra.
3. Still inn avstanden mellom putene ved hjelp av det perforerte beltet (d). Bekkenbeltet strammes ved å benytte skrallesperrene (e).
 - Hengslet på det perforerte beltet skal deretter legges midt mellom putene.
 - Trekk ut tannbeltet maksimalt så langt at to tenner bak hver av skrallespennene (e) er frie.
 - Borrelåsen (g) kan frigjøres og polstringen åpnes ved regulering (følges bare ved belter med dekkede sperrespenner)
4. Så festes tannbeltet (b) til rammerøret på rullestolen
5. Så strammes tannbåndet (b) på begge sider så mye at det fremdeles er nok plass til å legge en håndflate mellom låret og polsteret.
6. Om nødvendig kan endene av tannbeltet avrundes. Puss endene av det kuttete tannbeltet om nødvendig. – Fare for personskade.
7. Kontroller at festet sitter godt og er låst på begge sider av tannbeltet.



Bruksanvisning



Sikkerhetsanvisninger

Til tross for den stabile konstruksjonen, er komponenter som låsebelter, tannbelter og polster utsatt for en viss mengde slitasje. Derfor anbefales det å gjennomføre en grundig inspeksjon av **PELVI.LOC®** hver 3. måned. Forsikre deg også om at nagle- og skrueforbindelsene er sikre!

- Du må kontrollere at produktet er i brukbar stand og har riktig passform før bruk - fare for ulykke!
- Ikke lapp eller lim ødelagte deler som låsestropper/sikkerhetsbelter (f) tannbelter (b) eller polstre (a), for så å bruke dem igjen – fare for ulykke.
- Ikke sitt på polsteret – Fare for trykkpunkter spesielt på grunn av sperrene (e).
- Ikke løft rullestolen over **PELVI.LOC®**. Fare for ulykke.
- Forsikre deg om at hendene ikke kommer mellom det tannbeltet og rammen eller seterøret - fare for klemskader!

Begrensninger i bruk / uønskede bivirkninger

- Ikke bruk **PELVI.LOC®** hvis det er trykkpunkter, sår eller andre skader som ikke er grodd i området til polsteret – fare for personskader.
- Ikke bruk **PELVI.LOC®** i tilfelle beintap, beinskjørhet eller alvorlige sirkulasjonsforstyrrelser - fare for personskade.
- Etter rengjøring må det påses at **PELVI.LOC®** virker som den skal.
- En skadet **PELVI.LOC®** bør skiftes ut umiddelbart – fare for ulykke.



Advarsel:

- **PELVI.LOC®** er ikke en del av sikkerhetssystemet for rullestolen og/eller brukeren ved transport av personer med nedsatt funksjonsevne i et kjøretøy.
- Når det gjelder produktansvar, kan verken produsenten eller distributøren holdes ansvarlig for skader eller risiko i tilknytning til barn uten tilsyn i forbindelse med produktet.

Bruk

1. For å bruke **PELVI.LOC®** legges polsteret (a) på bekkenområdet/hofteleddet.



Advarsel: Forsikre deg om at det ikke er gjenstander under polsteret! På den måten unngår du smertefulle trykksteder.

2. **Viktig:** må ikke plasseres over bekkenet eller ryggraden!
 3. Før så tannbeltet (b) gjennom den respektive sperren. For å gjøre dette, bruk den tilhørende skrallespennen (e).
 4. Så strammes tannbåndet (b) så mye at det fremdeles er nok plass til å legge en håndflate mellom låret og polsteret.
 5. Forsikre deg om at spennene (c) griper inn i tennene på tannbeltet.
- Gjennomfør en strekkprøve.

Hvis posisjoneringssystemet løsner uønsket mens du bruker **PELVI.LOC®**, kan dette avhjelpes ved å stramme spennen på nytt.

For å åpne **PELVI.LOC®** trykk på spennen (e) og trekk ut tannbeltet.

- Pass på at polstrene ikke kommer inn mellom eikene på drivhjulet.

Rengjøring og desinfisering

- Kan vaskes i maskin ved 40 grader.
- Kjemotermisk desinfisering mulig ved å tilsette ELTRA 40 til vaskesyklusen
- Ingen sentrifugering
- Egner seg ikke i tørketrommelen

Vedlikehold

PELVI.LOC® må regelmessig sjekkes for skader og funksjonalitet.

Reparasjon

Defekt **PELVI.LOC®** må skiftes ut omgående.

Avfallsbehandling

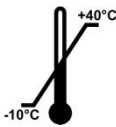
- Emballasjen til enheten kan gjenvinnes.
- Metalldelene kan kastes i metallavfall, og er gjenvinnbare.
- Plastmaterialene er gjenvinnbare.
- Avfallshåndteringen må skje i henhold til respektive forskrifter på stedet.
- Spør lokalt / kommunen om lokale avfallsselskaper.

Tekniske data

	XXXS	XXS	XS	S	M	L	XL
Setebredde (cm)		16 - 24	16 - 24	20 - 32	30 - 40	36 - 46	
Polstringsstørrelse (cm)		14 x 6	18 x 7	21 x 8	25,5 x 8	26,5 x 8,5	
Vekt (g)		220	220	220	280	280	
Forutbestemt bruddpunkt (ca. kg)		40	60	60	80	80	

Størrelse tannbånd XXXS - XXS	1,9 x 0,2 x 40 cm	uten lateks  
Størrelse tannbånd XS - S	1,9 x 0,2 x 40 cm	
Størrelse tannbånd M - L - XL	2,4 x 0,2 x 40 cm	
Skrallespenne str. XXXS		
Skrallespenne str. XXS	B-19-STAR-BL	
Skrallespenne str. XS - S	B-19-STAR-BL	
Skrallespenne str. M - L - XL	B-24-ERGO-BL	

Betingelser for lagring og transport

	Temperaturområde ved langfristig lagring -10 °C til +40 °C. Midlertidige temperaturtopper, f.eks. i forbindelse med transport, på -20 °C til +60 °C tolereres godt av materialet og påvirker ikke sikkerheten og ytelsen til produktet.
	Beskyttes mot fuktighet under lagring og transport

Garanti

Vi gir en garanti for dette produktet i samsvar med lovkrav. Dette dekker material- og bearbeidingsfeil. Utelukket fra denne er slitasjedeler og deler/komponentgrupper som er utsatt for normal slitasje, samt skader som er et resultat av overdreven belastning, «ikke-forskriftsmessig bruk», voldsom skade eller utillatt endring/reparasjon. I garantitilfelle henvender du deg til fagforhandler, hvor du har kjøpt dette produktet. På grunn av produktansvar får reparasjon-, vedlikeholds- og istandsettingsarbeid kun utføres av autorisert fagforhandler ved bruk av originale reservedeler



Produsent:

A2J GmbH
Am Fuchsberg 13
D-87452 Altusried
Tlf: +49 (08373) 987269
Faks: +49 (08373) 987276
e-post: info@a2j-intl.com
Internett: www.a2j-intl.com



Dette produktet er i samsvar med de grunnleggende kravene i EU-forordning 2017/745 om medisinsk utstyr – Medical Device Regulation (MDR)

Utgave 01.01.2025

Med forbehold om tekniske endringer