




PELVI.LOC®

Genuframe

PL-GF - XXS - XS - S - M - L - XL

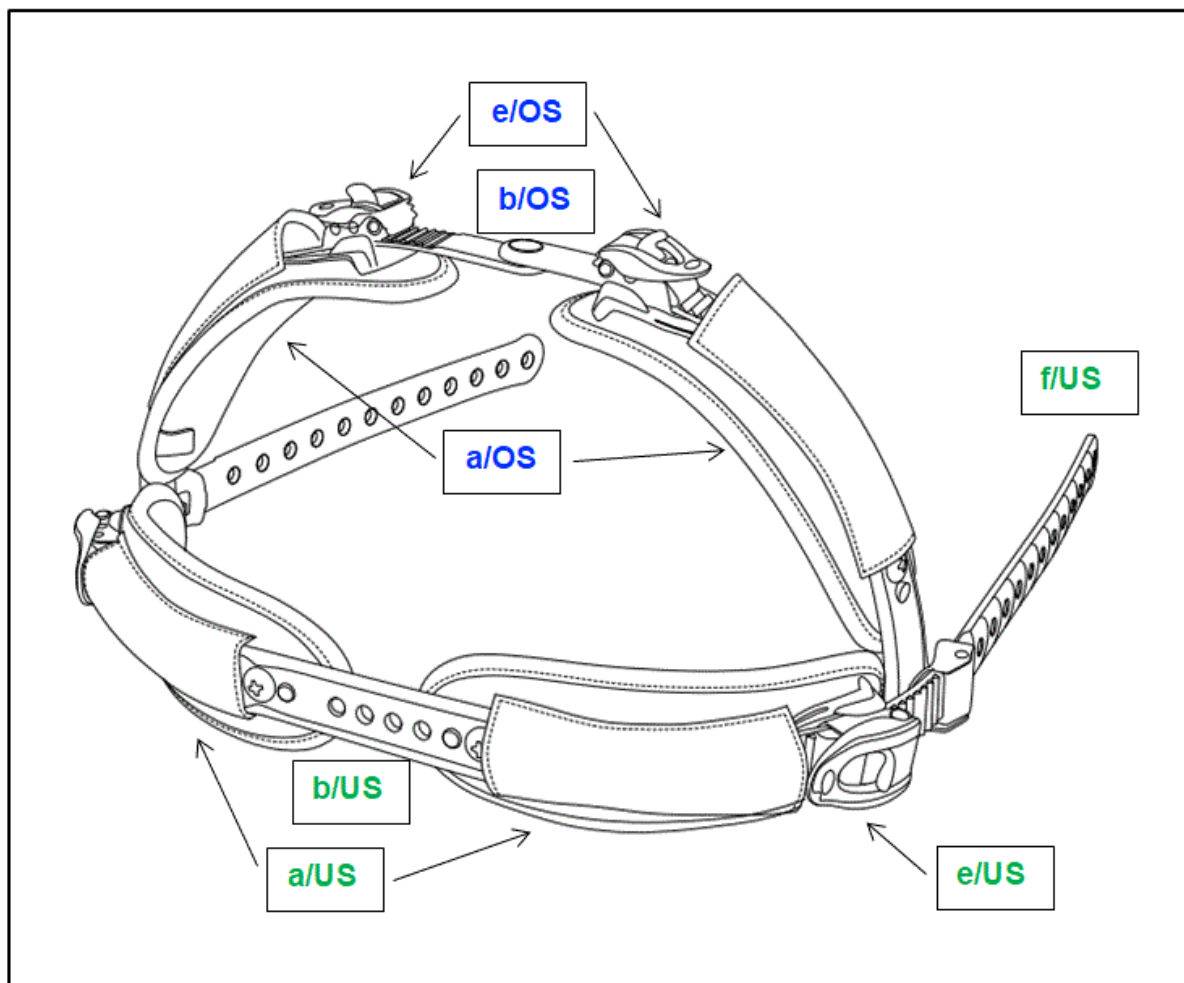

For sikker bruk av dette produktet, vennligst les og følg denne monterings- og bruksanvisningen før første bruk



Bruksområde

PELVI.LOC® Genuframe - PL-GF er til bruk av personer med nedsatt bevegelighet, spesielt for bekken- og lårplassering i rullestoler og aktivitetsrullestoler og forhindrer at brukeren glir fremover.

Beregnet pasientgruppe:

- Barn, ungdom og voksne
- Kjønn: kvinner og menn

Mottakskontroll

Pakk ut produktet helt og kontroller at forsendelsen er fullstendig og uten transportskader. Hvis du opplever at forsendelsen har en uventet feil, så:

1. Klag straks til transportøren
2. Få registrert skaden / feilen
3. Informer oss eller forhandleren din umiddelbart

Leveringsomfang

- 1) 1 x **PELVI.LOC**® Genuframe låstropp, -XXS, -XS, -S, -M, -L, -XL, forhåndsmontert
- 2) 1 x **PELVI.LOC**® Genuframe leggstropp, -XXS, -XS, -S, -M, -L, -XL, forhåndsmontert
- 3) 1 x Informasjon for online nedlasting av monterings- og bruksanvisningen

Kombinasjon av medisinsk utstyr

Egnet som hjelpemiddel ved bruk av et bekkenbelte

Montering av leggstropp



Monteringen må utføres av en person med spesialkunnskap

Montering av **PELVI.LOC**® Genuframe leggstropp er tilsvarende den for PL-UG

1. Plasser polstrene (**a/US**) på leggen (under begynnelsen på skinnebeinet eller leggbeinet).
Dermed ligger hull-/tannbåndet (**f/US**) åpent.
 - **PELVI.LOC**®-logoen på leggpolsteret kan dermed leses forfra.
2. Reguler avstanden mellom putene ved hjelp av det perforerte beltet **b/US**.
3. Så festes tannbeltet (**f/US**) til rammerøret på rullestolen
4. Så strammes tannbåndet (**f/US**) på begge sider så mye at det fremdeles er nok plass til å legge en håndflate mellom låret og polsteret.
5. Ved behov kan endene av tannbeltet avrundes. Puss endene av det kuttete tannbeltet om nødvendig. – Fare for personskade.
6. Kontroller at festet sitter godt og er låst på begge sider av tannbeltet (**f/US**).

Montering av låstropp

Montering av **PELVI.LOC**® Genuframe lårbelte tilsvarende den for PL-2DB

7. Plasser alltid polsteret (**a/OS**) på låret, med tannbeltet (**b/OS**) vendt oppover.
 - **PELVI.LOC**®-logoen på lårpolderet kan dermed leses forfra.
8. Still inn avstanden til polsteret via tannbeltet (**b/OS**) ved å regulere skrallespennene på låstroppen (**e/OS**).
 - Hengslet på det tannbeltet (**b/OS**) skal så legges midt mellom polstrene.
 - Trekk ut tannbeltet maksimalt så langt at to tenner bak hver av skrallespennene (**e/OS**) er frie.



Bruksanvisning



Sikkerhetsanvisninger

Til tross for den stabile konstruksjonen, er komponenter som låsebelter, tannbelter og polster utsatt for en viss mengde slitasje. Derfor anbefales det å gjennomføre en grundig inspeksjon av **PELVI.LOC®** hver 3. måned. Forsikre deg også om at nagle- og skrueforbindelsene er sikre!

- Du må kontrollere at produktet er i brukbar stand og har riktig passform før bruk - fare for ulykke!
- Ikke lapp eller lim ødelagte deler som låsestropper/sikkerhetsbelter (f) tannbelter (b) eller polstre (a), for så å bruke dem igjen – fare for ulykke.
- Ikke sitt på polsteret – Fare for trykkpunkter spesielt på grunn av sperrene (e).
- Ikke løft rullestolen over **PELVI.LOC®**. Fare for ulykke.
- Forsikre deg om at hendene ikke kommer mellom det tannbeltet og rammen eller seterøret - fare for klemskader!

Begrensninger i bruk / uønskede bivirkninger

- Ikke bruk **PELVI.LOC®** hvis det er bloduttredelser, sår eller andre skader som ikke er grodd i området til polsteret – fare for personskader.
- Ikke bruk **PELVI.LOC®** i tilfelle beintap, beinskjørhet eller alvorlige sirkulasjonsforstyrrelser - fare for personskade.
- Etter rengjøring må det påses at **PELVI.LOC®** virker som den skal.
- En skadet **PELVI.LOC®** bør skiftes ut umiddelbart – fare for ulykke.



Advarsel:

- **PELVI.LOC®** er ikke en del av sikkerhetssystemet for rullestolen og/eller brukeren ved transport av personer med nedsatt funksjonsevne i et kjøretøy.
 - Når det gjelder produktansvar, kan verken produsenten eller distributøren holdes ansvarlig for skader eller risiko i tilknytning til barn uten tilsyn i forbindelse med produktet.
1. For å bruke **PELVI.LOC®** legges polsteret (a) på leggen

Bruk

1. For å bruke **PELVI.LOC®** legges polsteret (a) på låret



Advarsel: Forsikre deg om at det ikke er gjenstander under polsteret! På den måten unngår du smertefulle trykksteder.

2. Før så tannbeltet (**f/US**) gjennom den respektive skrallen. For å gjøre dette, bruk den tilhørende skrallspennen (**e/US**).
 3. Så strammes tannbåndet (**f/US**) så mye at det fremdeles er nok plass til å legge en håndflate mellom låret og polsteret.
 4. Forsikre deg om at spennene (**e/US**) griper inn i tennene på tannbeltet.
- Gjennomfør en strekkprøve.

For å åpne PELVI.LOC® trykk på spennen (**e/US**) og trekk ut tannbeltet.

- Pass på at polstrene ikke kommer inn mellom eikene på drivhjulet.

Rengjøring og desinfisering

- Kan vaskes i maskin ved 40 grader.
- Kjemotermisk desinfisering mulig ved å tilsette ELTRA 40 til vaskesyklusen
- Ingen sentrifugering
- Egner seg ikke i tørketrommelen

Vedlikehold

PELVI.LOC® må regelmessig sjekkes for skader og funksjonalitet.

Reparasjon

Defekt **PELVI.LOC®** må skiftes ut omgående.

Avfallsbehandling

- Emballasjen til enheten kan gjenvinnes.
- Metalldelene kan kastes i metallavfall, og er gjenvinnbare.
- Plastmaterialene er gjenvinnbare.
- Avfallshåndteringen må skje i henhold til respektive forskrifter på stedet.
- Spør lokalt / kommunen om lokale avfallsselskaper.

Tekniske data

	XXXS	XXS	XS	S	M	L	XL
Setebredde (cm)		12 - 20	16 - 24	20 - 32	30 - 40	36 - 46	44 - 52
Polstringsstørrelse (cm)		11,5 x 7,5	18 x 7	21 x 8	25,5 x 8	26,5 x 8,5	28,5 x 9
Vekt (g)		200	220	220	280	280	280
Forutbestemt bruddpunkt (ca. kg)		60	60	60	80	80	80

Størrelse tannbånd XXXS - XXS	19 x 0,2 x 40 cm	uten lateks  
Størrelse tannbånd XS - S	19 x 0,2 x 40 cm	
Størrelse tannbånd M - L - XL	2,4 x 0,2 x 40 cm	
Skrallespenne str. XXXS		
Skrallespenne str. XXS		
Skrallespenne str. XS - S	B-24-ERGO-BL	
Skrallespenne str. M - L - XL	B-24ERGO-BL	

Betingelser for lagring og transport

	Temperaturområde ved langfristig lagring -10 °C til +40 °C. Midlertidige temperaturtopper, f.eks. i forbindelse med transport, på -20 °C til +60 °C tolereres godt av materialet og påvirker ikke sikkerheten og ytelsen til produktet.
	Beskyttes mot fuktighet under lagring og transport

Garanti

Vi gir en garanti for dette produktet i samsvar med lovkrav. Dette dekker material- og bearbeidingsfeil. Utelukket fra denne er slitasjedeler og deler/komponentgrupper som er utsatt for normal slitasje, samt skader som er et resultat av overdreven belastning, «ikke-forskriftsmessig bruk», voldsom skade eller utillatt endring/reparasjon. I garantitilfelle henvender du deg til fagforhandler, hvor du har kjøpt dette produktet. På grunn av produktansvar får reparasjon-, vedlikeholds- og istandsettingsarbeid kun utføres av autorisert fagforhandler ved bruk av originale reservedeler



Produsent:

A2J GmbH
Am Fuchsberg 13
D-87452 Altusried
Tlf: +49 (08373) 987269
Faks: +49 (08373) 987276
e-post: info@a2j-intl.com
Internett: www.a2j-intl.com



Dette produktet er i samsvar med de grunnleggende kravene i EU-forordning 2017/745 om medisinsk utstyr – Medical Device Regulation (MDR)

Utgave 01.01.2025

Med forbehold om tekniske endringer