


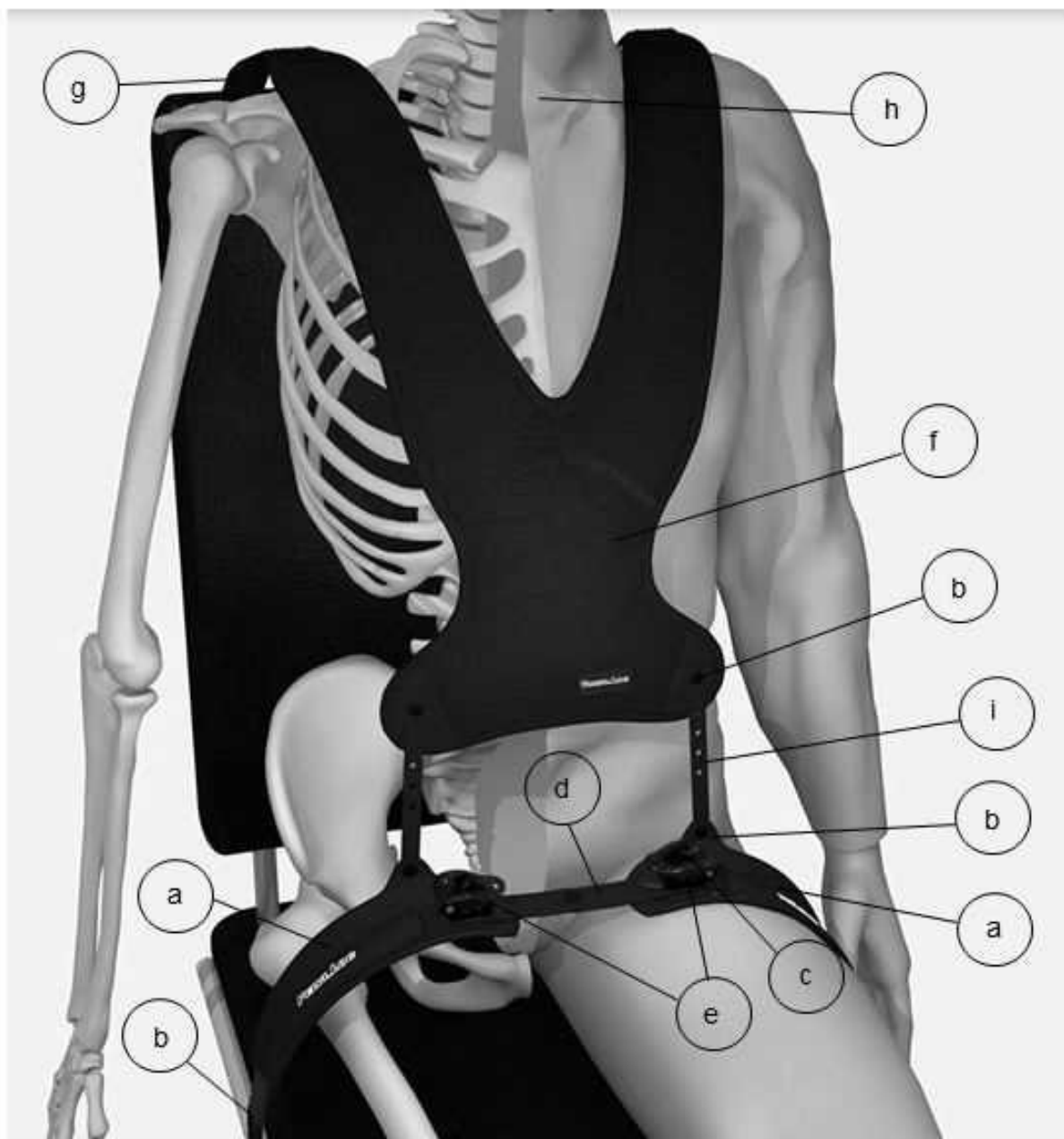

For sikker bruk av dette produktet, vennligst les og følg denne monterings- og bruksanvisningen før første bruk

Bruksområde

Denne Torso.Loc TL-3DSR tjener sammen med TL-W til bedre posisjonering og tilbaketrekning av bekkenet for personer med nedsatt bevegelighet på et sete, f.eks. Rullestol, seteskill, behandlingsstol, rehab buggy

Beregnet pasientgruppe:

- Barn, ungdom og voksne
- Kjønn: kvinner og menn

Mottakskontroll

Pakk ut produktet helt og kontroller at forsendelsen er fullstendig og uten transportskader. Hvis du opplever at forsendelsen har en uventet feil, så:

1. Klag straks til transportøren
2. Få registrert skaden / feilen
3. Informer oss eller forhandleren din umiddelbart

Leveringsomfang

- 1) 1 x TL-3DSR ikke forhåndsmontert
- 2) 1 x TL-W ikke forhåndsmontert
- 3) 1 x Informasjon for online nedlasting av monterings- og bruksanvisningen / anbefalinger

Kombinasjon av medisinsk utstyr

Passer som hjelpemidler ved bruk av et belte som trekker bekkenet tilbake, og brukes sammen med en posisjoneringsvest.



Bruksområde

PELVI.LOC® Nedre bein - belte - reversert - PL-UGR er til bruk av personer med nedsatt bevegelighet, spesielt for bekken- og lårplassering i rullestoler og posisjonering av overkroppen og forhindrer at brukeren sklir fremover og at overkroppen vipper fremover.



Montering

- Monteringen må utføres av en person med spesialkunnskap
- 1. Plasser polsteret (a) på lårene. – Tannbeltet (b) festes til rullestolen.
 - Logoen på polsteret kan dermed leses forfra.
- 2. Still inn avstanden mellom putene ved hjelp av det perforerte beltet (d).
Bekkenbeltet strammes ved å benytte skrallespennene (e).
 - Hengslet på det perforerte beltet skal deretter legges midt mellom putene.
 - Trekk ut tannbeltet maksimalt så langt at to tenner bak hver av skrallespennene (e) er frie.
- 1. Deretter festes tannbeltet (b) til rammerøret på rullestolen
(Følg anbefalinger for montering og anbefalinger)
- 2. Stram tannbeltet (b) likt på begge sider slik at det fremdeles er plass til en håndflate mellom låret og polsteret.
- 3. Om nødvendig kan endene av tannbeltet avrundes. Puss endene av det kuttete tannbeltet om nødvendig. – Fare for personskade.
- 4. Kontroller at festet sitter godt og er låst på begge sider av tannbeltet.
- 5. Ta vesten (f) på overkroppen. – Beltestroppen (g) festes til rullestolen på begge sider (med skruer eller med en 25 mm foldespenne)
 - Logoen på polsteret kan dermed leses forfra.
- 6. Reguler avstanden neoprenvesten har til nakken (h) via båndet (g) slik at det ikke er fare for kvelning.
- 7. Om nødvendig skru de to perforerte beltene (i) sammen med TL-3DSR og TL-W.
Neoprenvesten strammes ved å justere de perforerte stroppene (i).
 - Neoprenvesten skal tilpasse seg konturen til kroppen i midjen.
- 8. Reguler og posisjoner neoprenvesten litt over beltet (g).
- 9. Stram skulderstroppene (g) likt på begge sider, slik at det fremdeles er plass til en håndflate mellom nakken og polsteret (risiko for rødhet i huden)
- 10. Om nødvendig kan endene på beltet (g) avrundes.



Bruksanvisning



Sikkerhetsanvisninger

På tross av den stabile konstruksjonen, er komponenter som låsestropper, belter, tannbelter og polstre utsatt for en viss mengde slitasje. Derfor anbefales det å gjennomføre en grundig inspeksjon av Torso.Loc hver 6. måned. Forsikre deg også om at nagle- og skrueforbindelsene er sikre!

- Du må kontrollere at produktet er i brukbar stand og har riktig passform før bruk - fare for ulykke!
- Skadde deler som belter/hullstropper (i), tannbelter (b) eller polstre (a) vester (f) må ikke repareres eller limes for så å brukes på nytt. – Fare for ulykke.
- Ikke sitt på polsteret. Fare for bloduttredelser spesielt på grunn av spennene (e).
- Ikke løft rullestolen over Torso.Loc. Fare for ulykke!
- Forsikre deg om at hendene ikke kommer mellom det perforerte beltet og rammen eller seterøret. Klemmefare!

Begrensninger i bruk / uønskede bivirkninger

- Ikke bruk Torso.Loc hvis det er bloduttredelser i nærheten av polsteret,
- Sår eller andre skader som ikke er leget. – Fare for personskader!
- Ikke bruk Torso.Loc i tilfelle beintap, beinskjørhet eller alvorlige sirkulasjonsforstyrrelser – fare for personskade.
- Etter rengjøring må det påses at Torso.Loc virker som den skal.
- En skadet Torso.Loc bør skiftes ut umiddelbart – fare for ulykke.



Advarsel:

Torso.Loc er ikke en del av sikkerhetssystemet for rullestolen og/eller brukeren ved transport av personer med nedsatt funksjonsevne i et kjøretøy.

- Når det gjelder produktansvar, kan verken produsenten eller distributøren holdes ansvarlig for skader eller risiko i tilknytning til barn uten tilsyn i forbindelse med produktet.

Bruk

1. For å bruke Torso.Loc legges polsteret (a) på låret.



Advarsel:

Forsikre deg om at det ikke er gjenstander under polsteret! På den måten unngår du smertefulle trykksteder.

2. Før så tannbeltet (b) gjennom den respektive sperren. For å gjøre dette, bruk den tilhørende skrallespenningen (e).
3. Så strammes tannbåndet (b) så mye at det fremdeles er nok plass til å legge en håndflate mellom låret og polsteret.
4. Forsikre deg om at spennene (c) griper inn i tennene på tannbeltet.
 - Gjennomfør en strekkprøve.

For å åpne Torso.Loc trykk på spennen (c) og trekk ut tannbeltet.

- Pass på at polstrene ikke kommer inn mellom eikene på drivhjulet.

Rengjøring og desinfisering

- Kan vaskes i maskin ved 40 grader.
- Kjemotermisk desinfisering mulig ved å tilsette ELTRA 40 til vaskesyklusen
- Ingen sentrifugering
- Egner seg ikke i tørketrommelen

Vedlikehold

Torso.Loc må regelmessig sjekkes for skader og funksjonalitet.

Reparasjon

Defekte Torso.Loc må skiftes ut omgående.

Avfallsbehandling

- Emballasjen til enheten kan gjenvinnes.
- Metalldelene kan kastes i metallavfall, og er gjenvinnbare.
- Plastmaterialene er gjenvinnbare.
- Avfallshåndteringen må skje i henhold til respektive forskrifter på stedet.
- Spør lokalt / kommunen om lokale avfallsselskaper.

Tekniske data TL-3DSR

Setebredde:	XS	16 til 24 cm
Polstringsstørrelse:	XS	18 x 7 cm
Vekt:	XS	Ca. 220 g
Forbestemt bruddpunkt:	XS	til ca. 60 kg

Setebredde:	S	20 til 32 cm
Polstringsstørrelse:	S	21 x 7 cm
Vekt:	S	Ca. 220 g
Forutbestemt bruddpunkt:	S	til ca. 60 kg


Setebredde:	M	30 til 40 cm
Polstringsstørrelse:	M	25,5 x 8
Vekt:	M	Ca. 280 g
Forutbestemt bruddpunkt:	M	til ca. 80 kg

Setebredde:	L	36 til 46 cm
Polstringsstørrelse:	L	26,5 x 8,5 cm
Vekt:	L	Ca. 280 g
Forutbestemt bruddpunkt:	L	til ca. 80 kg

Stl. tannbånd: XS-S	1,9 x 0,2 x 40 cm
Stl. tannbånd: M-L	2,4 x 0,2 x 40 cm

tekniske data TL-W

Art.Nr.	A	B	C	D	E	F
TL-W-S	31	22	12	16	4	12
TL-W-M	38	29	16	19	5	13
TL-W-L	47	37	19	22	6	14
TL-W-XL	55	45	24	26	6,5	17

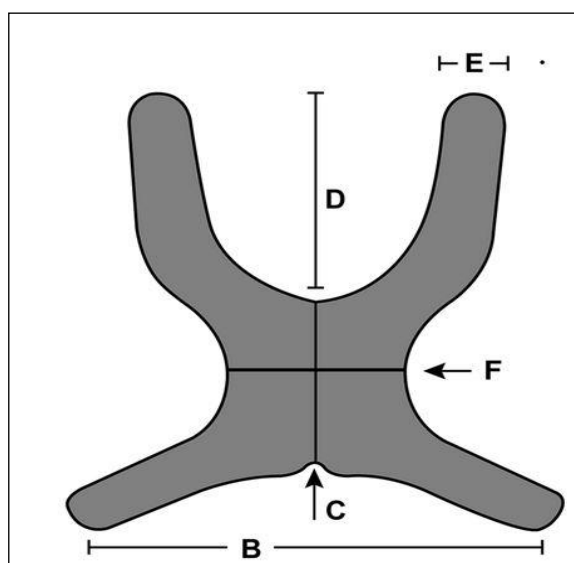

uten lateks



Betingelser for lagring og transport

	Temperaturområde ved langfristig lagring -10 °C til +40 °C. Midlertidige temperaturopper, f.eks. i forbindelse med transport, på -20 °C til +60 °C tolereres godt av materialet og påvirker ikke sikkerheten og ytelsen til produktet.
	Beskyttes mot fuktighet under lagring og transport

Garanti

Vi gir en garanti for dette produktet i samsvar med lovkrav. Dette dekker material- og bearbeidingsfeil. Utelukket fra denne er slitasjedeler og deler/komponentgrupper som er utsatt for normal slitasje, samt skader som er et resultat av overdreven belastning, «ikke-forskriftsmessig bruk», voldsom skade eller utillatt endring/repasjon. I garantitilfelle henvender du deg til fagforhandler, hvor du har kjøpt dette produktet. På grunn av produktansvar får reparasjon-, vedlikeholds- og istandsettingsarbeid kun utføres av autorisert fagforhandler ved bruk av originale reservedeler



Produsent:

A2J GmbH

Am Fuchsberg 13

D-87452 Altusried

Tlf: +49 (08373) 987269

Faks: +49 (08373) 987276

e-post: info@a2j-intl.com

Internett: www.a2j-intl.com



Dette produktet er i samsvar med de grunnleggende kravene i EU-forordning 2017/745 om medisinsk utstyr – Medical Device Regulation (MDR)

Utgave 01.01.2025

Med forbehold om tekniske endringer