


PELVI.LOC PL-UG - XS, -S, -M, -L

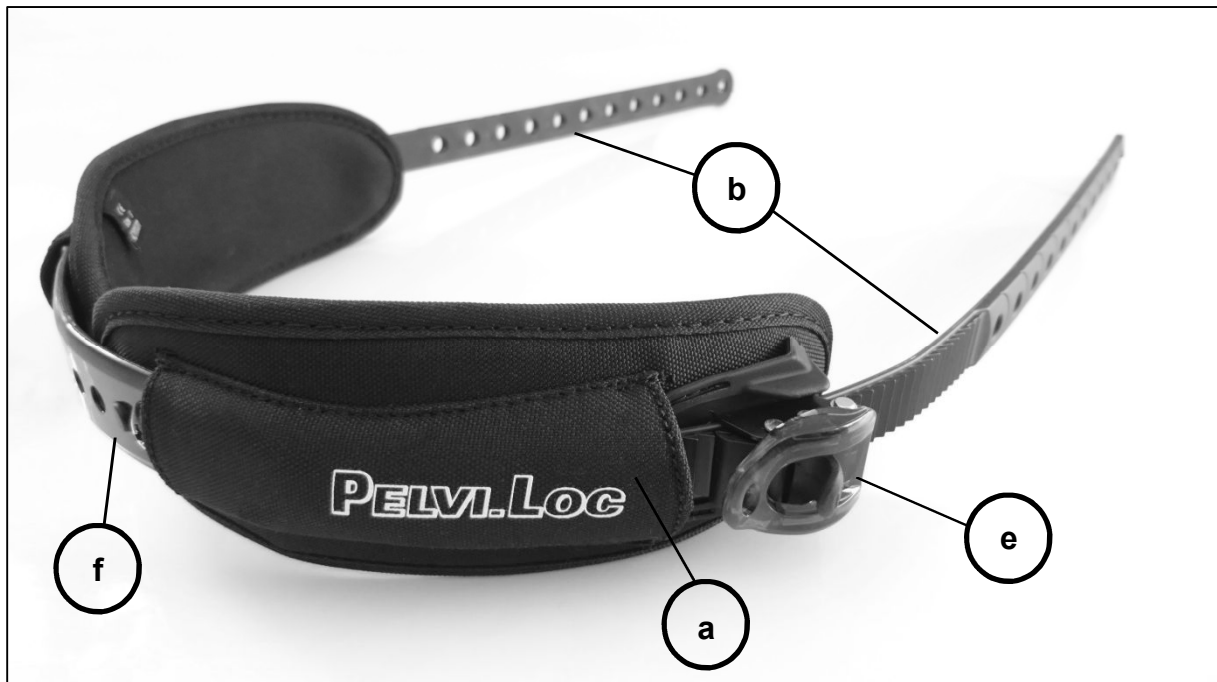

Für den sicheren Gebrauch dieses Produktes lesen und beachten Sie vor dem Erstgebrauch diese Montage-Gebrauchsanleitung

Verwendungszweck

Dieser Pelvi.Loc Unterschenkel- Gurt dient Personen mit eingeschränkter Mobilität speziell zur Becken - Oberschenkel Positionierung und verhindert ein nach vorne rutschen.

Empfangskontrolle

Packen Sie das Produkt komplett aus und prüfen Sie die Sendung auf Vollständigkeit und Transportschäden. Sollten Sie feststellen, dass die Sendung wider Erwarten einen Fehler aufweist, so:

1. Reklamieren Sie unverzüglich beim Frachtführer
2. Lassen Sie den Schaden / Fehler protokollieren
3. Informieren Sie uns oder Ihren Fachhändler unverzüglich

Lieferumfang

- 1) 1 x PELVI.LOC vormontiert
- 2) 1 x Montage- und Gebrauchsanleitung

Montage

- Die Montage sollte durch eine Person mit fachlichen Kenntnissen erfolgen
1. Die Polster (a) jeweils im Unterschenkelbereich (unterhalb des Tibia oder Fibula Köpfchens) anlegen. – Das Zahnband (b) liegt dabei außen.
 - Das Logo auf dem Polster ist danach von vorn lesbar!
 2. Den Abstand der Polster über den Lochriemen einstellen. Anschließend das Zahnband (b) am Rahmenrohr des Rollstuhls befestigen.
 3. Das Zahnband (b) auf beiden Seiten gleich spannen.
 4. Bei Bedarf können die Enden des Zahnbandes halbrund abgelängt werden. Die Enden des abgelängten Zahnbandes ggf. entgraten. –Verletzungsgefahr!
 5. Den festen Sitz sowie die Arretierung auf beiden Seiten des Zahnbandes prüfen!

Gebrauchsanleitung

Sicherheitshinweise

Trotz der stabilen Bauweisen unterliegen Bauteile wie Lochgurte, Gurtbänder, Zahnband und Polster einem gewissen Verschleiß. Daher wird empfohlen, den PELVI.LOC alle 6 Monate gründlich zu kontrollieren. Hierbei ist auch auf den festen Sitz von Nieten- und Schraubverbindungen zu achten!

- Überzeugen Sie sich vor der Benutzung von dem gebrauchsfähigen Zustand sowie dem korrekten Sitz des Produktes. –Unfallgefahr!
- Beschädigte Bauteile wie Gurtband/Lochriemen (f), Zahnband (b) oder Polster (a) nicht flicken bzw. kleben und wieder einsetzen. –Unfallgefahr!
- Setzen Sie sich nicht auf die Polster –Gefahr von Druckstellen speziell durch die Ratschen (c)!
- Heben Sie den Rollstuhl nicht über den PELVI.LOC an. Unfallgefahr!
- Achten Sie darauf, dass die Hände nicht zwischen Lochgurt und Rahmen- oder Sitzrohr geraten. Quetschgefahr!
- Verwenden Sie den PELVI.LOC nicht wenn sich in dem Bereich der Polster Druckstellen, Wunden oder andere nicht verheilte Verletzungen befinden. –Verletzungsgefahr!
- Verwenden Sie den PELVI.LOC nicht bei Knochenschwund, Glasknochen oder starken Durchblutungsstörungen. –Unfallgefahr!
- Nach dem Reinigen die korrekte Funktion des PELVI.LOC sicherstellen!
- Ein beschädigter PELVI.LOC sollte unverzüglich erneuert werden. –Unfallgefahr!

Achtung:

Der PELVI.LOC ist nicht Teil des Rückhaltesystems für den Rollstuhl und/oder Insassen beim Transport in einem Behindertentransportfahrzeug.

- Weder Produzent noch Vertrieb können im Sinne der Produkthaftung für Schäden oder Risiken haftbar gemacht werden, die durch unbeaufsichtigt Kinder im Zusammenhang mit dem Produkt verursacht werden!

Handhabung

1. Zum Gebrauch des PELVI.LOC werden die Polster (a) auf die Oberschenkel gelegt.
Achtung:
Achten Sie darauf, dass sich keine Gegenstände unter dem Polster befinden! So vermeiden Sie schmerzhafte Druckstellen.
2. Dann das Zahnband (b) durch die jeweilige Ratsche führen. Dazu die entsprechende Ratschenschnalle (e) betätigen.
3. Anschließend das Zahnband (b) soweit spannen, dass noch Platz für eine flache Hand zwischen Oberschenkel und Polster ist.
4. Stellen Sie sicher, dass die Schnapper © in die Zähne des Zahnbands greifen!
 - Zug probe durchführen!

Zum Öffnen des PELVI.LOC den Schnapper © betätigen und das Zahnband herausziehen.

- Darauf achten, dass die Polster nicht zwischen die Speichen des Antriebrades geraten!

Reinigung und Desinfektion

- Geeignet für die Waschmaschine bis 40 Grad.
- Chemothermische Desinfektion durch Zugabe von ELTRA 40. zum Waschgang
- Nicht schleudern
- Nicht geeignet für den Trockner

Wartung

Der PELVI.LOC ist regelmäßig auf Beschädigung und Funktion zu überprüfen.

Reparaturen

Defekten PELVI.LOC unverzüglich austauschen.

Entsorgung

- Die Geräteverpackung kann der Wertstoffwiederverwendung zugeführt werden.
- Die Metallteile können der Altmetallverwertung zugeführt werden.
- Kunststoffteile können der Altmetallverwertung zugeführt werden.
- Die Entsorgung muss gemäß den jeweiligen nationalen gesetzlichen Bestimmungen erfolgen.
- Fragen Sie bitte bei der Stadt-/Gemeindeverwaltung nach örtlichen Entsorgungsunternehmen.

Technische Daten

| | | |
|------------------|----|---------------|
| Kniebreite: | XS | 16 bis 24 cm |
| Polstergröße: | XS | 18 x 7 cm |
| Gewicht: | XS | Ca.220 g |
| Sollbruchstelle: | XS | Bei ca. 60 kg |

| | | |
|------------------|---|---------------|
| Kniebreite: | S | 20 bis 32 cm |
| Polstergröße: | S | 21 x 8 cm |
| Gewicht: | S | Ca. 220 g |
| Sollbruchstelle: | S | Bei ca. 60 kg |

| | | |
|------------------|---|---------------|
| Kniebreite: | M | 30 bis 40 cm |
| Polstergröße: | M | 25,5 x 8 cm |
| Gewicht: | M | Ca. 280 g |
| Sollbruchstelle: | M | Bei ca. 80 kg |

| | | |
|------------------|---------------------|---------------|
| Kniebreite: | L | 36 bis 46 cm |
| Polstergröße: | L | 26,5 x 8,5 cm |
| Gewicht: | L | Ca. 280 g |
| Sollbruchstelle: | L | Bei ca. 80 kg |
| | | |
| Zahnband:XS-S | 1,9 x 0,2 x 19,5 cm | |
| Zahnband:M-L | 2,4 x 0,2 x 22,5 cm | |

Hinweis: Kniebreite nicht Sitzbreite !

Gewährleistung

Für dieses Produkt übernehmen wir die Gewährleistung entsprechend des gesetzlichen Bestimmungen und erstreckt sich auf Material- und Verarbeitungsfehler. Hiervon ausgeschlossen sind Verschleißteile und Teile/Baugruppen, die einer bestimmungsgemäßen Abnutzung unterliegen sowie Schäden, die sich als Folge übermäßiger Beanspruchung, unrichtiger Behandlung, gewaltsamer Beschädigung oder unzulässiger Änderung/Instandsetzung ergeben. Im Gewährleistungsfall wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler, bei dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

Aus Gründen der Produkthaftung dürfen Reparatur-, Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten nur durch autorisierten Fachhändler unter Verwendung von Original-Ersatzteilen durchgeführt werden.

Produzent:

A2J GmbH
Am Fuchsberg 13
D-87452 Altusried
Fon: +49 (08373) 987269
Fax: +49 (08373) 987276
eMail: info@a2j-intl.com
Internet: www.a2j-intl.com



Dieses Produkt ist konform mit
der EG-Richtlinie 93/42/EWG
für Medizinprodukte