




PELVI.LOC® PL-3DWP – XXS - XS - S - M - L



Für die sichere Anwendung dieses Produktes lesen und beachten Sie bitte vor dem Erstgebrauch diese Montage- und Gebrauchsanweisung

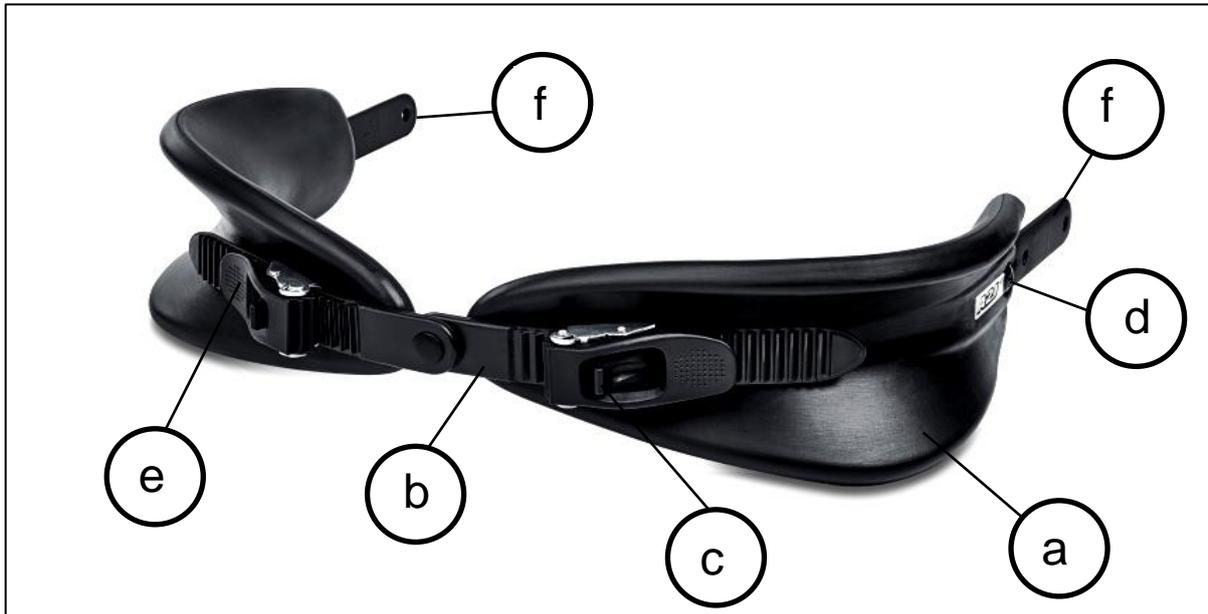

Anwendungsbereich

Dieser **PELVI.LOC®** PL-3DWP Waterproof dient zur Positionierung und Beckenretraktion für Personen mit eingeschränkter Mobilität auf einer Sitzfläche z.B. Duschrollstuhl, Badeliege, Rollstuhl, Sitzschale, Therapiestuhl, Reha Buggy, Sportgerät

Vorgesehene Patientengruppe:

- Kinder, Jugendliche und Erwachsene
- Geschlecht: weiblich und männlich

Empfangskontrolle

Packen Sie das Produkt komplett aus und prüfen Sie die Sendung auf Vollständigkeit und Transportschäden. Sollten Sie feststellen, dass die Sendung wider Erwarten einen Fehler aufweist, so:

1. Reklamieren Sie unverzüglich beim Frachtführer
2. Lassen Sie den Schaden / Fehler protokollieren
3. Informieren Sie uns oder Ihren Fachhändler unverzüglich

Lieferumfang

- 1) 1 x **PELVI.LOC®** PL-3DWP XXS,-XS, -S, -M, -L vormontiert
- 2) 1 x Informationen zum online Download der Montage- und Gebrauchsanweisung

Kombination von Medizinprodukten

Geeignet für Hilfsmittel die für den Einsatz eines Beckenretraktionsgurt vorgesehen sind

Montage



Die Montage sollte durch eine Person mit fachlichen Kenntnissen erfolgen

1. Die Polster (a) jeweils im Beckenbereich / Hüftbeugefalte anlegen. – Das Zahnband (b) liegt dabei oben.
 - Das Logo auf dem Polster ist danach auf der linken Seite lesbar
2. Den Abstand der Polster über das Zahnband (b) durch Betätigen der Ratschenschnallen (e) einstellen.
 - Das Gelenk des Zahnbandes sollte sich dann mittig zwischen den Polstern befinden.
 - Das Zahnband max. so weit herausziehen, dass noch zwei Zähne hinter jedem Schnapper (c) frei sind.
3. Anschließend die Lochriemen (f) am Rahmenrohr des Rollstuhls befestigen
4. Das Zahnband (b) auf beiden Seiten gleich und so weit spannen, dass noch Platz für eine flache Hand zwischen Oberschenkel und Polster ist.
5. Bei Bedarf können die Enden des Zahnbandes halbrund abgelängt werden. Die Enden des abgelängten Zahnbands ggf. entgraten. –Verletzungsgefahr!
6. Den festen Sitz sowie die Arretierung auf beiden Seiten des Zahnbandes prüfen!



Gebrauchsanweisung



Sicherheitshinweise

Trotz der stabilen Bauweisen unterliegen Bauteile wie Lochgurte, Zahnbänder und Polster einem gewissen Verschleiß. Daher wird empfohlen, den **PELVI.LOC**[®] PL-3DWP alle 3 Monate gründlich zu kontrollieren. Hierbei ist auch auf den festen Sitz von Nieten- und Schraubverbindungen zu achten!

- Überzeugen Sie sich vor der Benutzung von dem gebrauchstauglichen Zustand sowie dem korrekten Sitz des Produktes – Unfallgefahr!
- Beschädigte Bauteile wie Lochriemen (f), Zahnband (b) oder Polster (a) nicht flicken bzw. kleben und wieder einsetzen – Unfallgefahr!
- Setzen Sie sich nicht auf die Polster – Gefahr von Druckstellen speziell durch die Ratschen (c)!
- Heben Sie den Rollstuhl nicht über den **PELVI.LOC**[®] PL-3DWP an - Unfallgefahr!
- Achten Sie darauf, dass die Hände nicht zwischen Lochriemen und Rahmen- oder Sitz Rohr geraten - Quetschgefahr!

Anwendungsbeschränkungen / unerwünschte Nebenwirkungen

- Verwenden Sie den **PELVI.LOC**[®] PL-3DWP nicht, wenn sich in dem Bereich der Polster Druckstellen, Wunden oder andere nicht verheilte Verletzungen befinden – Verletzungsgefahr!
- Verwenden Sie den **PELVI.LOC**[®] PL-3DWP nicht bei Knochenschwund, Glasknochen oder starken Durchblutungsstörungen – Verletzungsgefahr!
- Nach dem Reinigen die korrekte Funktion des **PELVI.LOC**[®] PL-3DWP überprüfen!
- Ein beschädigter **PELVI.LOC**[®] PL-3DWP sollte unverzüglich erneuert werden – Unfallgefahr!



Achtung:

- Der **PELVI.LOC**[®] PL-3DWP ist nicht Teil des Rückhaltesystems für den Rollstuhl und/oder Insassen beim Transport in einem Behindertentransportfahrzeug.
- Weder Produzent noch Vertrieb können im Sinne der Produkthaftung für Schäden oder Risiken haftbar gemacht werden, die durch unbeaufsichtigte Kinder im Zusammenhang mit dem Produkt verursacht werden!

Anwendung

1. Zur Anwendung des **PELVI.LOC**[®] PL-3DWP werden die Polster (a) auf die Oberschenkel gelegt.



Achtung: Achten Sie darauf, dass sich keine Gegenstände unter dem Polster befinden! So vermeiden Sie schmerzhafte Druckstellen.

2. Dann das Zahnband (b) durch die jeweilige Ratsche führen. Dazu die entsprechende Ratschenschnalle (e) betätigen.
3. Anschließend das Zahnband (b) so weit spannen, dass noch Platz für eine flache Hand zwischen Oberschenkel und Polster ist.
4. Stellen Sie sicher, dass die Schnapper (c) in die Zähne des Zahnbands greifen!
 - Zugprobe durchführen!

Kommt es während der Anwendung des **PELVI.LOC**[®] PL-3DWP zu einer ungewollten Lockerung des Positionierungssystems, so kann diese durch ein erneutes Spannen behoben werden.

Zum Öffnen des **PELVI.LOC[®] PL-3DWP** den Schnapper (c) betätigen und das Zahnband herausziehen.

- Darauf achten, dass die Polster nicht zwischen die Speichen des Antriebsrades geraten!

Reinigung und Desinfektion

- Wischdesinfektion mit ISOPROPANOL 70%
- Keine Lösungsmittel wie Aceton oder Waschbenzin verwenden!

Wartung

Der **PELVI.LOC**[®] PL-3DWP ist regelmäßig auf Beschädigung und Funktion zu überprüfen.

Reparaturen

Defekten **PELVI.LOC®** unverzüglich austauschen.

Entsorgung

- Die Geräteverpackung kann der Wertstoffwiederverwertung zugeführt werden.
- Die Metallteile können der Altm Metallverwertung zugeführt werden.
- Kunststoffteile können der Kunststoffverwertung zugeführt werden.
- Die Entsorgung muss gemäß den jeweiligen nationalen gesetzlichen Bestimmungen erfolgen.
- Fragen Sie bitte bei der Stadt-/Gemeindeverwaltung nach örtlichen Entsorgungsunternehmen.

Technische Daten

	XXXS	XXS	XS	S	M	L	XL
Sitzbreite (cm)		12 - 20	16 - 24	20 - 32	30 - 40	36 - 46	
Polstergröße (cm)		15,5 x 9	18 x 11	20 x 12	23 x 13,5	27,0 x 13,5	
Gewicht (g)		220	220	220	280	280	
Sollbruchstelle (bei ca. kg)		40	60	60	80	80	

Zahnband Gr. XXXS - XXS		Produkt ist  latexfrei 
Zahnband Gr. XS - S	1,9 x 0,2 x 17,0 cm	
Zahnband Gr. M - L	2,4 x 0,2 x 17,0 cm	
Ratschenschnalle Gr. XXXS		
Ratschenschnalle Gr. XXS	B-19-ERGO-BL	
Ratschenschnalle Gr. XS - S	B-19-ERGO-BL	
Ratschenschnalle Gr. M - L - XL	B-24-ERGO-BL	

Lagerungs- und Transportbedingungen

	Temperaturbereich bei langfristiger Lagerung von -10°C bis +40°C. Kurzfristige Temperaturspitzen, z.B. im Rahmen des Transports, von -20°C bis +60°C werden vom Material gut toleriert und wirken sich nicht auf die Sicherheit und Leistungsfähigkeit des Produkts aus.
	Bei Lagerung und Transport vor Feuchtigkeit schützen

Gewährleistung

Für dieses Produkt übernehmen wir die Gewährleistung, entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen. Diese erstreckt sich auf Material- und Verarbeitungsfehler. Hiervon ausgeschlossen sind Verschleißteile und Teile/Baugruppen, die einer bestimmungsgemäßen Abnutzung unterliegen sowie Schäden, die sich als Folge übermäßiger Beanspruchung, „nicht-bestimmungsgemäßer Anwendung“, gewaltsamer Beschädigung oder unzulässiger Änderung/Instandsetzung ergeben. Im Gewährleistungsfall wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler, bei dem Sie dieses Produkt gekauft haben. Aus Gründen der Produkthaftung dürfen Reparatur-, Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten nur durch autorisierte Fachhändler, unter Verwendung von Original-Ersatzteilen, durchgeführt werden



Hersteller:

A2J GmbH

Am Fuchsberg 13

D-87452 Altusried

Fon: +49 (08373) 987269

Fax: +49 (08373) 987276

eMail: info@a2j-intl.com

Internet: www.a2j-intl.com



Dieses Produkt ist konform mit den Grundlegenden Anforderungen der EU-Verordnung 2017/745 über Medizinprodukte – Medical Device Regulation (MDR)

Stand 01.01.2025

Technische Änderungen vorbehalten