



PELVI.LOC® PL - OPS - Maß



Für die sichere Anwendung dieses Produktes lesen und beachten Sie bitte vor dem Erstgebrauch diese Montage- und Gebrauchsanweisung



Anwendungsbereich - Zweckbestimmung

Der **PELVI.LOC**® OPS-Maß dient Personen mit eingeschränkter Mobilität, speziell zur Oberkörper und Becken Positionierung im Rollstuhl und oder Auto - Kindersitz , verhindert ein nach vorne rutschen des Beckens .

Vorgesehene Patientengruppe:

- Kinder, Jugendliche und Erwachsene
- Geschlechtsneutral

Empfangskontrolle

Packen Sie das Produkt komplett aus und prüfen Sie die Sendung auf Vollständigkeit und Transportschäden. Sollten Sie feststellen, dass die Sendung wider Erwarten einen Fehler aufweist, so:

1. Reklamieren Sie unverzüglich beim Frachtführer
2. Lassen Sie den Schaden / Fehler protokollieren
3. Informieren Sie uns oder Ihren Fachhändler unverzüglich

Lieferumfang

- 1) 1 x **PELVI.LOC**[®] PL - OPS-Maß vormontiert
- 2) 1 x Informationen zum online Download der Montage- und Gebrauchsanweisung

Kombination von Medizinprodukten

Geeignet für Hilfsmittel die für den Einsatz eines Beckenretraktionsgurtes mit Oberkörper Positionierung vorgesehen sind.

Montage



Die Montage sollte durch eine Person mit fachlichen Kenntnissen erfolgen.

1. Den Rückengurt (Farbe Grau) durch Sitz und Rückenspalte führen und mittels Schnalle hinter der Kopfstütze schließen und Gurtband spannen.



Gebrauchsanweisung



Sicherheitshinweise

Trotz der stabilen Bauweise unterliegen Bauteile wie, Gurtbänder ,Klett, und Schultergurt einem gewissen Verschleiß. Daher wird empfohlen, den **PELVI.LOC**[®] OPS-Maß alle 3 Monate gründlich zu kontrollieren. Hierbei ist auch auf den festen Sitz von Nähten zu achten!

- Überzeugen Sie sich vor der Benutzung von dem gebrauchstauglichen Zustand sowie dem korrekten Sitz des Produktes – Unfallgefahr!
- Beschädigte Bauteile wie Schnallen/Gurtband ,Klett oder Polster nicht flicken bzw. kleben und wieder einsetzen – Unfallgefahr!
- Setzen Sie sich nicht auf die Polster – Gefahr von Druckstellen speziell durch die Schnallen (d)!
- Heben Sie den Rollstuhl nicht über den **PELVI.LOC**[®] OPS-Maß an - Unfallgefahr!

Anwendungsbeschränkungen / unerwünschte Nebenwirkungen

- Verwenden Sie den **PELVI.LOC**[®] OPS-Maß nicht, wenn sich in dem Bereich der Polster Druckstellen, Wunden oder andere nicht verheilte Verletzungen befinden – Verletzungsgefahr!
- Verwenden Sie den **PELVI.LOC**[®] OPS-Maß nicht bei Knochenschwund, Glasknochen oder starken Durchblutungsstörungen – Verletzungsgefahr!
- Nach dem Reinigen die korrekte Funktion des **PELVI.LOC**[®] OPS-Maß sicherstellen!
- Ein beschädigter **PELVI.LOC**[®] OPS-Maß sollte unverzüglich erneuert werden – Unfallgefahr!



Achtung:

- Der **PELVI.LOC**[®] OPS-Maß ist nicht Teil des Rückhaltesystems für den „Rollstuhl“ und/oder Insassen des“ Rollstuhls“ beim Transport in einem Behindertentransportfahrzeug.
- Weder Produzent noch Vertrieb können, im Sinne der Produkthaftung, für Schäden oder Risiken haftbar gemacht werden, die durch unbeaufsichtigte Kinder, im Zusammenhang mit dem Produkt, verursacht werden!

Anwendung

1. Sitzhose (a) im Schritt bis ca. Bauchnabelhöhe anlegen. – Die Schultergurte (b) auf die Sitzhose fest kletten.



Achtung: Achten Sie darauf, dass sich keine Gegenstände unter dem Polster befinden! So vermeiden Sie schmerzhaft Druckstellen.

1. Bauchgurt (c) mit leichtem Zug fest kletten.
 2. Verschluss Schnalle (d) (falls optional vorhanden schließen), bitte darauf achten, dass noch Platz für eine flache Hand zwischen Bauch und Polster ist.
 3. Stellen Sie sicher, dass der Verschluss (d) greift!
- Zugprobe durchführen!

Kommt es während der Anwendung des **PELVI.LOC**[®] OPS-Maß zu einer ungewollten Lockerung des Positionierungssystems, so kann dies durch ein erneutes anlegen behoben werden.

Zum Öffnen des **PELVI.LOC[®] OPS-Maß** die schnalle (d) soweit vorhanden betätigen und den Bauchgurt öffnen.

- Darauf achten, dass die Polster Schultergurte nicht zwischen die Speichen des Antriebsrades geraten!

Reinigung und Desinfektion

- Geeignet für die Waschmaschine bis 40 Grad.
- Chemothermische Desinfektion möglich durch Zugabe von ELTRA 40 zum Waschgang
- Nicht schleudern
- Nicht geeignet für den Trockner

Wartung

Der **PELVI.LOC**[®] OPS-Maß ist regelmäßig auf Beschädigung und Funktion zu überprüfen.

Reparaturen


Defekten **PELVI.LOC**[®] OPS-Maß unverzüglich austauschen.

Entsorgung

- Die Geräteverpackung kann der Wertstoffwiederverwendung zugeführt werden.
- Die Metallteile können der Altmetallverwertung zugeführt werden.
- Kunststoffteile können der Kunststoffverwertung zugeführt werden.
- Die Entsorgung muss gemäß den jeweiligen nationalen gesetzlichen Bestimmungen erfolgen.
- Fragen Sie bitte bei der Stadt-/Gemeindeverwaltung nach örtlichen Entsorgungsunternehmen.



OPS-Maßbogen

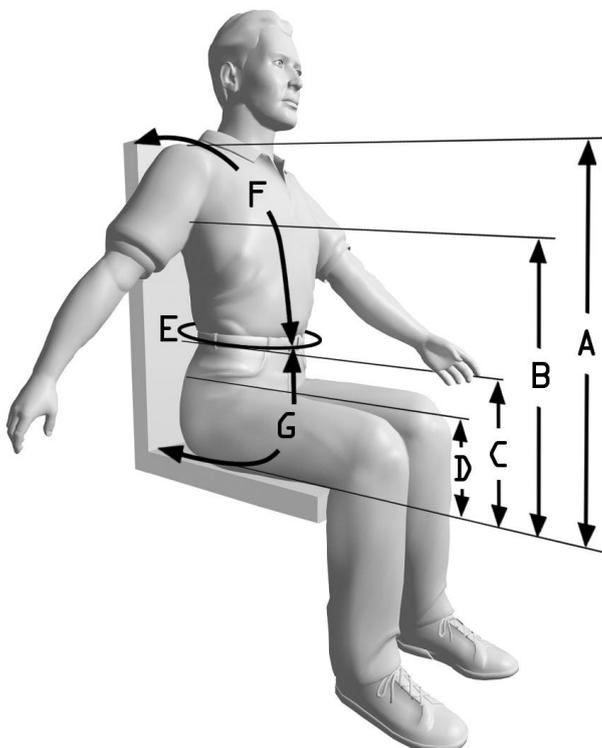

Maße

A	Sitzfläche – Schulter	cm
B	Sitzfläche – Achselhöhe	cm
C	Sitzfläche – Taille	cm
D	Sitzfläche – Oberschenkelhöhe	cm
E	Taille – Umfang	cm
F	Schulter – Taille	cm
G	Sitzmaß (Rückenlehne – Taille)	cm

Maße bitte ohne Zugabe über der Kleidung nehmen

Rückenlehnen Höhe	cm	
Rückenlehnen Breite	cm	
Weite zwischen den Kopfstützrohren	cm	
Durchführungsmöglichkeit	Ja	Nein
Sitz - Rückenlehne		
Rollstuhl Typ		

Gewünschte Verschluss – Arten

Druck Verschluss mit 2 Fingern zu öffnen Art.Nr. .KSS-50	<input type="checkbox"/>
Druck Verschluss mit 3 Fingern zu öffnen Art.Nr. KSS-S-50	<input type="checkbox"/>
Druck Verschluss mit 3 Fingern zu öffnen nach innen gedreht Art.Nr. KSS-S-50 180°	<input type="checkbox"/>
Art.Nr. SKS-30-SF Steckschloß mit Sicherheitsfunktion (Stiftöffnung)	<input type="checkbox"/>



Achtung: Nur ein sorgsam ausgefüllter Maßbogen gewährleistet eine gute Oberkörper Positionierung!



Achtung: Bei Anbringung des *PELVI.LOC*[®] OPS-Maß in einem handelsüblichen PKW, Person immer zusätzlich mit dem PKW 3 Punktgurt sichern!

Lagerungs- und Transportbedingungen

	<p>Temperaturbereich bei langfristiger Lagerung von -10°C bis +40°C. Kurzfristige Temperaturspitzen, z.B. im Rahmen des Transports, von -20°C bis +60°C werden vom Material gut toleriert und wirken sich nicht auf die Sicherheit und Leistungsfähigkeit des Produkts aus.</p>
	<p>Bei Lagerung und Transport vor Feuchtigkeit schützen</p>

Produkt ist latexfrei



Gewährleistung

Für dieses Produkt übernehmen wir die Gewährleistung, entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen. Diese erstreckt sich auf Material- und Verarbeitungsfehler. Hiervon ausgeschlossen sind Verschleißteile und Teile/Baugruppen, die einer bestimmungsgemäßen Abnutzung unterliegen sowie Schäden, die sich als Folge übermäßiger Beanspruchung, „nicht-bestimmungsgemäßer Anwendung“, gewaltsamer Beschädigung oder unzulässiger Änderung/Instandsetzung ergeben. Im Gewährleistungsfall wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler, bei dem Sie dieses Produkt gekauft haben. Aus Gründen der Produkthaftung dürfen Reparatur-, Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten nur durch autorisierte Fachhändler, unter Verwendung von Original-Ersatzteilen, durchgeführt werden



Hersteller:

A2J GmbH
Am Fuchsberg 13
D-87452 Altusried
Fon: +49 (08373) 987269
Fax: +49 (08373) 987276
eMail: info@a2j-intl.com
Internet: www.a2j-intl.com

Dieses Produkt ist konform mit den Grundlegenden Anforderungen der EU-Verordnung 2017/745 über Medizinprodukte – Medical Device Regulation (MDR)

Stand 01.01.2025

Technische Änderungen vorbehalten