




PELVI.LOC®

Genuframe

PL-GF - XXS, - XS, - S, - M, - L, - XL

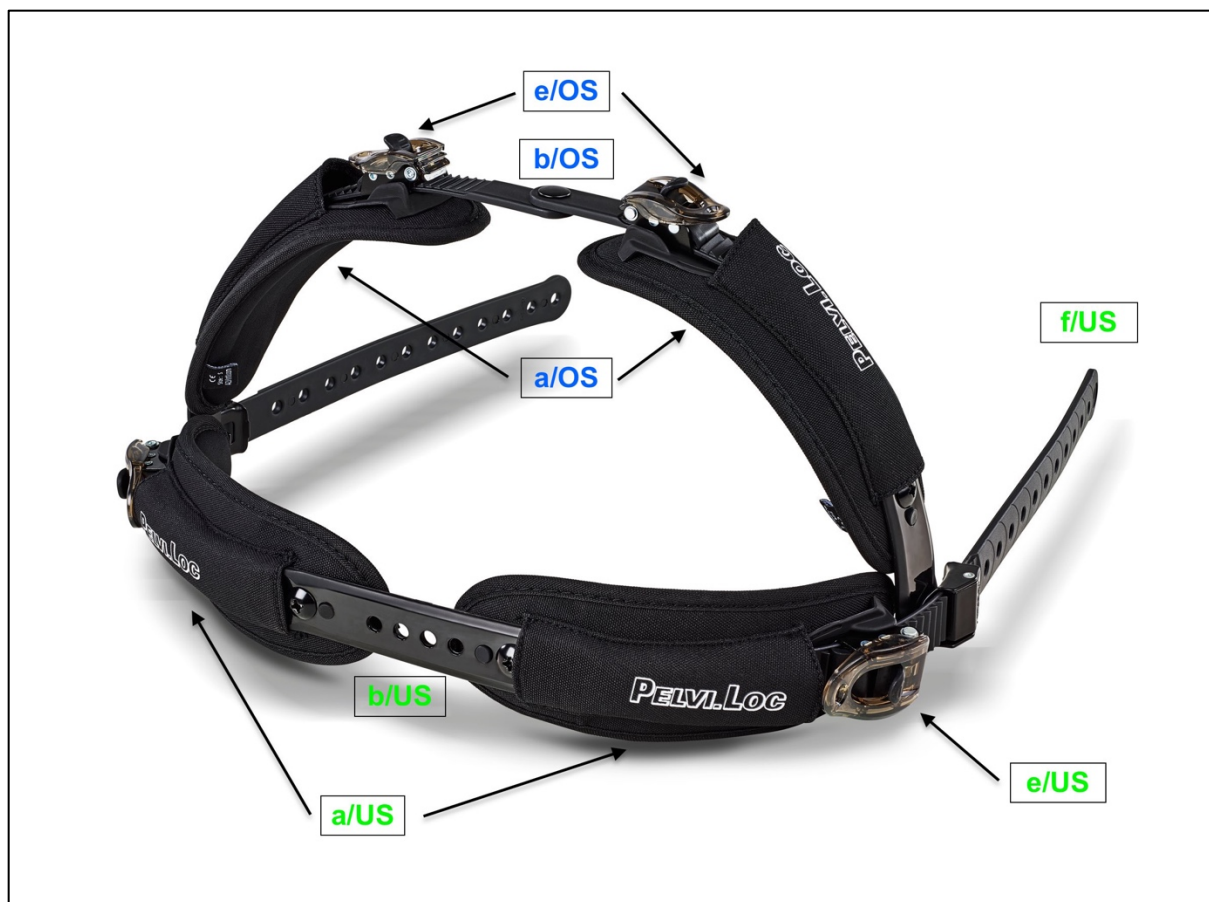

W celu zapewnienia bezpiecznego użytkowania produktu należy przed jego pierwszym użyciem przeczytać niniejszą instrukcję montażu i obsługi i stosować się do niej.



Zakres stosowania

PELVI.LOC® - PL- GF jest przeznaczony dla osób z ograniczoną możliwością poruszania się, zwłaszcza do stabilizacji miednicy i uda na wózkach inwalidzkich i aktywnych wózkach inwalidzkich oraz zapobiega ześlizgiwaniu się do przodu.

Przewidziana grupa pacjentów:

- dzieci, młodzież i dorośli
- płeć: kobiety i mężczyźni

Kontrola podczas odbioru

Całkowicie rozpakuj produkt i sprawdź przesyłkę pod kątem kompletności i uszkodzeń transportowych. Jeśli okaże się, że przesyłka ma wadę, wówczas:

1. Należy niezwłocznie złożyć reklamację firmie przewozowej.
2. Należy odnotować uszkodzenia/braki.
3. Należy o tym fakcie niezwłocznie poinformować nas lub specjalistycznego sprzedawcę.

Zakres dostawy

- 1) 1 x **PELVI.LOC**[®] Genuframe pas udowy -XXS, -XS, -S, -M, -L, -XL wstępnie zmontowany
- 2) 1 x **PELVI.LOC**[®] Genuframe pas od podudzia -XXS, -XS, -S, -M, -L, -XL wstępnie zmontowany
- 3) 1 x informacje na temat pobierania instrukcji montażu i obsługi online

Łączenie wyrobów medycznych

Można używać z urządzeniami wspomagającymi stosowanymi z pasem do stabilizacji miednicy.

Montaż pasa do podudzia



Montaż powinna przeprowadzić osoba posiadająca specjalistyczną wiedzę:

Montaż pasa do podudzia **PELVI.LOC**[®] Genuframe należy wykonać podobnie jak w przypadku PL-UG.

1. Podkładki (**a/US**) należy umieścić w obrębie podudzia (poniżej główki kości piszczelowej i strzałkowej). Pasek perforowany/opaska zębata (**f/US**) powinny znajdować się na zewnątrz.
 - Z przodu powinno się dać przeczytać logo **PELVI.LOC**[®] umieszczone na podkładce na podudziu!
2. Ustawić odstęp między podkładkami na podudziach nad pasami perforowanymi (**b/US**).
3. Następnie przymocować taśmę perforowaną/opaskę zębatą (**f/US**) do rury ramy wózka inwalidzkiego.
4. Naciągać taśmę perforowaną/opaskę zębatą (**f/US**) równo po obu stronach do momentu, aż pomiędzy podudziem a podkładką będzie jeszcze miejsce na włożenie dłoni na płasko.
5. W razie potrzeby można przyciąć końce opaski zębatej do kształtu półkolistego. W razie potrzeby należy usunąć zadziory z końcówek przyciętych opasek zębatych. – Niebezpieczeństwo zranienia!
6. Sprawdzić ściśle dopasowanie i mechanizm blokujący po obu stronach taśmy perforowanej opaski zębatej (**f/US**)!

Montaż pasa do uda

Montaż pasa do uda **PELVI.LOC**[®] Genuframe należy wykonać podobnie jak w przypadku PL-2DB.

7. Umieścić podkładki (**a/OS**) pod każdym udem. - Opaska zębata (**b/OS**) powinna być na górze.
 - Z przodu powinno się dać przeczytać logo umieszczone na podkładce na udzie!
8. Wyregulować odległość pomiędzy podkładkami za pomocą opaski zębatej (**b/OS**), uruchamiając klamry zapadkowe (**e/OS**) pasa udowego.
 - Złącze opaski zębatej (**b/OS**) należy następnie umieścić centralnie pomiędzy podkładkami.
 - Wyciągnąć maksymalnie opaskę zębatą tak, aby za każdą klamrą zapadkową (**e/OS**) pozostały jeszcze dwa wolne zęby.



Instrukcja obsługi



Instrukcje bezpieczeństwa

Pomimo stabilnej konstrukcji elementy takie jak pasy perforowane, taśmy paska, opaski zębate i podkładki są narażone na zużycie. Dlatego zaleca się dokładne sprawdzanie **PELVI.LOC®** co 3 miesiące. Upewnić się, czy nity i połączenia śrubowe są mocno osadzone!

- Przed użyciem należy upewnić się, czy produkt jest w stanie zdatnym do użytku i czy jest prawidłowo osadzony - ryzyko wypadku!
- Nie naprawiać ani nie kleić uszkodzonych elementów, takich jak pas perforowany/taśma paska (f), opaska zębata (b) lub podkładka (a) i nie używać ich ponownie - ryzyko wypadku!
- Nie siadać na podkładkach - niebezpieczeństwo powstania odcisków spowodowanych naciskiem zwłaszcza klamer zapadkowych (e)!
- Nie należy podnosić wózka powyżej **PELVI.LOC®** - ryzyko wypadku!
- Upewnić się, czy ręce nie znajdują się między perforowanym pasem a rurą ramy lub rurą pod siedziskiem - niebezpieczeństwo zgniecenia!

Ograniczenia w stosowaniu / działania niepożądane

- Nie należy używać **PELVI.LOC®** jeśli w obszarze podkładek znajdują się odciski, rany lub inne niezabliźnione urazy - niebezpieczeństwo obrażeń!
- Nie należy używać **PELVI.LOC®** w przypadku osteoporozy, łamliwości kości lub poważnych zaburzeń krążenia - niebezpieczeństwo obrażeń!
- Po oczyszczeniu należy zapewnić prawidłowe działanie **PELVI.LOC®**!
- Uszkodzony **PELVI.LOC®** należy natychmiast wymienić - ryzyko wypadku!



Uwaga:

- **PELVI.LOC®** nie jest częścią systemu przytrzymującego wózek inwalidzki i/lub pasażera podczas transportu w pojeździe transportowym dla osób niepełnosprawnych.
 - W zakresie odpowiedzialności za produkt ani producent ani dystrybutor nie odpowiadają za ryzyko lub szkody spowodowane przez dzieci pozostające bez nadzoru!
1. Aby użyć **PELVI.LOC®**, podkładki (a) należy umieścić na podudziach.

Zastosowanie

1. Aby użyć **PELVI.LOC®**, podkładki (a) należy umieścić na udach i podudziach.



Uwaga: Należy sprawdzić czy pod podkładką nie ma przedmiotów! W ten sposób unika się bolesnych odcisków!

2. Następnie przepuścić opaskę zębatą (**f/US**) przez odpowiednią zapadkę. W tym celu należy uruchomić odpowiednią klamrę zapadkową (**e/US**).
 3. Następnie naciągać opaskę zębatą (**f/US**) do momentu, aż pomiędzy udem a podkładką będzie jeszcze miejsce na włożenie dłoni na płasko.
 4. Upewnić się, czy zapadki (**e/US**) współpracują z zębami opaski zębatej!
- Przeprowadzić próbę rozciągania!

Aby otworzyć PELVI.LOC® należy uruchomić zapadkę (e/US) i wyciągnąć opaskę zębatą.

- Upewnić się, czy podkładki nie znajdują się pomiędzy szprychami koła napędowego!

Czyszczenie i dezynfekcja

- Nadaje się do prania w pralce do 40 stopni.
- Możliwa dezynfekcja chemotermiczna poprzez dodanie ELTRA 40 do cyklu prania.
- Nie wirować.
- Nie nadaje się do suszarek.

Konserwacja

PELVI.LOC® należy regularnie sprawdzać pod kątem uszkodzeń i działania.

Naprawy

Uszkodzony **PELVI.LOC®** należy natychmiast wymienić.

Utylizacja

- Opakowanie sprzętu nadaje się do ponownego użytku.
- Części metalowe nadają się do recyklingu złomu.
- Części plastikowe nadają się do recyklingu tworzyw sztucznych.
- Utylizację należy przeprowadzić zgodnie z odpowiednimi krajowymi przepisami.
- Zwrócić się do władz miasta/gminy z zapytaniem o lokalne firmy zajmujące się utylizacją odpadów.



Dane techniczne

| | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---------------------------------|------------|-----------|----------|----------|------------|-----------|
| Szerokość kolana (cm) | 12– 20 | 16 - 24 | 20 - 32 | 30 - 40 | 36 - 46 | 44 - 52 |
| Wielkość podkładki (cm) | 12 x 7 | 18 x 7 | 21 x 8 | 25,5 x 8 | 26,5 x 8,5 | 28,5 x 9 |
| Waga (g) | 200 | 220 | 220 | 280 | 280 | 300 |
| Rozerwanie (przy ok. kg) | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 |

| | |
|---|---------------------|
| Rozmiar opaski zębatej XXS- XS - S | 1,9 x 0,2 x 17,0 cm |
| Rozmiar opaski zębatej M - L - XL | 2,4 x 0,2 x 17,0 cm |

Produkt

nie

zawiera lateksu



Ważna wskazówka: szerokość kolana, nie szerokość siedziska!

Gwarancja

Na produkt udzielamy gwarancji zgodnie z przepisami prawa. Dotyczy to również wad materiałowych i produkcyjnych. Gwarancji nie podlegają części i podzespoły zużywające się, które podlegają normalnemu zużyciu, jak również uszkodzenia wynikające z nadmiernej eksploatacji, "użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem", uszkodzeń mechanicznych lub niedozwolonych modyfikacji/napraw. W przypadku reklamacji gwarancyjnej należy skontaktować się ze sprzedawcą, u którego zakupiono produkt. Ze względu na odpowiedzialność za produkt, prace naprawcze, konserwacyjne i nadzór mogą wykonywać wyłącznie autoryzowani sprzedawcy przy użyciu oryginalnych części zamiennych.



Producent:

A2J Ltd

Am Fuchsberg 13

D-87452 Altusried

Tel: +49 (08373) 987269

Faks: +49 (08373) 987276

e-mail: info@a2j-intl.com

Internet www.a2j-intl.com



Produkt jest zgodny z zasadniczymi wymogami dyrektywy WE 93/42/EWG dotyczącymi wyrobów medycznych.

Stan na dzień 2019-05-01

Zastrzega się możliwość zmian technicznych