



## **PELVI.LOC® PL-2DB - XXS - XS - S - M - L - XL**



Per usare questo prodotto in sicurezza, prima del primo utilizzo leggere e osservare le presenti istruzioni per il montaggio e l'uso



### **Ambito d'uso**

Il **PELVI.LOC®** PL-2DB serve alle persone con mobilità ridotta, specificatamente per il posizionamento della coscia nella sedia a rotelle e nella sedia a rotelle attiva, e impedisce di scivolare in avanti.

### **Gruppi di pazienti target:**

- Bambini, giovani e adulti
- Sesso: femminile e maschile

### **Controllo fornitura**

Disimballare completamente il prodotto e verificare l'integrità dell'oggetto di fornitura e la presenza di danni di trasporto. Qualora si dovesse riscontrare inaspettatamente un difetto, procedere come segue:

1. presentare tempestivamente un reclamo allo spedizioniere
2. far protocollare il danno / difetto
3. informare tempestivamente noi o il proprio rivenditore specializzato

### **Oggetto di fornitura**

- 1) 1 x **PELVI.LOC®** PL-2DB – XXS, -XS, -S, -M, -L, -XL premontato
- 2) 2 x fascette per cavi 7,8 mm
- 3) 1 x informazioni per il download elettronico delle istruzioni per il montaggio e l'uso

### **Combinazione di dispositivi medici**

Adatto per ausili predisposti per l'uso di una cintura di ritenuta del bacino

## Montaggio



Il montaggio deve essere eseguito da una persona dotata delle necessarie competenze tecniche

1. Disporre ciascun cuscinetto (a) nella rispettiva area della coscia. – La cinghia dentata (b) deve essere disposta in alto.
  - Il logo sul cuscinetto sarà dunque visibile da davanti!
2. Impostare la distanza dei cuscinetti con la cinghia dentata (b), azionando la fibbia a cricchetto (e).
  - La giuntura della cinghia dentata deve trovarsi al centro tra i due cuscinetti.
  - Estrarre la cinghia dentata massimo fino ad avere due denti liberi dietro al giunto a scatto (c).
  - Per la regolazione è possibile togliere la chiusura a strappo e aprire il cuscinetto (pertinente solo per le cinture con le fibbie a cricchetto coperte)
3. Fissare successivamente le cinghie forate (f) al tubo del telaio della sedia a rotelle
4. Tendere la cinghia dentata (b) su entrambi i lati in modo uguale e in modo che resti lo spazio sufficiente per una mano aperta tra la coscia e il cuscinetto.
5. Se necessario, è possibile tagliare a emiciclo le estremità della cinghia dentata. Eventualmente sbavare le estremità della cinghia dentata tagliata. –Pericolo di lesioni!
6. Verificare che la cinghia dentata sia ben salda e bloccata su entrambi i lati!



## Istruzioni per l'uso



### Indicazioni di sicurezza

Nonostante le strutture siano solide, componenti come cinture forate, cinghie dentate e cuscinetti sono soggetti ad usura. Si consiglia pertanto di controllare accuratamente **PELVI.LOC®** ogni 3 mesi. Verificare in tale occasione anche che le cuciture e i collegamenti a vite siano ben saldi!

- Assicurarsi prima dell'utilizzo che il prodotto sia in condizioni idonee all'utilizzo e che sia posizionato correttamente – pericolo di incidente!
- I componenti danneggiati come cinghie forate (f), cinghie dentate (b) o cuscinetti (a) non devono essere riparati o incollati e poi riutilizzati –pericolo di incidente!
- Non sedersi sui cuscinetti – pericolo per i punti di pressione, in particolare quelli dovuti ai cricchetti (c)!
- Non sollevare la sedia a rotelle dal **PELVI.LOC®** - pericolo di incidente!
- Fare attenzione a non mettere le mani tra la cintura forata e il tubo del telaio - o della seduta - pericolo di schiacciamento!

### Restrizioni sull'uso / effetti collaterali indesiderati

- Non utilizzare il **PELVI.LOC®** se nell'area dei punti di contatto dei cuscinetti sono presenti ferite o altre lesioni non guarite – pericolo di lesioni!
- Non utilizzare il **PELVI.LOC®** in presenza di osteoporosi, osteogenesi imperfetta o forti disturbi alla circolazione sanguigna – pericolo di lesioni!

- Dopo la pulizia, verificare che il **PELVI.LOC®** funzioni correttamente!
- Riparare tempestivamente il **PELVI.LOC®** qualora fosse danneggiato –pericolo di incidente!



#### **Attenzione:**

- il **PELVI.LOC®** non è parte del sistema di supporto dello schienale della sedia a rotella e/o della persona durante il trasporto in un veicolo di trasporto per disabili.
- Nell'ambito della garanzia del prodotto, il produttore e il distributore respingono ogni responsabilità per danni o rischi relativi al prodotto, causati da bambini non supervisionati!

### **Utilizzo**

1. Per utilizzare il **PELVI.LOC®** posizionare i cuscinetti (a) sopra le cosce



**Attenzione:** verificare che sotto i cuscinetti non si trovi alcun oggetto! In questo modo si evitano punti di pressione dolorosi.

2. **Importante:** non appoggiare sul bacino o sulla spina!
  3. Dopodiché, condurre la cinghia dentata (b) attraverso il rispettivo cricchetto. Azionare contemporaneamente la fibbia a cricchetto (e) corrispondente.
  4. Successivamente, tendere la cinghia dentata (b) in modo che resti lo spazio per una mano aperta tra la coscia e il cuscinetto.
  5. Verificare che i giunti a scatto (c) si aggancino ai denti della cinghia dentata!
- Eseguire una prova di tensione!

Se durante l'uso del **PELVI.LOC®** si verifica un allentamento involontario del sistema di posizionamento, è possibile rimediare a ciò tendendo nuovamente le cinghie.

**Per aprire il **PELVI.LOC®**** azionare il giunto a scatto (c) ed estrarre la cinghia dentata.

- Fare attenzione a non far finire i cuscinetti negli interstizi della ruota motrice!

### **Pulizia e disinfezione**

- Lavabile in lavatrice fino a 40 gradi.
- Disinfezione chemiotermica possibile mediante l'aggiunta di ELTRA 40 al ciclo di lavaggio
- Non centrifugare
- Non idoneo per l'asciugatrice

### **Manutenzione**

Controllare periodicamente la presenza di danni sul **PELVI.LOC®** e il suo corretto funzionamento.

### **Riparazioni**

Sostituire tempestivamente il **PELVI.LOC®** se è difettoso.

## Smaltimento

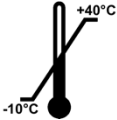
- Smaltire l'imballaggio del dispositivo nella raccolta differenziata.
- Smaltire le parti metalliche nei rifiuti metallici.
- Smaltire le parti in plastica nella raccolta della plastica.
- Smaltire i rifiuti ai sensi della normativa nazionale vigente.
- Chiedere alle amministrazioni cittadine e comunali informazioni in merito ai servizi di smaltimento locali.

## Dati tecnici

|                                               | XXXS | XXS | XS      | S       | M        | L          | XL       |
|-----------------------------------------------|------|-----|---------|---------|----------|------------|----------|
| <b>Larghezza seduta (cm)</b>                  |      |     | 16 - 24 | 20 - 32 | 30 - 40  | 36 - 46    | 44 - 52  |
| <b>Dimensione cuscinetti (cm)</b>             |      |     | 18 x 7  | 21 x 8  | 25,5 x 8 | 26,5 x 8,5 | 28,5 x 9 |
| <b>Peso (g)</b>                               |      |     | 220     | 220     | 280      | 280        | 280      |
| <b>Punto di rottura target (per circa kg)</b> |      |     | 60      | 60      | 80       | 80         | 80       |

|                                         |                     |                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cinghia dentata gr. XXXS- XXS</b>    |                     | <b>Prodotto privo di latex</b><br><br><br><br> |
| <b>Cinghia dentata gr. XS - S</b>       | 1,9 x 0,2 x 17,0 cm |                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Cinghia dentata gr. M- L- XL</b>     | 2,4 x 0,2 x 17,0 cm |                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Fibbia a cricchetto gr. XXXS</b>     |                     |                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Fibbia a cricchetto gr. XXS</b>      |                     |                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Fibbia a cricchetto gr. XS - S</b>   | B-19-ERGO-BL        |                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Fibbia a cricchetto gr. M- L- XL</b> | B-24-ERGO-BL        |                                                                                                                                                                                                                          |

## Condizioni di stoccaggio e trasporto

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>L'intervallo di temperatura per lo stoccaggio a lungo termine è compreso tra -10°C e +40°C.</p> <p>I picchi di temperatura a breve termine, ad esempio durante il trasporto, da -20°C a +60°C, sono ben tollerati dal materiale e non hanno alcun effetto sulla sicurezza e sulle prestazioni del prodotto.</p> |
|  | <p>Proteggere dall'umidità durante lo stoccaggio e il trasporto</p>                                                                                                                                                                                                                                                |

## Garanzia

Per il presente prodotto forniamo una garanzia in conformità alle disposizioni giuridiche. Questa copre difetti del materiale e della lavorazione. Sono escluse dalla garanzia le parti soggette ad usura e le parti/i gruppi soggette/i a normale consumo, così come i danni causati da una sovrasollecitazione, da “uso non conforme”, danneggiamento volontario o modifiche/riparazioni non conformi. In caso di richieste di risarcimento rivolgersi al proprio rivenditore specializzato da cui è stato acquistato il prodotto. Ai fini della garanzia, i lavori di riparazione, manutenzione ordinaria e straordinaria devono essere svolta dai rivenditori specializzati autorizzati, mediante l'uso di pezzi di ricambio originali



### Produttore:

A2J GmbH

Am Fuchsberg 13

D-87452 Altusried

Fon: +49 (08373) 987269

Fax: +49 (08373) 987276

eMail: [info@a2j-intl.com](mailto:info@a2j-intl.com)

Internet: [www.a2j-intl.com](http://www.a2j-intl.com)



Questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali del Regolamento UE 2017/745 sui dispositivi medici - Regolamento sui dispositivi medici (MDR).

Versione 01.01.2025

Il produttore si riserva il diritto di apporre modifiche tecniche