



PELVI.LOC®

PL-3DS - XXXS - XXS - XS - S - M - L - XL



Per usare questo prodotto in sicurezza, prima del primo utilizzo leggere e osservare le presenti istruzioni per il montaggio e l'uso



Ambito d'uso

Il **PELVI.LOC®** PL-3DS serve alle persone con mobilità ridotta, specificatamente per il posizionamento del bacino nella sedia a rotelle e nella sedia a rotelle attiva, e impedisce di scivolare in avanti.

Gruppi di pazienti target:

- Bambini, giovani e adulti
- Sesso: femminile e maschile

Controllo fornitura

Disimballare completamente il prodotto e verificare l'integrità dell'oggetto di fornitura e la presenza di danni di trasporto. Qualora si dovesse riscontrare inaspettatamente un difetto, procedere come segue:

1. presentare tempestivamente un reclamo allo spedizioniere
2. far protocollare il danno / difetto
3. informare tempestivamente noi o il proprio rivenditore specializzato

Oggetto di fornitura

- 1) 1 x **PELVI.LOC®** PL-3DS- XXXS,- XXS, -XS, -S, -M, -L, -XL premontato
- 2) 1 x informazioni per il download elettronico delle istruzioni per il montaggio e l'uso

Montaggio



Il montaggio deve essere eseguito da una persona dotata delle necessarie competenze tecniche

1. Disporre ciascun cuscinetto (a) rispettivamente nell'area del bacino e dell'articolazione dell'anca. – La cinghia dentata (b) deve essere disposta in alto.
 - Il logo sul cuscinetto sarà dunque visibile da davanti!
2. Impostare la distanza dei cuscinetti con la cinghia dentata (b), azionando la fibbia a cricchetto (e).
 - La giuntura della cinghia dentata deve trovarsi al centro tra i due cuscinetti.
 - Estrarre la cinghia dentata massimo fino ad avere due denti liberi dietro al giunto a scatto (c).
 - Per la regolazione è possibile togliere la chiusura a strappo (g) e aprire il cuscinetto (pertinente solo per le cinture con le fibbie a cricchetto coperte)
3. Fissare successivamente le cinghie forate/cinghie (f) al tubo del telaio della sedia a rotelle
4. Tendere la cinghia dentata (b) su entrambi i lati in modo uguale e in modo che resti lo spazio sufficiente per una mano aperta tra la coscia e il cuscinetto.
5. Se necessario, è possibile tagliare a emiciclo le estremità della cinghia dentata. Eventualmente sbavare le estremità della cinghia dentata tagliata. –Pericolo di lesioni!
6. Verificare che la cinghia dentata sia ben salda e bloccata su entrambi i lati!



Istruzioni per l'uso



Indicazioni di sicurezza

Nonostante le strutture siano solide, componenti come cinture forate, bretelle, cinghie dentate e cuscinetti sono soggetti ad usura. Si consiglia pertanto di controllare accuratamente **PELVI.LOC®** ogni 3 mesi. Verificare in tale occasione anche che le cuciture e i collegamenti a vite siano ben saldi!

- Assicurarsi prima dell'utilizzo che il prodotto sia in condizioni idonee all'utilizzo e che sia posizionato correttamente – pericolo di incidente!
- I componenti danneggiati come cinghie forate/bretelle (f), cinghie dentate (b) o cuscinetti (a) non devono essere riparati o incollati e poi riutilizzati –pericolo di incidente!
- Non sedersi sui cuscinetti – pericolo per i punti di pressione, in particolare quelli dovuti ai cricchetti (c)!
- Non sollevare la sedia a rotelle dal **PELVI.LOC®** - pericolo di incidente!
- Fare attenzione a non mettere le mani tra la cintura forata e il tubo del telaio - o della seduta - pericolo di schiacciamento!

Restrizioni sull'uso / effetti collaterali indesiderati

- Non utilizzare il **PELVI.LOC®** se nell'area dei punti di contatto dei cuscinetti sono presenti ferite o altre lesioni non guarite – pericolo di lesioni!

- Non utilizzare il **PELVI.LOC®** in presenza di osteoporosi, osteogenesi imperfetta o forti disturbi alla circolazione sanguigna – pericolo di lesioni!
- Dopo la pulizia, verificare che il **PELVI.LOC®** funzioni correttamente!
- Riparare tempestivamente il **PELVI.LOC®** qualora fosse danneggiato –pericolo di incidente!
-



Attenzione:

- il **PELVI.LOC®** non è parte del sistema di supporto dello schienale della sedia a rotella e/o della persona durante il trasporto in un veicolo di trasporto per disabili.
- Nell'ambito della garanzia del prodotto, il produttore e il distributore respingono ogni responsabilità per danni o rischi relativi al prodotto, causati da bambini non supervisionati!

Utilizzo

1. Per utilizzare il **PELVI.LOC®** posizionare i cuscinetti (a) sopra le cosce



Attenzione: verificare che sotto i cuscinetti non si trovi alcun oggetto! In questo modo si evitano punti di pressione dolorosi.

2. **Importante:** non appoggiare sul bacino o sulla spina!
3. Dopodiché, condurre la cinghia dentata (b) attraverso il rispettivo cricchetto. Azionare contemporaneamente la fibbia a cricchetto (e) corrispondente.
4. Successivamente, tendere la cinghia dentata (b) in modo che resti lo spazio per una mano aperta tra la coscia e il cuscinetto.
5. Verificare che i giunti a scatto (c) si aggancino ai denti della cinghia dentata!
- Eseguire una prova di tensione!

Se durante l'uso del **PELVI.LOC®** si verifica un allentamento involontario del sistema di posizionamento, è possibile rimediare a ciò tendendo nuovamente le cinghie.

Per aprire il **PELVI.LOC®** azionare il giunto a scatto (c) ed estrarre la cinghia dentata.

- Fare attenzione a non far finire i cuscinetti negli interstizi della ruota motrice!

Pulizia e disinfezione

- Lavabile in lavatrice fino a 40 gradi.
- Disinfezione chemioterica possibile mediante l'aggiunta di ELTRA 40 al ciclo di lavaggio
- Non centrifugare
- Non idoneo per l'asciugatrice

Manutenzione

Controllare periodicamente la presenza di danni sul **PELVI.LOC®** e il suo corretto funzionamento.

Riparazioni

Sostituire tempestivamente il **PELVI.LOC®** se è difettoso.

Smaltimento

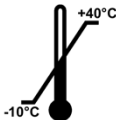
- Smaltire l'imballaggio del dispositivo nella raccolta differenziata.
- Smaltire le parti metalliche nei rifiuti metallici.
- Smaltire le parti in plastica nella raccolta della plastica.
- Smaltire i rifiuti ai sensi della normativa nazionale vigente.
- Chiedere alle amministrazioni cittadine e comunali informazioni in merito ai servizi di smaltimento locali.

Dati tecnici

	XXXS Bambino	XXS	XS	S	M	L	XL
Larghezza seduta (cm)	8 - 16	12 - 20	16 - 24	20 - 32	30 - 40	36 - 46	44 - 52
Dimensione cuscinetti (cm)	11 x 6	14 x 6	18 x 7	21 x 8	25,5 x 8	26,5 x 8,5	28,5 x 9
Peso (g)	220	220	220	220	280	280	280
Punto di rottura target (per circa kg)	40	40	60	60	80	80	80

Cinghia dentata gr. XXXS- XXS	1,4 x 0,2 x 14,0 cm	Prodotto privo di latex   LICENSING PARTNER REG. N° 02/001627/0002739-0
Cinghia dentata gr. XS - S	1,9 x 0,2 x 17,0 cm	
Cinghia dentata gr. M- L- XL	2,4 x 0,2 x 17,0 cm	
Fibbia a cricchetto gr. XXXS	B-14-STAR-BL	
Fibbia a cricchetto gr. XXS	B-14-GO-BL	
Fibbia a cricchetto gr. XS - S	B-19-ERGO-BL	
Fibbia a cricchetto gr. M- L- XL	B-24-ERGO-BL	

Condizioni di stoccaggio e trasporto

	L'intervallo di temperatura per lo stoccaggio a lungo termine è compreso tra -10°C e +40°C. I picchi di temperatura a breve termine, ad esempio durante il trasporto, da -20°C a +60°C, sono ben tollerati dal materiale e non hanno alcun effetto sulla sicurezza e sulle prestazioni del prodotto.
	 Proteggere dall'umidità durante lo stoccaggio e il trasporto

Garanzia

Per il presente prodotto forniamo una garanzia in conformità alle disposizioni giuridiche. Questa copre difetti del materiale e della lavorazione. Sono escluse dalla garanzia le parti soggette ad usura e le parti/i gruppi soggette/i a normale consumo, così come i danni causati da una sovrasollecitazione, da “uso non conforme”, danneggiamento volontario o modifiche/riparazioni non conformi. In caso di richieste di risarcimento rivolgersi al proprio rivenditore specializzato da cui è stato acquistato il prodotto. Ai fini della garanzia, i lavori di riparazione, manutenzione ordinaria e straordinaria devono essere svolta dai rivenditori specializzati autorizzati, mediante l'uso di pezzi di ricambio originali



Produttore:

A2J GmbH

Am Fuchsberg 13

D-87452 Altusried

Fon: +49 (08373) 987269

Fax: +49 (08373) 987276

eMail: info@a2j-intl.com

Internet: www.a2j-intl.com



Questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali del Regolamento UE 2017/745 sui dispositivi medici - Regolamento sui dispositivi medici (MDR).

Versione 01.01.2025

Il produttore si riserva il diritto di apporre modifiche tecniche