




## **PELVI.LOC® PL-3DWP – XXS - XS - S - M -L**



Per usare questo prodotto in sicurezza, prima del primo utilizzo leggere e osservare le presenti istruzioni per il montaggio e l'uso

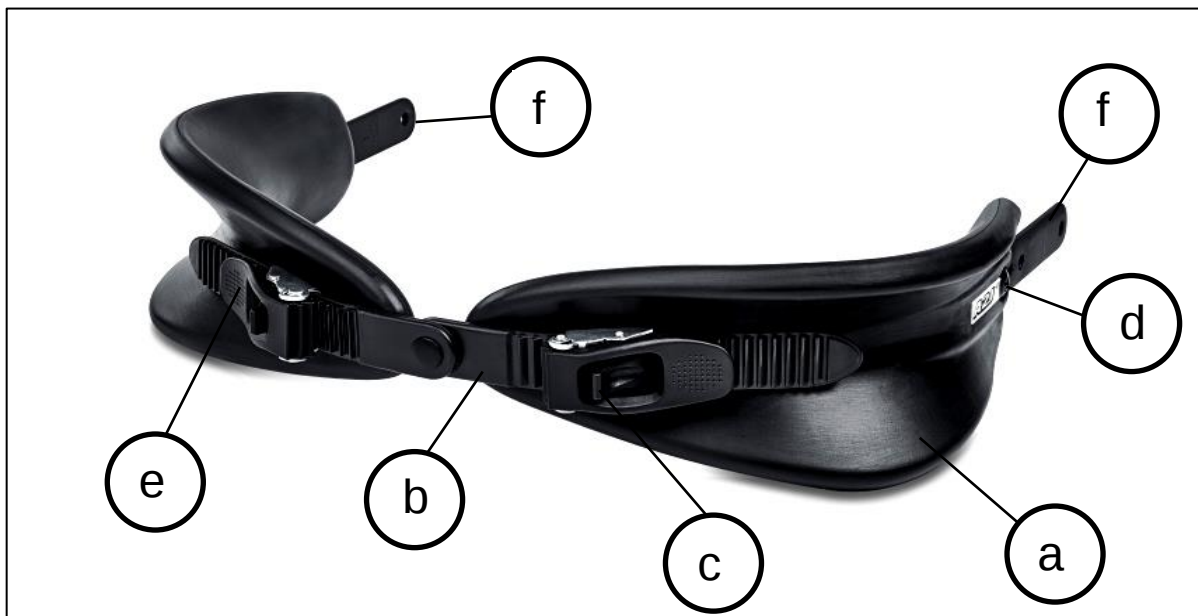

### **Ambito d'uso**

Questo **PELVI.LOC®** PL-3DWP impermeabile serve per il posizionamento e la ritenuta del bacino per le persone con mobilità ridotta su una sedia, per es. sedia a rotelle per doccia, lettino spiaggia, sedia a rotelle, piano di un sedile, sedia terapeutica, passeggini posturali, attrezzo sportivo

### **Gruppi di pazienti target:**

- Bambini, giovani e adulti
- Sesso: femminile e maschile

### **Controllo fornitura**

Disimballare completamente il prodotto e verificare l'integrità dell'oggetto di fornitura e la presenza di danni di trasporto. Qualora si dovesse riscontrare inaspettatamente un difetto, procedere come segue:

1. presentare tempestivamente un reclamo allo spedizioniere
2. far protocollare il danno / difetto
3. informare tempestivamente noi o il proprio rivenditore specializzato

### **Oggetto di fornitura**

- 1) 1 x **PELVI.LOC®** PL-3DWP -XXS, -XS, -S, -M, -L premontato
- 2) 1 x informazioni per il download elettronico delle istruzioni per il montaggio e l'uso

## Combinazione di dispositivi medici

Adatto per ausili predisposti per l'uso di una cintura di ritenuta del bacino

### Montaggio



Il montaggio deve essere eseguito da una persona dotata delle necessarie competenze tecniche

1. Disporre ciascun cuscinetto (a) rispettivamente nell'area del bacino e dell'articolazione dell'anca. – La cinghia dentata (b) deve essere disposta in alto.
  - Il logo sul cuscinetto sarà dunque visibile nel lato sinistro
2. Impostare la distanza dei cuscinetti con la cinghia dentata (b), azionando la fibbia a cricchetto (e).
  - La giuntura della cinghia dentata deve trovarsi al centro tra i due cuscinetti.
  - Estrarre la cinghia dentata massimo fino ad avere due denti liberi dietro al giunto a scatto (c).
3. Fissare successivamente le cinghie forate (f) al tubo del telaio della sedia a rotelle
4. Tendere la cinghia dentata (b) su entrambi i lati in modo uguale e in modo che resti lo spazio sufficiente per  
una mano aperta tra la coscia e il cuscinetto.
5. Se necessario, è possibile tagliare a emiciclo le estremità della cinghia dentata. Eventualmente sbavare  
le estremità della cinghia dentata tagliata. –Pericolo di lesioni!
6. Verificare che la cinghia dentata sia ben salda e bloccata su entrambi i lati!



### Istruzioni per l'uso



### Indicazioni di sicurezza

Nonostante le strutture siano solide, componenti come cinture forate, cinghie dentate e cuscinetti sono soggetti ad usura. Si consiglia pertanto di controllare accuratamente **PELVI.LOC®** PL-3DWP ogni 3 mesi. Verificare in tale occasione anche che le cuciture e i collegamenti a vite siano ben saldi!

- Assicurarsi prima dell'utilizzo che il prodotto sia in condizioni idonee all'utilizzo e che sia posizionato correttamente – pericolo di incidente!
- I componenti danneggiati come cinghie forate (f), cinghie dentate (b) o cuscinetti (a) non devono essere riparati o incollati e poi riutilizzati –pericolo di incidente!
- Non sedersi sui cuscinetti – pericolo per i punti di pressione, in particolare quelli dovuti ai cricchetti (c)!
- Non sollevare la sedia a rotelle dal **PELVI.LOC®** PL-3DWP - pericolo di incidente!
- Fare attenzione a non mettere le mani tra le cinghie forate e il tubo del telaio - o della seduta - pericolo di schiacciamento!

## Restrizioni sull'uso / effetti collaterali indesiderati

- Non utilizzare il **PELVI.LOC®** PL-3DWP se nell'area dei punti di contatto dei cuscinetti sono presenti ferite o altre lesioni non guarite – pericolo di lesioni!
- Non utilizzare il **PELVI.LOC®** PL-3DWP in presenza di osteoporosi, osteogenesi imperfetta o forti disturbi alla circolazione sanguigna – pericolo di lesioni!
- Dopo la pulizia, verificare che il **PELVI.LOC®** PL-3DWP funzioni correttamente!
- Riparare tempestivamente il **PELVI.LOC® PL-3DWP** qualora fosse danneggiato –pericolo di incidente!



### Attenzione:

- il **PELVI.LOC®** PL-3DWP non è parte del sistema di supporto dello schienale della sedia a rotella e/o della persona durante il trasporto in un veicolo di trasporto per disabili.
- Nell'ambito della garanzia del prodotto, il produttore e il distributore respingono ogni responsabilità per danni o rischi relativi al prodotto, causati da bambini non supervisionati!

## Utilizzo

1. Per utilizzare il **PELVI.LOC®** PL-3DWP posizionare i cuscinetti (a) sopra le cosce.



**Attenzione:** verificare che sotto i cuscinetti non si trovi alcun oggetto! In questo modo si evitano punti di pressione dolorosi.

2. Dopodiché, condurre la cinghia dentata (b) attraverso il rispettivo cricchetto. Azionare contemporaneamente la fibbia a cricchetto (e) corrispondente.
3. Successivamente, tendere la cinghia dentata (b) in modo che resti lo spazio per una mano aperta tra la coscia e il cuscinetto.
4. Verificare che i giunti a scatto (c) si aggancino ai denti della cinghia dentata!
  - Eseguire una prova di tensione!

Se durante l'uso del **PELVI.LOC®** PL-3DWP si verifica un allentamento involontario del sistema di posizionamento, è possibile rimediare a ciò tendendo nuovamente le cinghie.

**Per aprire il **PELVI.LOC®** PL-3DWP** azionare il giunto a scatto (c) ed estrarre la cinghia dentata.

- Fare attenzione a non far finire i cuscinetti negli interstizi della ruota motrice!

## Pulizia e disinfezione

- Disinfezione con ISOPROPANOL 70%
- Non utilizzare solventi come acetone o benzina avio!

## Manutenzione

Controllare periodicamente la presenza di danni sul **PELVI.LOC®** PL-3DWP e il suo corretto funzionamento.

## Riparazioni

Sostituire tempestivamente il **PELVI.LOC®** se è difettoso.

## Smaltimento

- Smaltire l'imballaggio del dispositivo nella raccolta differenziata.
- Smaltire le parti metalliche nei rifiuti metallici.
- Smaltire le parti in plastica nella raccolta della plastica.
- Smaltire i rifiuti ai sensi della normativa nazionale vigente.
- Chiedere alle amministrazioni cittadine e comunali informazioni in merito ai servizi di smaltimento locali.




## Dati tecnici

|                                               | XXXS | XXS     | XS      | S       | M        | L          | XL |
|-----------------------------------------------|------|---------|---------|---------|----------|------------|----|
| <b>Larghezza seduta (cm)</b>                  |      | 12 - 20 | 16 - 24 | 20 - 32 | 30 - 40  | 36 - 46    |    |
| <b>Dimensione cuscinetti (cm)</b>             |      | 14 x 6  | 18 x 7  | 21 x 8  | 25,5 x 8 | 26,5 x 8,5 |    |
| <b>Peso (g)</b>                               |      | 220     | 220     | 220     | 280      | 280        |    |
| <b>Punto di rottura target (per circa kg)</b> |      | 40      | 60      | 60      | 80       | 80         |    |

|                                         |                     |                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cinghia dentata gr. XXXS- XXS</b>    | 1,4 x 0,2 x 14,0 cm | Prodotto privo di latex<br><br><br><br> |
| <b>Cinghia dentata gr. XS - S</b>       | 1,9 x 0,2 x 17,0 cm |                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Cinghia dentata gr. M- L- XL</b>     | 2,4 x 0,2 x 17,0 cm |                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Fibbia a cricchetto gr. XXXS</b>     | B-14-STAR-BL        |                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Fibbia a cricchetto gr. XXS</b>      | B-14-GO-BL          |                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Fibbia a cricchetto gr. XS - S</b>   | B-19-ERGO-BL        |                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Fibbia a cricchetto gr. M- L- XL</b> | B-24-ERGO-BL        |                                                                                                                                                                                                                   |

## Condizioni di stoccaggio e trasporto
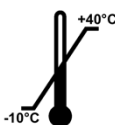
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>L'intervallo di temperatura per lo stoccaggio a lungo termine è compreso tra -10°C e +40°C.</p> <p>I picchi di temperatura a breve termine, ad esempio durante il trasporto, da -20°C a +60°C, sono ben tollerati dal materiale e non hanno alcun effetto sulla sicurezza e sulle prestazioni del prodotto.</p> |
|  | <p>Proteggere dall'umidità durante lo stoccaggio e il trasporto</p>                                                                                                                                                                                                                                                |

## Garanzia

Per il presente prodotto forniamo una garanzia in conformità alle disposizioni giuridiche. Questa copre difetti del materiale e della lavorazione. Sono escluse dalla garanzia le parti soggette ad usura e le parti/i gruppi soggette/i a normale consumo, così come i danni causati da una sovrasollecitazione, da “uso non conforme”, danneggiamento volontario o modifiche/riparazioni non conformi. In caso di richieste di risarcimento rivolgersi al proprio rivenditore specializzato da cui è stato acquistato il prodotto. Ai fini della garanzia, i lavori di riparazione, manutenzione ordinaria e straordinaria devono essere svolta dai rivenditori specializzati autorizzati, mediante l'uso di pezzi di ricambio originali



### Produttore:

A2J GmbH

Am Fuchsberg 13

D-87452 Altusried

Fon: +49 (08373) 987269

Fax: +49 (08373) 987276

eMail: [info@a2j-intl.com](mailto:info@a2j-intl.com)

Internet: [www.a2j-intl.com](http://www.a2j-intl.com)



Questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali del Regolamento UE 2017/745 sui dispositivi medici - Regolamento sui dispositivi medici (MDR).

Versione 01.01.2025

Il produttore si riserva il diritto di apporre modifiche tecniche