




PELVI.LOC® Genuframe PL-GF - XXS - XS - S - M - L - XL



Per usare questo prodotto in sicurezza, prima del primo utilizzo leggere e osservare le presenti istruzioni per il montaggio e l'uso

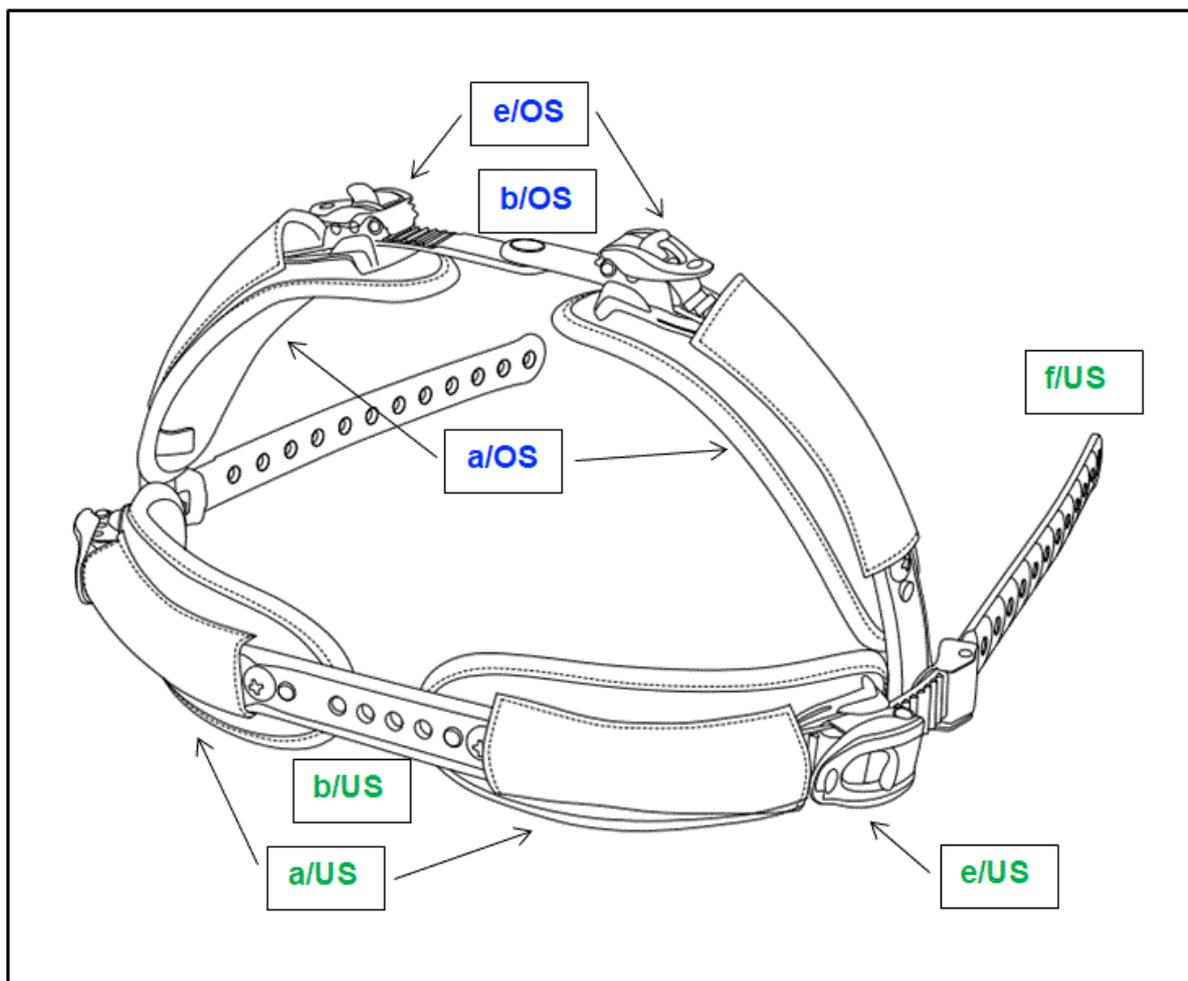

Ambito d'uso

Il **PELVI.LOC®** Genuframe - PL-GF serve alle persone con mobilità ridotta, specificatamente per il posizionamento del bacino e della coscia nella sedia a rotelle e nella sedia a rotelle attiva, e impedisce di scivolare in avanti.

Gruppi di pazienti target:

- Bambini, giovani e adulti
- Sesso: femminile e maschile

Controllo fornitura

Disimballare completamente il prodotto e verificare l'integrità dell'oggetto di fornitura e la presenza di danni di trasporto. Qualora si dovesse riscontrare inaspettatamente un difetto, procedere come segue:

1. presentare tempestivamente un reclamo allo spedizioniere
2. far protocollare il danno / difetto
3. informare tempestivamente noi o il proprio rivenditore specializzato

Oggetto di fornitura

- 1) 1 x cintura per coscia **PELVI.LOC**[®] Genuframe- XXS, -XS, -S, -M, -L, -XL premontata
- 2) 1 x cintura per gamba **PELVI.LOC**[®] Genuframe- XXS, -XS, -S, -M, -L, -XL premontata
- 3) 1 x informazioni per il download elettronico delle istruzioni per il montaggio e l'uso

Combinazione di dispositivi medici

Adatto per ausili predisposti per l'uso di una cintura di ritenuta del bacino

Montaggio cintura per gamba



Il montaggio deve essere eseguito da una persona dotata delle necessarie competenze tecniche

Il montaggio della cintura per gamba **PELVI.LOC**[®] Genuframe è il medesimo del PL-UG

1. Posizionare i cuscinetti (**a/US**) rispettivamente nell'area delle gambe (al di sotto della tibia o della testa del femore). La cinghia forata/dentata (**f/US**) si trova all'esterno.
 - Il logo **PELVI.LOC**[®] sul cuscinetto della gamba sarà dunque visibile da davanti!
2. Impostare la distanza dei cuscinetti della gamba sopra le cinghie forate (**b/US**).
3. Fissare la cinghia forata/dentata (**f/US**) al tubo del telaio della sedia a rotelle
4. Tendere la cinghia forata/dentata (**f/US**) su entrambi i lati in modo uguale e in modo che resti lo spazio sufficiente per una mano aperta tra la coscia e il cuscinetto
5. Se necessario, è possibile tagliare a emiciclo le estremità della cinghia dentata. Eventualmente sbavare le estremità della cinghia dentata tagliata. –Pericolo di lesioni!
6. Verificare che la cinghia forata/dentata sia ben salda e bloccata su entrambi i lati!

Montaggio cintura per coscia

Il montaggio della cintura per coscia **PELVI.LOC**[®] Genuframe è il medesimo del PL-2DB

7. Disporre ciascun cuscinetto (**a/OS**) nella rispettiva area della coscia. – La cinghia dentata (**b/OS**) deve essere disposta in alto.
 - Il logo **PELVI.LOC**[®] sul cuscinetto della coscia sarà dunque visibile da davanti!
8. Impostare la distanza dei cuscinetti con la cinghia dentata (**b/OS**), azionando le fibbie a cricchetto della cintura per coscia (**e/OS**).
 - La giuntura della cinghia dentata (**b/OS**) deve trovarsi al centro tra i due cuscinetti.
 - Estrarre la cinghia dentata massimo fino ad avere due denti liberi dietro alla fibbia a cricchetto (**e/OS**).



Istruzioni per l'uso



Indicazioni di sicurezza

Nonostante le strutture siano solide, componenti come cinture forate, bretelle, cinghie dentate e cuscinetti sono soggetti ad usura. Si consiglia pertanto di controllare accuratamente **PELVI.LOC®** ogni 3 mesi. Verificare in tale occasione anche che le cuciture e i collegamenti a vite siano ben saldi!

- Assicurarsi prima dell'utilizzo che il prodotto sia in condizioni idonee all'utilizzo e che sia posizionato correttamente – pericolo di incidente!
- I componenti danneggiati come cinghie forate/bretelle (f), cinghie dentate (b) o cuscinetti (a) non devono essere riparati o incollati e poi riutilizzati –pericolo di incidente!
- Non sedersi sui cuscinetti – pericolo per i punti di pressione, in particolare quelli dovuti alle fibbie a cricchetto (e)!
- Non sollevare la sedia a rotelle dal **PELVI.LOC®** - pericolo di incidente!
- Fare attenzione a non mettere le mani tra la cintura forata e il tubo del telaio - o della seduta - pericolo di schiacciamento!

Restrizioni sull'uso / effetti collaterali indesiderati

- Non utilizzare il **PELVI.LOC®** se nell'area dei punti di contatto dei cuscinetti sono presenti ferite o altre lesioni non guarite – pericolo di lesioni!
- Non utilizzare il **PELVI.LOC®** in presenza di osteoporosi, osteogenesi imperfetta o forti disturbi alla circolazione sanguigna – pericolo di lesioni!
- Dopo la pulizia, verificare che il **PELVI.LOC®** funzioni correttamente!
- Riparare tempestivamente il **PELVI.LOC®** qualora fosse danneggiato –pericolo di incidente!



Attenzione:

- il **PELVI.LOC®** non è parte del sistema di supporto dello schienale della sedia a rotella e/o della persona durante il trasporto in un veicolo di trasporto per disabili.
 - Nell'ambito della garanzia del prodotto, il produttore e il distributore respingono ogni responsabilità per danni o rischi relativi al prodotto, causati da bambini non supervisionati!
1. Per utilizzare il **PELVI.LOC®** posizionare i cuscinetti (a) sopra le gambe

Utilizzo

1. Per utilizzare il **PELVI.LOC®** posizionare i cuscinetti (a) sopra le cosce e le gambe



Attenzione: verificare che sotto i cuscinetti non si trovi alcun oggetto! In questo modo si evitano punti di pressione dolorosi.

2. Dopodiché, condurre la cinghia dentata (**f/US**) attraverso il rispettivo cricchetto. Azionare contemporaneamente la fibbia a cricchetto (**e/US**) corrispondente.
3. Successivamente, tendere la cinghia dentata (**f/US**) in modo che resti lo spazio per una mano aperta tra la coscia e il cuscinetto.
4. Verificare che le fibbie a cricchetto (**e/US**) si aggancino ai denti della cinghia dentata!
 - Eseguire una prova di tensione!

Per aprire il PELVI.LOC® azionare la fibbia a cricchetto (**e/US**) ed estrarre la cinghia dentata.

- Fare attenzione a non far finire i cuscinetti negli interstizi della ruota motrice!

Pulizia e disinfezione

- Lavabile in lavatrice fino a 40 gradi.
- Disinfezione chemioterica possibile mediante l'aggiunta di ELTRA 40 al ciclo di lavaggio
- Non centrifugare
- Non idoneo per l'asciugatrice

Manutenzione

Controllare periodicamente la presenza di danni sul **PELVI.LOC®** e il suo corretto funzionamento.

Riparazioni

Sostituire tempestivamente il **PELVI.LOC®** se è difettoso.

Smaltimento

- Smaltire l'imballaggio del dispositivo nella raccolta differenziata.
- Smaltire le parti metalliche nei rifiuti metallici.
- Smaltire le parti in plastica nella raccolta della plastica.
- Smaltire i rifiuti ai sensi della normativa nazionale vigente.
- Chiedere alle amministrazioni cittadine e comunali informazioni in merito ai servizi di smaltimento locali.

Dati tecnici

	XXS	XS	S	M	L	XL
Larghezza ginocchio (cm)	12 – 20	16 - 24	20 - 32	30 - 40	36 - 46	44 - 52
Dimensione cuscinetti (cm)	12 x 7	18 x 7	21 x 8	25,5 x 8	26,5 x 8,5	28,5 x 9
Peso (g)	200	220	220	280	280	300
Punto di rottura target (per circa kg)	60	60	60	80	80	80

Cinghia dentata gr. XXS- XS - S	1,9 x 0,2 x 17,0 cm
Cinghia dentata gr. M- L – XL	2,4 x 0,2 x 17,0 cm



Nota importante: Larghezza ginocchio, non larghezza seduta!

Condizioni di stoccaggio e trasporto

	<p>L'intervallo di temperatura per lo stoccaggio a lungo termine è compreso tra -10°C e +40°C.</p> <p>I picchi di temperatura a breve termine, ad esempio durante il trasporto, da -20°C a +60°C, sono ben tollerati dal materiale e non hanno alcun effetto sulla sicurezza e sulle prestazioni del prodotto.</p>
	<p>Proteggere dall'umidità durante lo stoccaggio e il trasporto</p>

Garanzia

Per il presente prodotto forniamo una garanzia in conformità alle disposizioni giuridiche. Questa copre difetti del materiale e della lavorazione. Sono escluse dalla garanzia le parti soggette ad usura e le parti/i gruppi soggette/i a normale consumo, così come i danni causati da una sovrasollecitazione, da “uso non conforme”, danneggiamento volontario o modifiche/riparazioni non conformi. In caso di richieste di risarcimento rivolgersi al proprio rivenditore specializzato da cui è stato acquistato il prodotto. Ai fini della garanzia, i lavori di riparazione, manutenzione ordinaria e straordinaria devono essere svolta dai rivenditori specializzati autorizzati, mediante l'uso di pezzi di ricambio originali



Produttore:

A2J GmbH

Am Fuchsberg 13

D-87452 Altusried

Fon: +49 (08373) 987269

Fax: +49 (08373) 987276

eMail: info@a2j-intl.com

Internet: www.a2j-intl.com



Questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali del Regolamento UE 2017/745 sui dispositivi medici - Regolamento sui dispositivi medici (MDR).

Versione 01.01.2025

Il produttore si riserva il diritto di apporre modifiche tecniche