




PELVI.LOC® PL-2DB -XXS, -XS - S - M - L - XL



Pro bezpečnou aplikaci tohoto výrobku si přečtěte a před prvním použitím prosím dbejte návodu k montáži a použití.

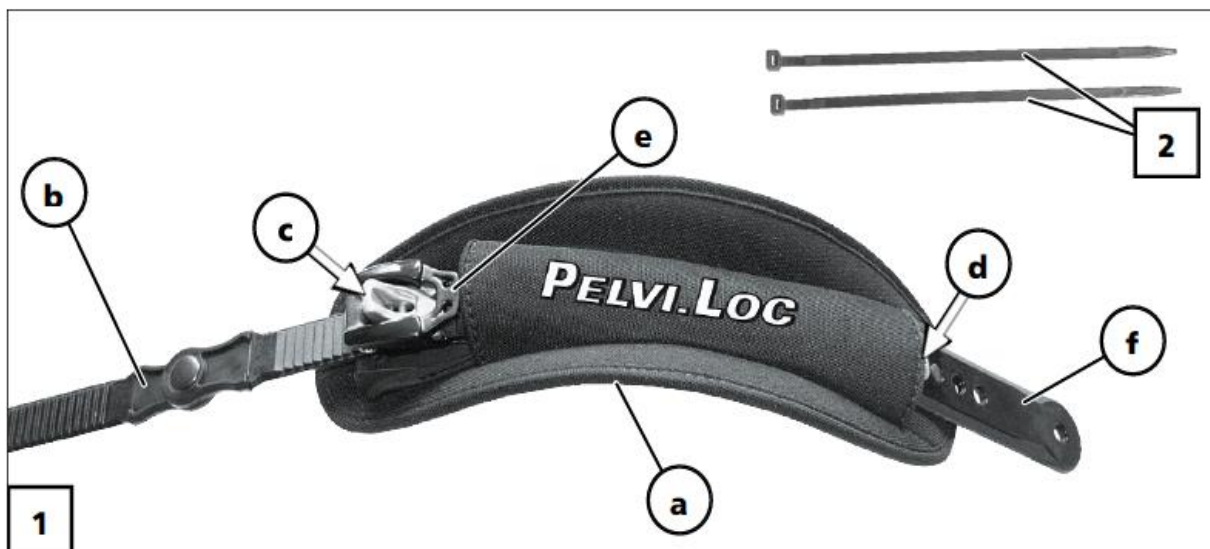

Oblast použití

PELVI.LOC® PL-2DB slouží osobám s omezenou mobilitou, zvláště pro polohování stehien v invalidním vozíku a aktivním invalidním vozíku a brání sklouznutí dopředu.

Určená skupina pacientů:

- děti, mládež a dospělé osoby
- pohlaví: ženské a mužské

Kontrola při převzetí

Výrobek kompletně rozbalte a zásilku zkontrolujte z hlediska úplnosti a poškození při přepravě. Pokud byste zjistili, že zásilka oproti očekávání vykazuje vadu, tak:

1. ji okamžitě reklamujte u dopravce
2. nechte škodu / vadu zaznamenat do protokolu
3. okamžitě informujte nás nebo vašeho specializovaného prodejce

Rozsah dodávky

- 1) 1 x **PELVI.LOC®** PL-2DB - XXS, -XS, -S, -M, -L, -XL předmontováno
- 2) 2 x stahovací pásy 7,8 mm
- 3) 1 x informace k online stažení návodu k montáži a použití

Kombinace zdravotnických výrobků

Vhodné pro pomůcky, které jsou určeny k použití pánevního retrakčního pásu

Montáž



Montáž by měla provést osoba s odbornými znalostmi.

1. Polstrování (a) přiložte ve stehenní oblasti. – Ozubený pás (b) přitom leží nahoře.
 - Logo na polstrování přitom musí být čitelné zepředu!
2. Vzdálenost polstrování nastavte pomocí ozubeného pásu (b) stisknutím spony ráčny (e).
 - Kloub ozubeného pásu by se pak měl nacházet uprostřed mezi polstrováním.
 - Ozubený pás musí být max. natolik vytažený, aby byly ještě dva zuby za každou západkou (c) volné.
 - K nastavení může být povolen suchý zip a polstrování roztaženo (dbejte jen u pásů se zakrytou sponou ráčny).
3. Následně umístěte děrované řemeny (f) na trubce rámu invalidního vozíku.
4. Ozubený pás (b) na obou stranách napněte stejně a natolik, aby bylo mezi stehnem a polstrováním ještě místo na jednu plochu ruky.
5. V případě potřeby mohou být konce ozubeného pásu polokruhově zkráceny. Z konce zkráceného ozubeného pásu odstraňte případné otřepy. – nebezpečí poranění!
6. Zkontrolujte pevné umístění a aretaci na obou stranách ozubeného pásu!



Návod k použití



Bezpečnostní pokyny

I přes stabilní konstrukci podléhají konstrukční díly, jako jsou děrované popruhy, ozubené pásy a polstrování určitému opotřebení. Proto doporučujeme každé tři měsíce **PELVI.LOC**[®] důkladně kontrolovat. Dbejte přitom také na dotažení nýtovaných a šroubovaných spojů!

- Před použitím se přesvědčte o stavu vhodném k použití a správné poloze výrobku - nebezpečí nehody!
- Poškozené konstrukční díly, jako jsou děrované řemeny (f), ozubený pás (b) nebo polstrování (a) neopravujte záplatami, resp. nelepte a opět nepoužívejte - nebezpečí nehody!
- Na polstrování si nesedejte - nebezpečí otláčených míst především vlivem ráčen (e)!
- Invalidní vozík nezvedejte za **PELVI.LOC**[®] - nebezpečí nehody!
- Dbejte přitom na to, abyste nedávali ruce mezi děrovaný pás a trubku rámu nebo sedadla - nebezpečí přimáčknutí!

Omezení použití / nežádoucí vedlejší účinky

- **PELVI.LOC**[®] nepoužívejte, když se v oblasti polstrování vyskytují otláčená místa, trhliny nebo jiná poškození - nebezpečí poranění!
- **PELVI.LOC**[®] nepoužívejte v případě osteoporózy, řídnutí kostí nebo silného prokrvování - nebezpečí poranění!
- Po vyčištění zajistěte správnou funkci **PELVI.LOC**[®]!
- Poškozený **PELVI.LOC**[®] by měl být okamžitě vyměněn - nebezpečí nehody!

**Pozor:**

- **PELVI.LOC**[®] není součástí zádržného systému pro invalidní vozíky a/nebo cestující při přepravě ve vozidle pro přepravu postižených osob.
- Výrobce ani distributor nemohou být ve smyslu zodpovědnosti za výrobek zodpovědní za škody nebo rizika, která budou způsobena v souvislosti s výrobkem dětmi, které nejsou pod dohledem!

Použití

1. K použití **PELVI.LOC**[®] se polstrování (a) pokládá na stehna.



Pozor: Dbejte na to, aby se pod polstrováním nenacházely žádné předměty! Zabráňte tak bolestivým otlakům.

2. **Důležité:** Nepřikládejte na pánev nebo rozštěp!
 3. Poté ozubený pás (b) vedte skrz příslušnou ráčnu. Pro tento účel stiskněte příslušnou sponu ráčny (e).
 4. Následně ozubený pás (b) napněte natolik, aby bylo mezi stehnem a polstrováním ještě místo na jednu plochu ruky.
 5. Zajistěte, aby západky (e) zasahovaly do zubů ozubeného pásu!
- Proveďte zkoušku tahu!

Pokud dojde během používání **PELVI.LOC**[®] k nechtěnému uvolnění polohovacího systému, pak to může být odstraněno opětovným napnutím.

K otevření **PELVI.LOC[®] PL-3DWP** stiskněte západku (c) a vytáhněte ozubený pás.

- Dbejte na to, aby se polstrování nedostalo mezi špice hnacího kola!

Čištění a dezinfekce

- Vhodné k praní v pračce do 40 stupňů.
- Chemicko-tepelná dezinfekce je možná přidáním ELTRA 40 do prací operace.
- Neždímejte.
- Nevhodné do sušičky.

Údržba

PELVI.LOC[®] pravidelně kontrolujte z hlediska poškození a funkčnosti.

Opravy



Vadný **PELVI.LOC**[®] okamžitě vyměňte.

Likvidace

- Obal přístroje může být předán k recyklaci druhotných surovin.
- Kovové díly mohou být předány k recyklaci použitých kovů.
- Plastové díly mohou být předány k recyklaci plastů.
- Likvidace musí probíhat dle příslušných národních zákonných ustanovení.
- Zeptejte se prosím správy vašeho města/obce na místní likvidační podniky.

Technické údaje



	XXXS	XXS	XS	S	M	L	XL
Délka sedadla (cm)		12 - 20	16 - 24	20 - 32	30 - 40	36 - 46	44 - 52
Velikost polstrování (cm)		11,5 x 7,5	18 x 7	21 x 8	25,5 x 8	26,5 x 8,5	28,5 x 9
Hmotnost (g)		200	220	220	280	280	280
Stanovené místo lomu (při cca kg)		60	60	60	80	80	80

Ozubený pás vel. XXXS - XXS	19 x 0,2 x 40 cm	bez latexu  
Ozubený pás vel. XS - S	19 x 0,2 x 40 cm	
Ozubený pás vel. M - L - XL	2,4 x 0,2 x 40 cm	
Spona ráčny vel. XXXS		
Spona ráčny vel. XXS		
Spona ráčny vel. XS - S	B-24-ERGO-BL	
Spona ráčny vel. M - XL	B-24ERGO-BL	



Indicación importante: ¡Ancho de las rodillas, no ancho del asiento!

Skladovací a přepravní podmínky

	Teplotní rozsah pro dlouhodobé skladování od -10 °C do +40 °C. Krátkodobé teplotní výkyvy, např. během přepravy, od -20 °C do +60 °C materiál dobře snáší a nemají vliv na bezpečnost a funkčnost výrobku.
	Chraňte před vlhkostí během skladování a přepravy

Záruční plnění

Za tento výrobek přebíráme záruku v souladu se zákonnými ustanoveními. Vztahuje se na vady materiálu a chyby zpracování. Nevztahuje se na opotřebitelné díly a díly/sestavy, které podléhají běžnému opotřebení, jakož i na poškození vzniklá nadměrným namáháním, „používáním v rozporu s určením“, poškozením způsobeným násilím nebo neschválenou úpravou/opravou. V případě záručního plnění se obraťte na specializovaného prodejce, u kterého jste tento výrobek zakoupili. Z důvodu odpovědnosti za výrobek mohou opravy, údržbu a servisní práce provádět pouze autorizovaní specializovaní prodejci s použitím originálních náhradních dílů



Výrobce:

A2J GmbH

Am Fuchsberg 13

D-87452 Altusried

Tel.: +49 (08373) 987269

Fax: +49 (08373) 987276

E-mail: info@a2j-intl.com

Internet: www.a2j-intl.com



Tento výrobek je v souladu se základními požadavky nařízení EU 2017/745 o zdravotnických prostředcích - Medical Device Regulation (MDR)

Stav 01.01.2025

Technické změny vyhrazeny