




PELVI.LOC® PL-3DWP – XXS - XS - S - M - L



W celu zapewnienia bezpiecznego użytkowania produktu należy przed jego pierwszym użyciem przeczytać niniejszą instrukcję montażu i obsługi i stosować się do niej.

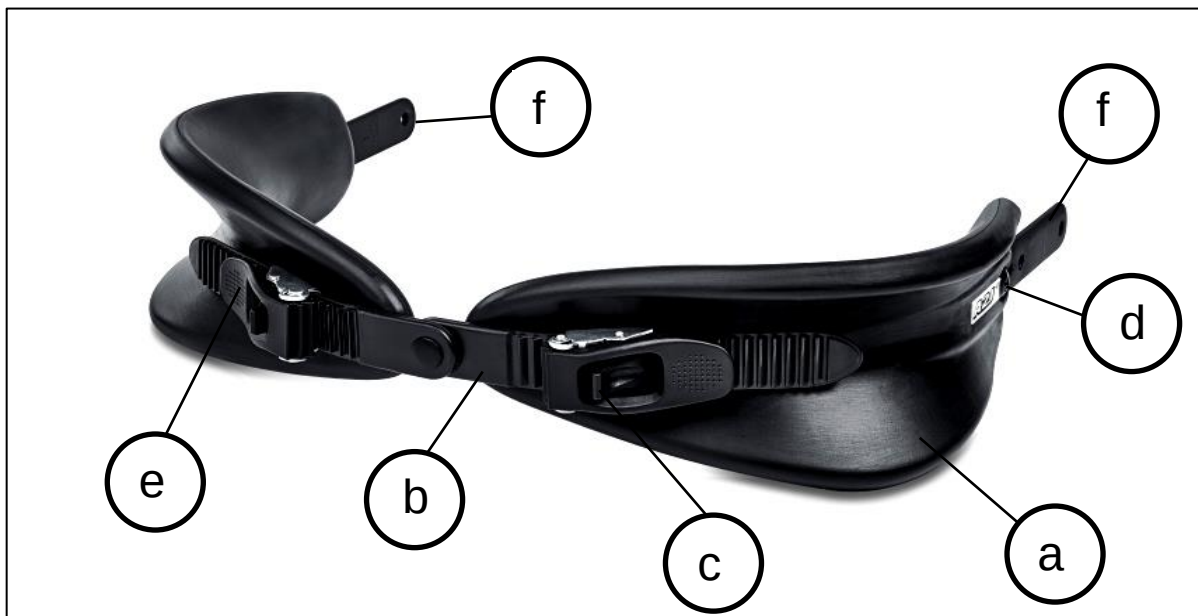

Zakres stosowania

Wodoodporny **PELVI.LOC®** PL-3DWP służy do pozycjonowania i stabilizowania miednicy na siedzeniu u osób o ograniczonej sprawności ruchowej, np. siedzących na wózku prysznicowym, krześle kąpielowym, wózku inwalidzkim, muszli, krześle terapeutycznym, wózku rehabilitacyjnym, sprzęcie sportowym.

Przewidziana grupa pacjentów:

- dzieci, młodzież i dorośli
- płeć: kobiety i mężczyźni

Kontrola podczas odbioru

Całkowicie rozpakuj produkt i sprawdź przesyłkę pod kątem kompletności i uszkodzeń transportowych. Jeśli okaże się, że przesyłka ma wadę, wówczas:

1. Należy niezwłocznie złożyć reklamację firmie przewozowej.
2. Należy odnotować uszkodzenia/braki.
3. Należy o tym fakcie niezwłocznie poinformować nas lub specjalistycznego sprzedawcę.

Zakres dostawy

- 1) 1 x **PELVI.LOC®** PL-3DWP XXS, -XS, -S, -M, -L wstępnie zmontowana
- 2) 1 x informacje na temat pobierania instrukcji montażu i obsługi online

Łączenie wyrobów medycznych

Można używać z urządzeniami wspomagającymi stosowanymi z pasem do stabilizacji miednicy.

Montaż



Montaż powinna przeprowadzić osoba posiadająca specjalistyczną wiedzę:

1. Umieścić podkładki (a) w obszarze miednicy/zgięcia bioder. - Opaska zębata (b) powinna być na górze.
 - Powinno się dać przeczytać logo umieszczone na podkładce po lewej stronie.
2. Wyregulować odległość pomiędzy podkładkami za pomocą opaski zębatej (b), uruchamiając klamry zapadkowe (e).
 - Złącze opaski zębatej należy następnie umieścić centralnie pomiędzy podkładkami.
 - Wyciągnąć maksymalnie opaskę zębatą tak, aby za każdą klamrą zapadkową (c) pozostały jeszcze dwa wolne zęby.
3. Następnie przymocować perforowane pasy (f) do rury ramy wózka inwalidzkiego.
4. Opaskę zębatą (b) naciągać równomiernie po obu stronach tak, aby pomiędzy udem a podkładką pozostało miejsce na dłoń włożoną na płasko.
5. W razie potrzeby można przyciąć końce opaski zębatej do kształtu półkolistego. W razie potrzeby należy usunąć zadziory z końcówek przyciętych opasek zębatych. – Niebezpieczeństwo zranienia!
6. Sprawdzić ściśle dopasowanie i mechanizm blokujący po obu stronach opaski zębatej!



Instrukcja obsługi



Instrukcje bezpieczeństwa

Pomimo stabilnej konstrukcji elementy takie jak pasy perforowane, opaski zębate i podkładki są narażone na zużycie. Dlatego zaleca się dokładne sprawdzanie **PELVI.LOC®** PL-3DWP co 3 miesiące. Upewnić się, czy nity i połączenia śrubowe są mocno osadzone!

- Przed użyciem należy upewnić się, czy produkt jest w stanie zdatnym do użytku i czy jest prawidłowo osadzony - ryzyko wypadku!
- Nie naprawiać ani nie kleić uszkodzonych elementów, takich jak pas perforowany (f), opaska zębata (b) lub podkładka (a) i nie używać ich ponownie - ryzyko wypadku!
- Nie siadać na podkładkach - niebezpieczeństwo powstania odcisków spowodowanych naciskiem zwłaszcza klamer zapadkowych (c)!
- Nie należy podnosić wózka powyżej **PELVI.LOC®** PL-3DWP- ryzyko wypadku!
- Upewnić się, czy ręce nie znajdują się między pasem perforowanym a rurą ramy lub rurą pod siedziskiem - niebezpieczeństwo zgniecenia!

Ograniczenia w stosowaniu / działania niepożądane

- Nie należy używać **PELVI.LOC**[®] PL-3DWP, jeśli w obszarze podkładek znajdują się odciski, rany lub inne niezabliźnione urazy - niebezpieczeństwo obrażeń!
- Nie należy używać **PELVI.LOC**[®] PL-3DWP w przypadku osteoporozy, łamliwości kości lub poważnych zaburzeń krążenia - niebezpieczeństwo obrażeń!
- Po oczyszczeniu należy zapewnić prawidłowe działanie **PELVI.LOC**[®] PL-3DWP!
- Uszkodzony **PELVI.LOC**[®] PL-3DWP należy natychmiast wymienić - ryzyko wypadku!



Uwaga:

- **PELVI.LOC**[®] PL-3DWP nie jest częścią systemu przytrzymującego wózek inwalidzki i/lub pasażera podczas transportu w pojeździe transportowym dla osób niepełnosprawnych.
- W zakresie odpowiedzialności za produkt ani producent, ani dystrybutor nie odpowiadają za ryzyko lub szkody spowodowane przez dzieci pozostające bez nadzoru!

Zastosowanie

1. Aby użyć **PELVI.LOC**[®] PL-3DWP, podkładki (a) należy umieścić na udach.



Uwaga: Należy sprawdzić czy pod podkładką nie ma przedmiotów! W ten sposób unika się bolesnych odcisków.

2. Następnie przepuścić opaskę zębatą (b) przez odpowiednią zapadkę. W tym celu należy uruchomić odpowiednią klamrę zapadkową (e).
3. Następnie naciągać opaskę zębatą (b) do momentu, aż pomiędzy udem a podkładką będzie jeszcze miejsce na włożenie dłoni na płasko.
4. Upewnić się, czy zapadki (c) współpracują z zębami opaski zębatej!
 - Przeprowadzić próbę rozciągania!

Jeśli podczas zakładania **PELVI.LOC**[®] PL-3DWP dojdzie do niezamierzonego poluzowania systemu pozycjonowania, można ponownie napiąć system pozycjonowania.

Aby otworzyć **PELVI.LOC[®] PL-3DWP należy uruchomić zapadkę (c) i wyciągnąć opaskę zębatą.**

- Upewnić się, czy podkładki nie znajdują się pomiędzy szprychami koła napędowego!

Czyszczenie i dezynfekcja

- Dezynfekcja poprzez wycieranie z zastosowaniem IZOPROPANOLU 70%
- Nie używać rozpuszczalników takich jak aceton i benzyna!

Konserwacja

PELVI.LOC[®] PL-3DWP należy regularnie sprawdzać pod kątem uszkodzeń i działania.

Naprawy

Uszkodzony **PELVI.LOC**[®] należy natychmiast wymienić.

Utylizacja

- Opakowanie sprzętu nadaje się do ponownego użytku.
- Części metalowe nadają się do recyklingu złomu.
- Części plastikowe nadają się do recyklingu tworzyw sztucznych.
- Utylizację należy przeprowadzić zgodnie z odpowiednimi krajowymi przepisami.
- Zwrócić się do władz miasta/gminy z zapytaniem o lokalne firmy zajmujące się utylizacją odpadów.

Dane techniczne

	XXXS	XXS	XS	S	M	L	XL
Szerokość siedziska (cm)		12 - 20	16 - 24	20 - 32	30 - 40	36 - 46	44 - 52
Wielkość podkładki (cm)		14 x 6	18 x 7	21 x 8	25,5 x 8	26,5 x 8,5	28,5 x 9
Waga (g)		220	220	220	280	280	280
Rozerwanie (przy ok. kg)		40	60	60	80	80	80

Rozmiar opaski zębatej XXS	1,9 x 0,2 x 17,0 cm	nie zawiera lateksu  
Rozmiar opaski zębatej XS - S	1,9 x 0,2 x 17,0 cm	
Rozmiar opaski zębatej M - L - XL	2,4 x 0,2 x 17,0 cm	
Rozmiar klamry zapadkowej XXXS		
Rozmiar klamry zapadkowej XXS	B-19-ERGO-BL	
Rozmiar klamry zapadkowej XS - S	B-19-ERGO-BL	
Rozmiar klamry zapadkowej M- L - XL	B-24-ERGO-BL	

Warunki przechowywania i transportu

	Zakres temperatur w przypadku długotrwałego przechowywania: od -10°C do +40°C. Krótkotrwałe skoki temperatury od -20°C do +60°C, np. podczas transportu, są dobrze tolerowane przez materiał i nie mają wpływu na bezpieczeństwo i wydajność produktu.
	Chronić przed wilgocią podczas przechowywania i transportu

Gwarancja

Udzielamy gwarancji na ten produkt zgodnie z przepisami ustawowymi. Obejmuje ona wady materiałowe i technologiczne. Z gwarancji wyłączone są części eksploatacyjne oraz części/podzespoły podlegające normalnemu zużyciu, a także uszkodzenia wynikające z nadmiernego obciążenia, „zastosowania niezgodnego z przeznaczeniem”, użycia nadmiernej siły lub niedozwolonej modyfikacji/naprawy. W celu skorzystania z gwarancji należy skontaktować się ze sprzedawcą, u którego zakupiono produkt. Ze względu na odpowiedzialność za produkt wszelkie naprawy, konserwacje i prace serwisowe mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowanych sprzedawców przy użyciu oryginalnych części zamiennych.



Producent:

A2J GmbH

Am Fuchsberg 13

D-87452 Altusried

Telefon: +49 (08373) 987269

Faks: +49 (08373) 987276

e-mail: info@a2j-intl.com

Strona internetowa: www.a2j-intl.com



Ten produkt jest zgodny z zasadniczymi wymogami rozporządzenia UE 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych – Medical Device Regulation (MDR)

Stan na dzień 01.01.2025

Zastrzega się prawo do wprowadzenia zmian technicznych