




PELVI.LOC® PL- ASY - S - M - L



W celu zapewnienia bezpiecznego użytkowania produktu należy przed jego pierwszym użyciem przeczytać niniejszą instrukcję montażu i obsługi i stosować się do niej.

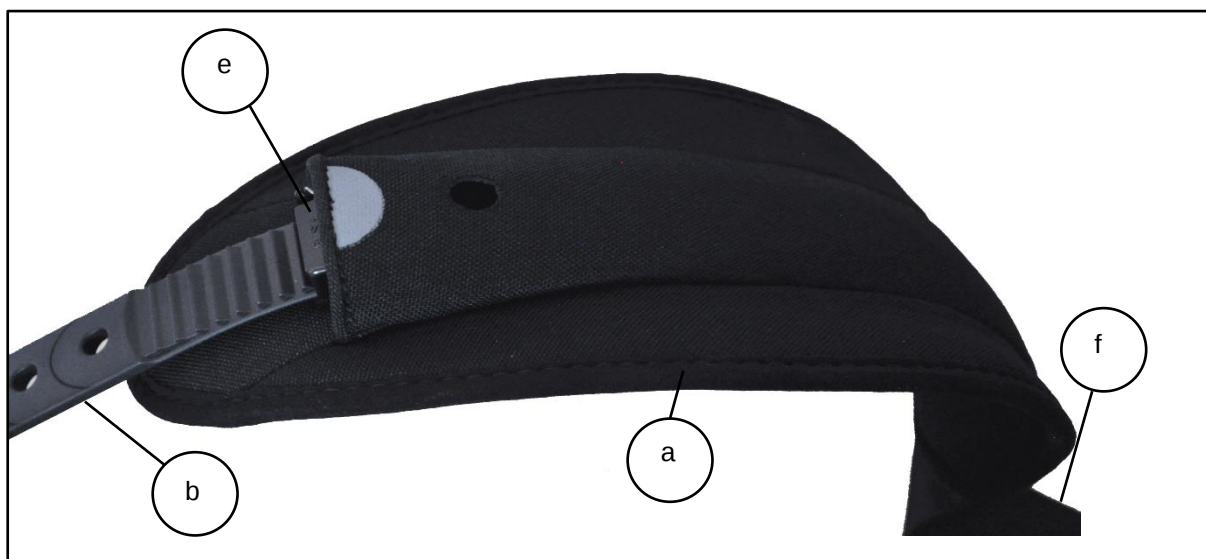

Zakres stosowania

PELVI.LOC® PL- ASY jest przeznaczony dla osób z ograniczoną możliwością poruszania się, zwłaszcza do asymetrycznego pozycjonowania miednicy na wózkach inwalidzkich i aktywnych wózkach inwalidzkich oraz zapobiega ześlizgiwaniu się do przodu.

Przewidziana grupa pacjentów:

- dzieci, młodzież i dorośli
- płeć: kobiety i mężczyźni

Kontrola podczas odbioru

Całkowicie rozpakuj produkt i sprawdź przesyłkę pod kątem kompletności i uszkodzeń transportowych. Jeśli okaże się, że przesyłka ma wadę, wówczas:

1. Należy niezwłocznie złożyć reklamację firmie przewozowej.
2. Należy odnotować uszkodzenia/braki.
3. Należy o tym fakcie niezwłocznie poinformować nas lub specjalistycznego sprzedawcę.

Zakres dostawy

- 1) 1 x **PELVI.LOC®** PL-ASY -S, -M, -L wstępnie zmontowana
- 2) 2 x opaski kablowe 7,8 mm
- 3) 2 x pętla taśmy paskowej
- 4) 2 x opaska zębata długość 400mm
- 5) 1 x informacje na temat pobierania instrukcji montażu i obsługi online

Łączenie wyrobów medycznych

Można używać z urządzeniami wspomagającymi stosowanymi z pasem do stabilizacji miednicy.

Montaż



Montaż powinna przeprowadzić osoba posiadająca specjalistyczną wiedzę:

1. Umieścić podkładki (a) w obszarze miednicy/zgięcia bioder/kroku.
2. Opaskę zębatą (b) zamocować do rury siedziska wózka inwalidzkiego (Przestrzegać wskazówek dotyczących montażu!)
 - Taśmę paska (f) należy zamocować indywidualnie do siedziska wózka inwalidzkiego.
3. Ustawić odstęp między podkładkami nad paskiem zębatym (b). Po uruchomieniu klamer zapadkowych (e) napina się pas 3D.
4. Naciągać opaskę zębatą (b) równo po obu stronach do momentu, aż pomiędzy udem a podkładką będzie jeszcze miejsce na włożenie dłoni na płasko.
5. W razie potrzeby można przyciąć końce opaski zębatej do kształtu półkolistego. W razie potrzeby należy usunąć zadziory z końcówek przyciętych opasek zębatych.
 - Niebezpieczeństwo zranienia!
6. Sprawdzić ściśle dopasowanie i mechanizm blokujący po obu stronach opaski zębatej!



Instrukcja obsługi



Instrukcje bezpieczeństwa

Pomimo stabilnej konstrukcji elementy takie jak pasy perforowane, taśmy paska, opaski zębate i podkładki są narażone na zużycie. Dlatego zaleca się dokładne sprawdzanie **PELVI.LOC®** co 3 miesiące. Upewnić się, czy nity i połączenia śrubowe są mocno osadzone!

- Przed użyciem należy upewnić się, czy produkt jest w stanie zdatnym do użytku i czy jest prawidłowo osadzony - ryzyko wypadku!
- Nie naprawiać ani nie kleić uszkodzonych elementów, takich jak pas perforowany/taśma paska (f), opaska zębata (b) lub podkładka (a) i nie używać ich ponownie - ryzyko wypadku!
- Nie siadać na podkładkach - niebezpieczeństwo powstania odcisków spowodowanych naciskiem zwłaszcza klamer zapadkowych (e)!
- Nie należy podnosić wózka powyżej **PELVI.LOC®** - ryzyko wypadku!
- Upewnić się, czy ręce nie znajdują się między perforowanym pasem a rurą ramą lub rurą pod siedziskiem - niebezpieczeństwo zgniecenia!

Ograniczenia w stosowaniu / działania niepożądane

- Nie należy używać **PELVI.LOC®** jeśli w obszarze podkładek znajdują się odciski, rany lub inne niezabliźnione urazy - niebezpieczeństwo obrażeń!
- Nie należy używać **PELVI.LOC®** w przypadku osteoporozy, łamliwości kości lub poważnych zaburzeń krążenia - niebezpieczeństwo obrażeń!
- Po oczyszczeniu należy zapewnić prawidłowe działanie **PELVI.LOC®**!
- Uszkodzony **PELVI.LOC®** należy natychmiast wymienić - ryzyko wypadku!



Uwaga:

- **PELVI.LOC®** nie jest częścią systemu przytrzymującego wózek inwalidzki i/lub pasażera podczas transportu w pojeździe transportowym dla osób niepełnosprawnych.
- W zakresie odpowiedzialności za produkt ani producent ani dystrybutor nie odpowiadają za ryzyko lub szkody spowodowane przez dzieci pozostające bez nadzoru!

Zastosowanie

1. Aby użyć **PELVI.LOC®** należy umieścić podkładki (a) w obszarze miednicy/zgięciu bioder.



Uwaga: Należy sprawdzić czy pod podkładką nie ma przedmiotów! W ten sposób unika się bolesnych odcisków.

2. Następnie przepuścić opaskę zębatą (b) przez odpowiednią zapadkę. W tym celu należy uruchomić odpowiednią klamrę zapadkową (e).
 3. Następnie naciągać opaskę zębatą (b) do momentu, aż pomiędzy udem a podkładką będzie jeszcze miejsce na włożenie dłoni na płasko.
 4. Upewnić się, czy zapadki (e) współpracują z zębami opaski zębatej!
- Przeprowadzić próbę rozciągania!

Jeśli podczas zakładania **PELVI.LOC®** dojdzie do niezamierzonego poluzowania systemu pozycjonowania, można ponownie napiąć system pozycjonowania.

Aby otworzyć PELVI.LOC® należy uruchomić zapadkę (e) i wyciągnąć opaskę zębatą.

- Upewnić się, czy podkładki nie znajdują się pomiędzy szprychami koła napędowego!

Czyszczenie i dezynfekcja

- Nadaje się do prania w pralce do 40 stopni.
- Możliwa dezynfekcja chemotermiczna poprzez dodanie ELTRA 40 do cyklu prania.
- Nie wirować.
- Nie nadaje się do suszarek.

Konserwacja

PELVI.LOC® należy regularnie sprawdzać pod kątem uszkodzeń i działania.

Naprawy

Uszkodzony **PELVI.LOC®** należy natychmiast wymienić.

Utylizacja

- Opakowanie sprzętu nadaje się do ponownego użytku.
- Części metalowe nadają się do recyklingu złomu.
- Części plastikowe nadają się do recyklingu tworzyw sztucznych.
- Utylizację należy przeprowadzić zgodnie z odpowiednimi krajowymi przepisami.
- Zwrócić się do władz miasta/gminy z zapytaniem o lokalne firmy zajmujące się utylizacją odpadów.

Dane techniczne

	S	M	L
Szerokość siedziska (cm)	26 - 35	36 - 39	40 - 46
Wielkość podkładki (cm)	19 x 7,5	29 x 11	36 x 13,5
Waga (g)	260	300	400
Rozerwanie (przy ok. kg)	60	80	80

Rozmiar opaski zębatej S- M - L	2,4 x 0,2 x 40 cm
---------------------------------	-------------------

Produkt nie
zawiera lateksu



Warunki przechowywania i transportu

	Zakres temperatur w przypadku długotrwałego przechowywania: od -10°C do +40°C. Krótkotrwałe skoki temperatury od -20°C do +60°C, np. podczas transportu, są dobrze tolerowane przez materiał i nie mają wpływu na bezpieczeństwo i wydajność produktu.
	Chronić przed wilgocią podczas przechowywania i transportu

Gwarancja

Udzielamy gwarancji na ten produkt zgodnie z przepisami ustawowymi. Obejmuje ona wady materiałowe i technologiczne. Z gwarancji wyłączone są części eksploatacyjne oraz części/podzespoły podlegające normalnemu zużyciu, a także uszkodzenia wynikające z nadmiernego obciążenia, „zastosowania niezgodnego z przeznaczeniem”, użycia nadmiernej siły lub niedozwolonej modyfikacji/naprawy. W celu skorzystania z gwarancji należy skontaktować się ze sprzedawcą, u którego zakupiono produkt. Ze względu na odpowiedzialność za produkt wszelkie naprawy, konserwacje i prace serwisowe mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowanych sprzedawców przy użyciu oryginalnych części zamiennych.



Producent:

A2J GmbH

Am Fuchsberg 13

D-87452 Altusried

Telefon: +49 (08373) 987269

Faks: +49 (08373) 987276

e-mail: info@a2j-intl.com

Strona internetowa: www.a2j-intl.com

Stan na dzień 01.01.2025



Ten produkt jest zgodny z zasadniczymi
wymogami rozporządzenia UE 2017/745 w
sprawie wyrobów medycznych – Medical Device
Regulation (MDR)

Zastrzega się prawo do wprowadzenia zmian
technicznych