




PELVI.LOC®

Genuframe

PL-GF - XXS - XS - S - M - L - XL

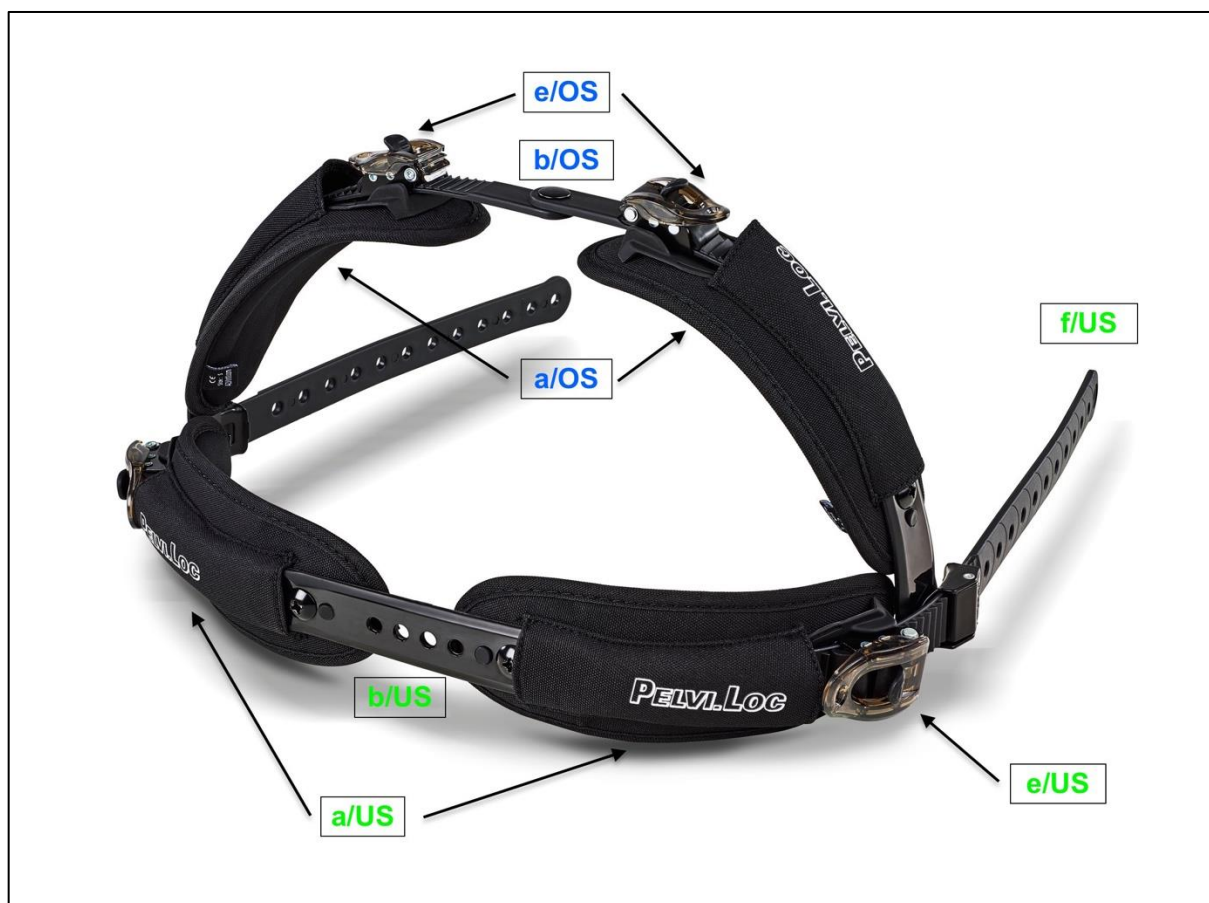

För att säkerställa säker användning av denna produkt, läs och följ denna monterings- och bruksanvisning innan du använder den för första gången



Användningsområde

PELVI.LOC® Genuframe - PL-GF används för personer med begränsad mobilitet, speciellt för bäcken-lårpositionering i rullstolar och aktivrullstolar och förhindrar att de glider framåt.

Avsedd patientgrupp:

- Barn, ungdomar och vuxna
- Kön: män och kvinnor

Mottagningskontroll

Packa upp produkten helt och kontrollera att försändelsen är komplett och inte har transportskador.

Om du mot förmodan upptäcker att försändelsen innehåller ett fel:

1. Reklamera omedelbart hos transportören
2. Registrera skadan/felet
3. Informera oss eller din fackhandlare omedelbart

Leveransomfattning

- 1) 1 x **PELVI.LOC**® Genuframe lårbälte -XXS, -XS, -S, -M, -L, -XL förmonterad
- 2) 1 x **PELVI.LOC**® Genuframe underbensbälte -XXS, -XS, -S, -M, -L, -XL förmonterad
- 3) 1 x information om online-nedladdning av monterings- och bruksanvisningen

Kombination av medicintekniska produkter

Lämplig för hjälpmedel avsedda för användning av ett bäckenindragningsbälte

Montering underbensbälte



Monteringen ska utföras av en person med specialistkunskaper

Monteringen av **PELVI.LOC**® Genuframe underbensbälte sker analogt som för PL-UG

1. Placera dynorna (**a/US**) i underbensområdet (under skenbenet eller vadbenshuvudet). Hål-/kuggremmen (**f/US**) ligger därmed utåt.
 - **PELVI.LOC**® Logotypen på underbensdynan kan därefter läsas framifrån!
2. Justera underbenets dyna via hålremmen (**b/US**).
3. Fäst hålet/kuggremmen(**f/US**) på rullstolens ramrör
4. Spänn sedan hål/kuggremmen (**f/US**) på båda sidor och så långt att det fortfarande finns plats för en hand mellan lår och dyna.
5. Vid behov kan ändarna på kuggremmen kapas till halvrunda längder. Grada vid behov ändarna på den kapade kuggremmen. – Skaderisk!
6. Kontrollera att kuggremmen sitter ordentligt och är låst på båda sidor av hål-/kuggremmen (**f/US**)!

Montering lårbälte

Monteringen av **PELVI.LOC**® Genuframe lårbälte sker analogt som för PL-2DB

7. Placera dynorna (**a/OS**) i lårområdet. – Kuggremmen (**b/OS**) ligger uppåt.
 - **PELVI.LOC**® Logotypen på lårdynan kan därefter läsas ovanifrån!
8. Justera dynans avstånd via kuggremmen (**b/OS**) genom att trycka på spärrhakespännet på lårbältet (**e/OS**).
 - Leden på hålbandet (**b/OS**) ska då befinna sig mittemellan dynorna.
 - Dra ut kuggremmen så långt som möjligt så att två tänder fortfarande är fria bakom varje spärrhakespänne (**e/OS**).



Bruksanvisning



Säkerhetsanvisningar

Trots de stabila konstruktionerna utsätts komponenter som hålbälten, bälten, kuggremmar och dynor för ett visst mått av slitage. Det rekommenderas därför att **PELVI.LOC**® kontrolleras noggrant var tredje månad. Det är också viktigt att se till att nit- och skruvförband sitter fast ordentligt!

- Se innan användning till att produkten är i ett användbart skick och sitter korrekt - olycksrisk!

- Fäst respektive limma inte skadade komponenter som hårem/bälte (f), kuggrem (b) eller dyna (a) och sätt tillbaka dem - olycksrisk!
- Sitt inte på dynorna - risk för tryckpunkter, speciellt från spärrhakespännena (e)!
- Lyft inte rullstolen över **PELVI.LOC®** - Olycksfallsrisk!
- Se till att händerna inte fastnar mellan hålbältet och ram- eller sitsröret - klämrisk!

Användningsrestriktioner / oönskade biverkningar

- Använd inte **PELVI.LOC®** om det finns tryckpunkter, sår eller andra oläkta skador i området kring dynan - skaderisk!
- Använd inte **PELVI.LOC®** vid benskörhet, osteogenesis imperfecta eller svåra cirkulationsproblem - skaderisk!
- Säkerställ efter rengöring att **PELVI.LOC®** fungerar korrekt!
- En skadad **PELVI.LOC®** måste absolut förnyas – Olycksrisk!



Observera:

- **PELVI.LOC®** är inte en del av fasthållningssystemet för rullstolen och/eller passagerare vid transport i ett handikappttransportfordon.
 - Varken producenten eller distributören kan hållas ansvariga vad gäller produktansvar för skador eller risker som orsakats av oövervakade barn i samband med produkten!
1. För att använda **PELVI.LOC®** läggs dynorna (a) mot underbenen

Användning

1. För att använda **PELVI.LOC®** läggs dynorna (a) mot låren och underbenen



Observera: Se till att inga föremål befinner sig under dynan! På så sätt undviker du smärtsamma tryckpunkter.

2. För sedan kuggremmen (**f/US**) genom respektive ögla. För att göra detta, tryck på motsvarande spärrhakespänne (**e/US**).
 3. Spänn sedan kuggremmen (**f/US**) så långt att det fortfarande finns plats för en hand mellan lår och dyna.
 4. Se till att spärrhakespännena (**e/US**) griper in i kuggremmens tänder!
- Gör ett dragprov!

För att öppna **PELVI.LOC®** tryck på spärrhakespännet **e/US** och dra ut kuggremmen.

- Se till att dynorna inte hamnar mellan ekrarna på drivhjulet!

Rengöring och desinfektion

- Lämplig för tvättmaskin upp till 40 grader.
- Kemotermisk desinfektion möjlig genom tillägg av ELTRA 40 i tvättcykeln
- Centrifugera ej
- Inte lämplig för torktummlaren

Underhåll

PELVI.LOC® måste kontrolleras regelbundet avseende skador och funktion.

Reparationer

Byt omedelbart ut defekt **PELVI.LOC®**.

Avfallshantering

- Enhetens förpackning kan återvinnas.
- Metalldelarna kan läggas i metallåtervinningen.
- Plastdelarna kan läggas i plaståtervinningen.
- Avfallshantering måste utföras i enlighet med respektive nationella lagstadgade bestämmelser.
- Fråga din kommun om lokala avfallshanteringsföretag.

Tekniska data


	XXXS	XXS	XS	S	M	L	XL
Sittbredd (cm)		12 - 20	16 - 24	20 - 32	30 - 40	36 - 46	44 - 52
Dynstorlek (cm)		14 x 6	18 x 7	21 x 8	25,5 x 8	26,5 x 8,5	28,5 x 9
Vikt (g)		220	220	220	280	280	280
Brytpunkt (vid ca kg)		40	60	60	80	80	80

Kuggrem strl XXXS - XXS	1,9 x 0,2 x 40 cm	Produkten är latexfri  
Kuggrem strl XS - S	1,9 x 0,2 x 40 cm	
Kuggrem strl M - L - XL	2,4 x 0,2 x 40 cm	
Spärrhakespänne strl XXXS		
Spärrhakespänne strl XXS	B-19-ERGO-BL	
Spärrhakespänne strl XS - S	B-19-ERGO-BL	
Spärrhakespänne strl M - L - XL	B-24-ERGO-BL	



Viktig information: Knäbredd, inte sitsbredd!

Förvarings- och transportvillkor

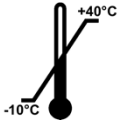	Temperaturintervall vid långtidsförvaring från -10 °C till +40 °C. Kortvariga temperaturtoppar, t.ex. under transport, från -20 °C till +60 °C tolereras väl av materialet och påverkar inte produktens säkerhet och prestanda.
	Skydda mot fukt under förvaring och transport

Garanti

Vi lämnar en garanti för denna produkt i enlighet med lagstadgade regler. Denna omfattar material- och tillverkningsfel. Undantagna är slitdelar och delar/komponenter som utsätts för normalt slitage samt skador som uppstår till följd av överbelastning, "ej avsedd användning", våldsamma skador eller otillåtna ändringar/reparationer. Vid garantianspråk, kontakta den återförsäljare som sålde produkten. Reparationer får endast utföras med originalreservdelar och av personal med lämplig utbildning och/eller erfarenhet.



Tillverkare:

A2J GmbH
Am Fuchsberg 13
D-87452 Altusried
Tfn: +49 (08373) 987269
Fax: +49 (8373) 987276
eMail: info@a2j-intl.com
Internet: www.a2j-intl.com



Denna produkt är kompatibel med de grundläggande kraven i EU-förordning 2017/745 om medicinsk utrustning - Förordningen om medicintekniska produkter (MDR)

Version 01.01.2025

Med reservation för tekniska ändringar