


PELVI.LOC 3DA -XS, -S, -M, -L

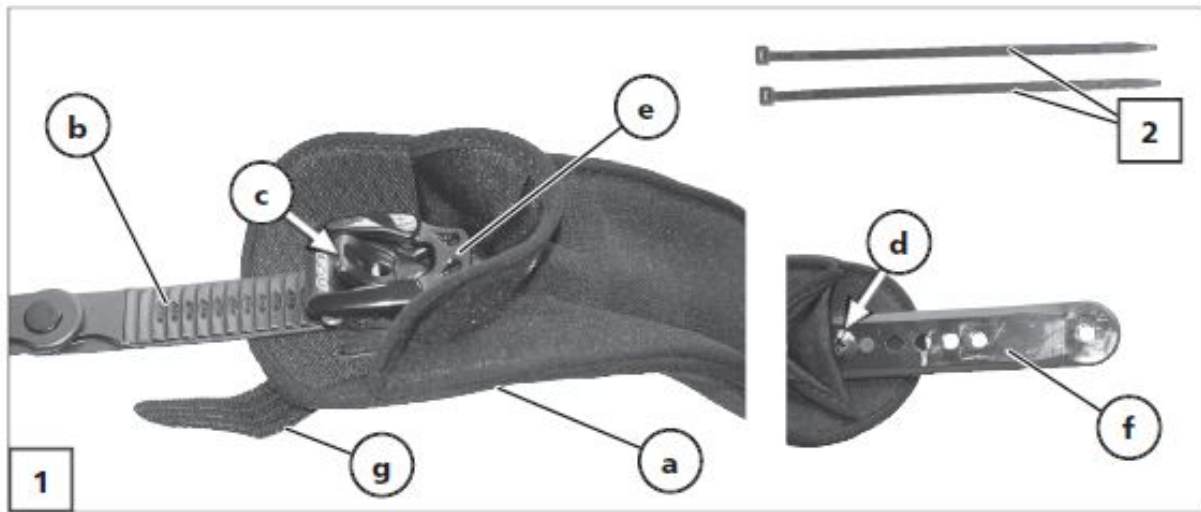

Für den sicheren Gebrauch dieses Produktes lesen und beachten Sie vor dem Erstgebrauch diese Montage-Gebrauchsanleitung

Verwendungszweck

Dieser Pelvi.Loc dient Personen mit eingeschränkter Mobilität speziell zur Becken - Oberschenkel Positionierung und verhindert ein nach vorne rutschen.

Vorgesehene Patientengruppe:

- Jugendliche und Erwachsene
- Geschlecht : weiblich und männlich

Empfangskontrolle

Packen Sie das Produkt komplett aus und prüfen Sie die Sendung auf Vollständigkeit und Transportschäden. Sollten Sie feststellen, dass die Sendung wider Erwarten einen Fehler aufweist, so:

1. Reklamieren Sie unverzüglich beim Frachtführer
2. Lassen Sie den Schaden / Fehler protokollieren
3. Informieren Sie uns oder Ihren Fachhändler unverzüglich

Lieferumfang

- 1) 1 x PELVI.LOC vormontiert
- 2) 2 x Kabelbinder 7,8 mm
- 3) 1 x Montage und Gebrauchsanleitung/ Hinweis

Montage

- Die Montage sollte durch eine Person mit fachlichen Kenntnissen erfolgen
1. Die Polster (a) jeweils im Beckenbereich / Hüftbeugefalte anlegen. – Das Zahnband (b) liegt dabei oben.
 - Das Logo auf dem Polster ist danach von vorn lesbar!
 2. Den Abstand der Polster über das Zahnband (b) durch betätigen der Ratschenschnallen (e) einstellen.
 - Das Gelenk des Zahnbandes sollte sich dann mittig zwischen den Polstern befinden.
 - Das Zahnband max. soweit herausziehen, dass noch zwei Zähne hinter jeder Ratschenschnalle(c) frei sind.
 - Zum Einstellen kann das Klettband (g) gelöst werden und das Polster aufgeschlagen werden (nur bei Gurte mit Abgedeckten Ratschenschnallen zu beachten)
 1. Anschließend den Lochriemen / Gurtband (f) am Rahmenrohr des Rollstuhls befestigen (Montage - Hinweis beachten)
 2. Das Zahnband (b) auf beiden Seiten gleich und soweit spannen, dass noch Platz für eine flache Hand zwischen Oberschenkel und Polster ist.
 3. Bei Bedarf können die Enden des Zahnbandes halbrund abgelängt werden. Die Enden des abgelängten Zahnbands ggf. entgraten. –Verletzungsgefahr!
 4. Den festen Sitz sowie die Arretierung auf beiden Seiten des Zahnbandes prüfen!

Gebrauchsanweisung

Sicherheitshinweise

Trotz der stabilen Bauweisen unterliegen Bauteile wie Lochgurte, Gurtbänder, Zahnband und Polster einem gewissen Verschleiß. Daher wird empfohlen, den PELVI.LOC alle 6 Monate gründlich zu kontrollieren. Hierbei ist auch auf den festen Sitz von Nieten- und Schraubverbindungen zu achten!

- Überzeugen Sie sich vor der Benutzung von dem gebrauchsfähigen Zustand sowie dem korrekten Sitz des Produktes. –Unfallgefahr!
- Beschädigte Bauteile wie Gurtband/Lochriemen (f), Zahnband (b) oder Polster (a) nicht flicken bzw. kleben und wieder einsetzen. –Unfallgefahr!
- Setzen Sie sich nicht auf die Polster –Gefahr von Druckstellen speziell durch die Ratschen (c)!
- Heben Sie den Rollstuhl nicht über den PELVI.LOC an. Unfallgefahr!
- Achten Sie darauf, dass die Hände nicht zwischen Lochgurt und Rahmen- oder Sitzrohr geraten. Quetschgefahr!
- Verwenden Sie den PELVI.LOC nicht wenn sich in dem Bereich der Polster Druckstellen, Wunden oder andere nicht verheilte Verletzungen befinden. –Verletzungsgefahr!
- Verwenden Sie den PELVI.LOC nicht bei Knochenschwund, Glasknochen oder starken Durchblutungsstörungen. – Verletzungsgefahr!
- Nach dem Reinigen die korrekte Funktion des PELVI.LOC sicherstellen!
- Ein beschädigter PELVI.LOC sollte unverzüglich erneuert werden. –Unfallgefahr!

Achtung:

Der PELVI.LOC ist nicht Teil des Rückhaltesystems für den Rollstuhl und/oder Insassen beim Transport in einem Behindertentransportfahrzeug.

- Weder Produzent noch Vertrieb können im Sinne der Produkthaftung für Schäden oder Risiken haftbar gemacht werden, die durch unbeaufsichtigte Kinder im Zusammenhang mit dem Produkt verursacht werden!

Handhabung

1. Zum Gebrauch des PELVI.LOC werden die Polster (a) auf die Oberschenkel gelegt.
Achtung:
Achten Sie darauf, dass sich keine Gegenstände unter dem Polster befinden! So vermeiden Sie schmerzhaftes Druckstellen.
2. Dann das Zahnband (b) durch die jeweilige Ratsche führen. Dazu die entsprechende Ratschenschnalle (e) betätigen.
3. Anschließend das Zahnband (b) soweit spannen, dass noch Platz für eine flache Hand zwischen Oberschenkel und Polster ist.
4. Stellen Sie sicher, dass die Schnapper © in die Zähne des Zahnbands greifen!
 - Zugprobe durchführen!

Zum Öffnen des PELVI.LOC den Schnapper © betätigen und das Zahnband herausziehen.

- Darauf achten, dass die Polster nicht zwischen die Speichen des Antriebrades geraten!

Reinigung und Desinfektion

- Geeignet für die Waschmaschine bis 40 Grad.
- Chemothermische Desinfektion möglich durch Zugabe von ELTRA 40 zum Waschgang
- Nicht schleudern
- Nicht geeignet für den Trockner

Wartung

Der PELVI.LOC ist regelmäßig auf Beschädigung und Funktion zu überprüfen.

Reparaturen

Defekten PELVI.LOC unverzüglich austauschen.

Entsorgung

- Die Geräteverpackung kann der Wertstoffwiederverwendung zugeführt werden.
- Die Metallteile können der Altmetallverwertung zugeführt werden.
- Kunststoffteile können der Kunststoffverwertung zugeführt werden.
- Die Entsorgung muss gemäß den jeweiligen nationalen gesetzlichen Bestimmungen erfolgen.
- Fragen Sie bitte bei der Stadt-/Gemeindeverwaltung nach örtlichen Entsorgungsunternehmen.

Technische Daten

Sitzbreite:	XS	16 bis 24 cm
Polstergröße:	XS	17,5 x 9 cm
Gewicht:	XS	Ca.220 g
Sollbruchstelle:	XS	bei ca. 60 kg

Sitzbreite:	S	20 bis 32 cm
Polstergröße:	S	20 x 11 cm
Gewicht:	S	Ca. 220 g
Sollbruchstelle:	S	bei ca. 60 kg

Sitzbreite:	M	30 bis 40 cm
Polstergröße:	M	23 x 13 cm
Gewicht:	M	Ca. 280 g
Sollbruchstelle:	M	bei ca. 80 kg

Sitzbreite:	L	36 bis 46 cm
Polstergröße:	L	25,5 x 14cm
Gewicht:	L	Ca. 280 g
Sollbruchstelle:	L	bei ca. 80 kg

Zahnband Gr: XS-S	1,9 x 0,2 x 17,0 cm
Zahnband Gr: M-L	2,4 x 0,2 x 17,0 cm

Gewährleistung

Für dieses Produkt übernehmen wir die Gewährleistung, entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen und erstreckt sich auf Material- und Verarbeitungsfehler. Hiervon ausgeschlossen sind Verschleißteile und Teile/Baugruppen, die einer bestimmungsgemäßen Abnutzung unterliegen sowie Schäden, die sich als Folge übermäßiger Beanspruchung, unrichtiger Behandlung, gewaltsamer Beschädigung oder unzulässiger Änderung/Instandsetzung ergeben. Im Gewährleistungsfall wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler, bei dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

Aus Gründen der Produkthaftung dürfen Reparatur-, Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten nur durch autorisierte Fachhändler, unter Verwendung von Original-Ersatzteilen durchgeführt werden.



Hersteller:

A2J GmbH

Am Fuchsberg 13

D-87452 Altusried

Fon: +49 (08373) 987269

Fax: +49 (08373) 987276

eMail: info@a2j-intl.com

Internet: www.a2j-intl.com

Stand 01.01.2017



Dieses Produkt ist konform mit den
Grundlegenden Anforderungen der EG Richtlinie
93/42/EWG für Medizinprodukte

Technische Änderungen vorbehalten