


PELVI.LOC PL-WR -S, -M, -L, -XL

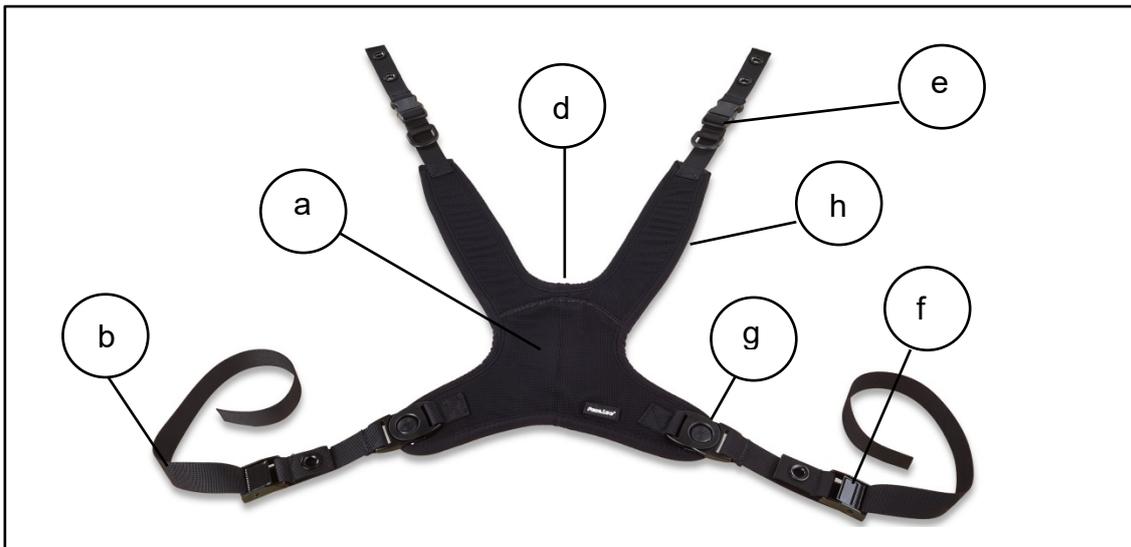

Für den sicheren Gebrauch dieses Produktes lesen und beachten Sie vor dem Erstgebrauch diese Montage-Gebrauchsanleitung

Verwendungszweck

Diese Pelvi.Loc Neopren Weste dient Personen mit eingeschränkter Mobilität speziell zur Oberkörper Positionierung und verhindert ein nach vorne Kippen des Oberkörpers.

Empfangskontrolle

Packen Sie das Produkt komplett aus und prüfen Sie die Sendung auf Vollständigkeit und Transportschäden. Sollten Sie feststellen, dass die Sendung wider Erwarten einen Fehler aufweist, so:

1. Reklamieren Sie unverzüglich beim Frachtführer
2. Lassen Sie den Schaden / Fehler protokollieren
3. Informieren Sie uns oder Ihren Fachhändler unverzüglich

Lieferumfang

- 1) 1 x PELVI.LOC Neopren Weste
- 2) 1 x Montage und Gebrauchsanleitung/ Hinweis

Montage

- Die Montage sollte durch eine Person mit fachlichen Kenntnissen erfolgen
1. Die Weste (a) am Oberkörper anlegen. – Das Gurtband (b) wird am Rollstuhl befestigt.
 - Das Logo auf dem Polster ist danach von vorn lesbar!
 2. Den Abstand der Neopren Weste zum Hals (d) über das Gurtband (b) so einstellen, dass keine Gefahr der Strangulierung besteht.
 - Durch betätigen der Kunststoffschnallen (e) wird die Neopren Weste gestrafft.
 - Die Neopren Weste sollte sich mittig der Ergonomie des Körpers anpassen.
 1. Die Kunststoff Schnalle (g) kann bei Bedarf geöffnet werden (schnelles Abnehmen der Neopren Weste)
 2. Leichtes nachspannen und positionieren der Neopren Weste über die Alu Schnalle (f).
 3. Die Schulter Gurte (h) auf beiden Seiten gleich und soweit spannen, dass noch Platz für eine flache Hand zwischen Hals und Polster ist (Rötungsgefahr der Haut)
 4. Bei Bedarf können die Enden des Gurtbandes (b) ab gelängt werden.

Gebrauchsanweisung

Sicherheitshinweise

Trotz der stabilen Bauweisen unterliegen Bauteile wie Gurtbänder, Schnallen und Polster einem gewissen Verschleiß. Daher wird empfohlen, den PELVI.LOC alle 6 Monate gründlich zu kontrollieren. Hierbei ist auch auf den festen Sitz von Schraubverbindungen zu achten!

- Überzeugen Sie sich vor der Benutzung von dem gebrauchsfähigen Zustand sowie dem korrekten Sitz des Produktes. –Unfallgefahr!
- Beschädigte Bauteile wie Gurtband (b) oder Polster (a) nicht flicken bzw. kleben und wieder einsetzen. –Unfallgefahr!
- Setzen Sie sich nicht auf die Polster –Gefahr von Druckstellen speziell durch die Schnallen
- Heben Sie den Rollstuhl nicht über den PELVI.LOC an. Unfallgefahr!
- Achten Sie darauf, dass die Hände nicht zwischen Gurt und Rahmen- oder Sitzrohr geraten. Quetschgefahr!
- Verwenden Sie den PELVI.LOC nicht wenn sich in dem Bereich der Polster Druckstellen, Wunden oder andere nicht verheilte Verletzungen befinden. –Verletzungsgefahr!
- Verwenden Sie den PELVI.LOC nicht bei Knochenschwund, Glasknochen oder starken Durchblutungsstörungen. – Verletzungsgefahr!
- Nach dem Reinigen die korrekte Funktion des PELVI.LOC sicherstellen!
- Ein beschädigter PELVI.LOC sollte unverzüglich erneuert werden. –Unfallgefahr!

Achtung:

Der PELVI.LOC ist nicht Teil des Rückhaltesystems für den Rollstuhl und/oder Insassen beim Transport in einem Behindertentransportfahrzeug.

- Weder Produzent noch Vertrieb können im Sinne der Produkthaftung für Schäden oder Risiken haftbar gemacht werden, die durch unbeaufsichtigte Kinder im Zusammenhang mit dem Produkt verursacht werden!

Handhabung

1. Zum Gebrauch der PELVI.LOC Neopren Weste werden die Polster (a) auf den Oberkörper gelegt.
Achtung:
Achten Sie darauf, dass sich keine Gegenstände unter dem Polster befinden! So vermeiden Sie schmerzhafteste Druckstellen.
2. Dann die Schnalle (g) schließen. Dazu die entsprechende Schnalle (g) betätigen.
3. Anschließend das Gurtband (b) soweit spannen, dass noch Platz für eine flache Hand zwischen Oberkörper und Polster ist.
4. Achten Sie darauf, dass der Abstand (d) zum Hals groß genug ist, da ansonsten die Gefahr der Strangulation gegeben ist.
5. Die Schulter Gute (h) mit genügend Abstand zum Hals nach hinten an den Rollstuhl führen und mittels der Ösen befestigen.

Zum Öffnen des PELVI.LOC die Schnalle (g) betätigen und die Schnalle (e)

- Darauf achten, dass die Polster nicht zwischen die Speichen des Antriebrades geraten!

Reinigung und Desinfektion

- Geeignet für die Waschmaschine bis 40 Grad.
- Chemothermische Desinfektion möglich durch Zugabe von ELTRA 40 zum Waschgang
- Nicht schleudern
- Nicht geeignet für den Trockner

Wartung

Der PELVI.LOC ist regelmäßig auf Beschädigung und Funktion zu überprüfen.

Reparaturen

Defekten PELVI.LOC unverzüglich austauschen.

Entsorgung

- Die Geräteverpackung kann der Wertstoffwiederverwendung zugeführt werden.
- Die Metallteile können der Altmetallverwertung zugeführt werden.
- Kunststoffteile können der Kunststoffverwertung zugeführt werden.
- Die Entsorgung muss gemäß den jeweiligen nationalen gesetzlichen Bestimmungen erfolgen.
- Fragen Sie bitte bei der Stadt-/Gemeindeverwaltung nach örtlichen Entsorgungsunternehmen.

Technische Daten

Sitzbreite:	XS	16 bis 24 cm
Polstergröße:	XS	18x7 cm
Gewicht:	XS	Ca.220 g
Sollbruchstelle:	XS	bei ca. 60 kg

Sitzbreite:	S	20 bis 32 cm
Polstergröße:	S	21x8 cm
Gewicht:	S	Ca. 220 g
Sollbruchstelle:	S	bei ca. 60 kg

Sitzbreite:	M	30 bis 40 cm
Polstergröße:	M	25,5 x 8 cm
Gewicht:	M	Ca. 280 g
Sollbruchstelle:	M	bei ca. 80 kg

Sitzbreite:	L	36 bis 46 cm
Polstergröße:	L	26,5x8,5 cm
Gewicht:	L	Ca. 280 g
Sollbruchstelle:	L	bei ca. 80 kg

Zahnband Gr: XS-S	1,9 x 0,2 x 40 cm
Zahnband Gr: M-L	2,4 x 0,2 x 40 cm

Gewährleistung

Für dieses Produkt übernehmen wir die Gewährleistung, entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen und erstreckt sich auf Material- und Verarbeitungsfehler. Hiervon ausgeschlossen sind Verschleißteile und Teile/Baugruppen, die einer bestimmungsgemäßen Abnutzung unterliegen sowie Schäden, die sich als Folge übermäßiger Beanspruchung, unrichtiger Behandlung, gewaltsamer Beschädigung oder unzulässiger Änderung/Instandsetzung ergeben. Im Gewährleistungsfall wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler, bei dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

Aus Gründen der Produkthaftung dürfen Reparatur-, Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten nur durch autorisierte Fachhändler, unter Verwendung von Original-Ersatzteilen durchgeführt werden.

Hersteller:

A2J GmbH
Am Fuchsberg 13
D-87452 Altusried
Fon: +49 (08373) 987269
Fax: +49 (08373) 987276

eMail: info@a2j-intl.com
Internet: www.a2j-intl.com



Dieses Produkt ist konform mit den Grundlegenden Anforderungen der EG-Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte