




PELVI.LOC® Pelvi – Contour - siddesystem PL-CSS -S, -M, -L



For sikker brug af dette produkt bedes De læse denne montage- og brugsanvisning, inden det tages i brug første gang.

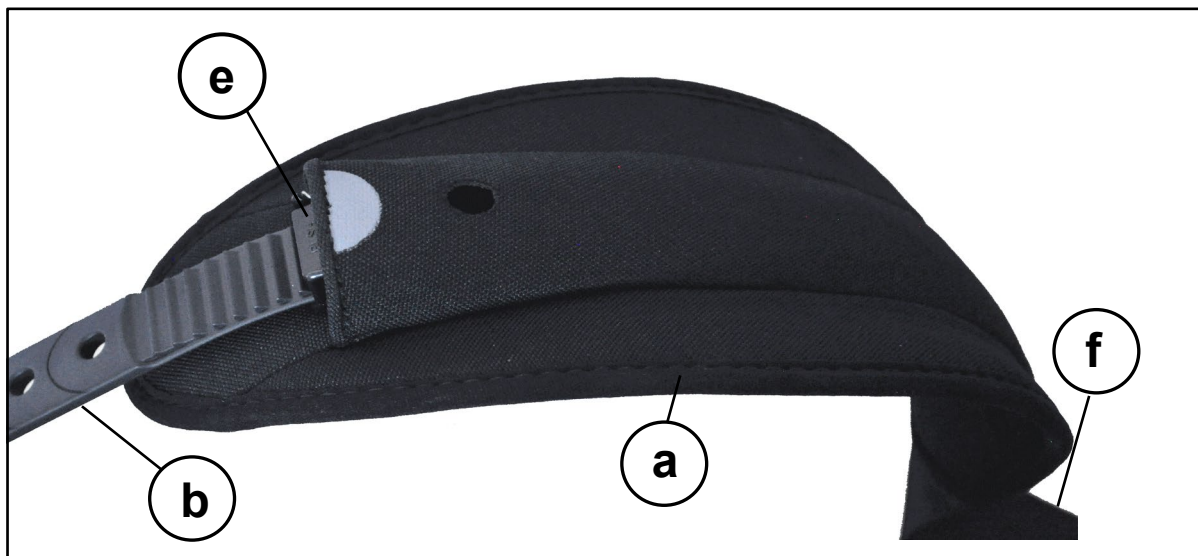

Anvendelsesområde

PELVI.LOC® Pelvi – Contour – siddesystem PL-CSS med positionering og bækkenretraktion for personer med begrænset mobilitet på en siddeflade og forhindrer, at de glider fremad i kørestol, aktivkørestol siddeskål, terapistol, reha-buggy, sportsudstyr.

Påtænkt patientgruppe:

- Børn, unge og voksne
- Køn: kvinder og mænd

Modtagelseskontrol

Pak produktet helt ud og kontroller at forsendelsen er komplet og fri for transportskader. Hvis De konstaterer, at der mod forventning er fejl ved forsendelsen, så, skal:

1. De reklamere med det samme hos fragtmanden
2. lade skaden / fejlen føres til protokol
3. omgående informere os eller Deres faghandler

Leveringsomfang

- 1) 1 x **PELVI.LOC®** PL-CSS -S, -M, -L formonteret
- 2) 1 x informationer om online download af montage- og brugsanvisning

Kombination af medicinsk udstyr

Egnet til hjælpemidler, der er beregnet til brug af en bækkenretraktionssele

Montage



Montagen skal udføres af en person med fagkendskab.

1. Puderne (a) placeres altid i bækkenområdet / hoftefolden / skridtet.
2. Tandremmen (b) fastgøres til kørestolens siderør (Montageanvisninger skal overholdes!)
 - Seleremmen (f) fastgøres individuelt på kørestolens sideflade.
3. Juster afstanden til puderne ved hjælp af tandremmen (b). Ved aktivering af skraldespænderne (e) strammes 3 D selen
4. Tandremmen (b) spændes lige meget på begge sider og så meget, at der stadig er plads til en flad hånd mellem lår og puder.
5. Efter behov kan enderne af tandremmen afkortes halvrundt. Enderne af den afkortede tandrem afgrates i givet fald risiko for tilskadekomst!
6. Kontroller at tandremmen sidder godt fast og låseanordningen på begge sider!



Brugsanvisning



Sikkerhedsadvarsler

Trods den stabile konstruktion er hulremme, tandremme og puder udsat for en vis slitage. Derfor anbefales det at kontrollere **PELVI.LOC®** grundigt hver 3. måned. Her skal man også være opmærksom på, at nitter og skrueforbindelser sidder godt fast!

- Før brug skal man kontrollere, at produktet er i brugsejnet tilstand og sidder korrekt – risiko for uheld!
- Beskadigede komponenter såsom hulrem (f), tandrem b) eller pude (a) må ikke være lappet eller limet og sat i igen - risiko for uheld!
- Sæt dig ikke på polstringen – fare for tryksteder specielt på grund af skraldespændet (erne)!
- Løft ikke kørestolen op over **PELVI.LOC®** risiko for uheld!
- Pas på at hænderne ikke kommer i klemme mellem hulrem og ramme- og sæderør – fare for kvæstelse!

Brugsbegrænsninger / uønskede bivirkninger

- **PELVI.LOC®** må ikke anvendes, hvis der er i pudeområdet er tryksteder, sår eller andre ikke heledede skader – fare for tilskadekomst!
- **PELVI.LOC®** må ikke anvendes ved knoglesvind, glasknogler eller kraftigt nedsat blodgennemstrømning – fare for tilskadekomst!
- Efter rengøring kontrolleres det, at **PELVI.LOC®** fungerer korrekt!
- En beskadiget **PELVI.LOC®** skal omgående fornys – fare for uheld!



Pas på:

- **PELVI.LOC**[®] er ikke en del af tilbageholdelsessystemet for kørestolen og/eller brugere ved transport i et handicapkøretøj.
- Hverken producent eller salgsafdeling kan gøres ansvarlig for skader eller risici, hvad angår produktansvar, som er forårsaget af børn uden opsyn, i sammenhæng med produktet!

Anvendelse

1. Ved brug af **PELVI.LOC**[®] placeres puderne (a) i bækkenområdet/hoftefolden!



Pas på: Vær opmærksom på, at der ikke er nogen genstande under puderne. Sådan undgås smertende tryksteder.

2. Så føres tandremmen (b) gennem den aktuelle skralde. Derved aktiveres det tilhørende skraldespænde (e).
 3. Derefter spændes tandremmen (b) så meget, at der endnu er plads til en flad hånd mellem lår og pude.
 4. Sørg for at, skraldespænderne (c) griber ind i tænderne på tandremmen!
- Udfør en trækprøve!

Hvis der under brugen af **PELVI.LOC**[®] sker en utilsigtet løsning af positioneringssystemet, så kan det udbedres ved at spænde det igen.

For at åbne **PELVI.LOC[®]** aktiveres skraldespændet (c), og tandremmen trækkes ud.

- Pas på at puderne ikke kommer i klemme mellem egerne på drivhjulet!

Rengøring og desinfektion

- Egnede til vaskemaskine op til 40 grader.
- Kemotermisk desinfektion mulig ved tilsætning af ELTRA 40 til vaskeprogrammet
- Må ikke slynges.
- Ikke egnede til tørretumbler

Vedligeholdelse

PELVI.LOC[®] skal kontrolleres regelmæssigt for skader og funktion.

Reparationer

Defekte **PELVI.LOC**[®] skal omgående udskiftes.

Bortskaffelse

- Apparatets emballage kan afleveres til genbrug.
- Metaldele kan afleveres til genbrug.
- Kunststofdele kan afleveres til genbrug af kunststoffer.
- Bortskaffelsen kan ske i henhold til de relevante nationale, lovmæssige bestemmelser.
- Spørg venligst by-/kommuneadministrationen om lokale virksomheder med bortskaffelse



Tekniske data	S	M	L
Sædebredde (cm)	30 - 35	36 - 39	40 - 46
Pudestørrelse (cm)	20 x 7	29 x 11	36 x 14
Siddeflade (cm)	30 x 15	36 x 20	40 x 26

Tandrem str. S - M - L	2,4 x 0,2 x 40 cm
------------------------	-------------------

Produktet er
latexfri



Garanti



Producen:

A2J GmbH
Am Fuchsberg 13
D-87452 Altusried
Fon: +49 (08373) 987269
Fax: +49 (08373) 987276
eMail: info@a2j-intl.com
Internet: www.a2j-intl.com

Opdateret 01.05.2019



Dette produkt er i overensstemmelse med de grundlæggende krav i EF-direktivet 93/42/EØF for medicinske produkter.

Ret til tekniske ændringer forbeholdes.