



PELVI.LOC® PL-3DSRR - XS - S - M - L



Per usare questo prodotto in sicurezza, prima del primo utilizzo leggere e osservare le presenti istruzioni per il montaggio e l'uso



Ambito d'uso

Il **PELVI.LOC®** PL-3DSRR serve alle persone con mobilità ridotta, specificatamente per il posizionamento del bacino nella sedia a rotelle e nella sedia a rotelle attiva, e impedisce di scivolare in avanti.

Gruppi di pazienti target:

- Bambini, giovani e adulti
- Sesso: femminile e maschile

Controllo fornitura

Disimballare completamente il prodotto e verificare l'integrità dell'oggetto di fornitura e la presenza di danni di trasporto. Qualora si dovesse riscontrare inaspettatamente un difetto, procedere come segue:

1. presentare tempestivamente un reclamo allo spedizioniere
2. far protocollare il danno / difetto
3. informare tempestivamente noi o il proprio rivenditore specializzato

Oggetto di fornitura

- 1) 1 x **PELVI.LOC®** PL-3DSRR -XS, -S, -M, -L non premontato
- 2) 1 x informazioni per il download elettronico delle istruzioni per il montaggio e l'uso

Montaggio



Il montaggio deve essere eseguito da una persona dotata delle necessarie competenze tecniche

1. Disporre ciascun cuscinetto (a) rispettivamente nell'area del bacino e dell'articolazione dell'anca. – La fibbia a cricchetto (e) viene fissata al tubo del telaio della sedia a rotelle. (Fare riferimento alle istruzioni di montaggio)
2. La cinghia dentata (b) viene introdotta nella fibbia o nella fibbia a cricchetto (e) fissata alla sedia a rotelle.
 - Il logo sul cuscinetto sarà dunque visibile da davanti!
3. Impostare la distanza dei cuscinetti sopra le cinghie forate (d). La cintura di ritenuta del bacino viene tesa azionando le fibbie a cricchetto (e).
 - La giuntura della cinghia forata deve trovarsi al centro tra i due cuscinetti.
 - Estrarre la cinghia dentata massimo fino ad avere due denti liberi dietro alla fibbia a cricchetto (e).
 - Per la regolazione è possibile togliere la chiusura a strappo (g) e aprire il cuscinetto (pertinente solo per le cinture con le fibbie a cricchetto coperte)
4. Fissare successivamente la cinghia dentata (b) al tubo del telaio della sedia a rotelle
5. Tendere la cinghia dentata (b) su entrambi i lati in modo uguale e in modo che resti lo spazio sufficiente per una mano aperta tra la coscia e il cuscinetto.
6. Se necessario, è possibile tagliare a emiciclo le estremità della cinghia dentata. Eventualmente sbavare le estremità della cinghia dentata tagliata. –Pericolo di lesioni!
7. Verificare che la cinghia dentata sia ben salda e bloccata su entrambi i lati!



Istruzioni per l'uso



Indicazioni di sicurezza

Nonostante le strutture siano solide, componenti come cinture forate, bretelle, cinghie dentate e cuscinetti sono soggetti ad usura. Si consiglia pertanto di controllare accuratamente **PELVI.LOC®** ogni 3 mesi. Verificare in tale occasione anche che le cuciture e i collegamenti a vite siano ben saldi!

- Assicurarsi prima dell'utilizzo che il prodotto sia in condizioni idonee all'utilizzo e che sia posizionato correttamente – pericolo di incidente!
- I componenti danneggiati come cinghie forate/bretelle (d), cinghie dentate (b) o cuscinetti (a) non devono essere riparati o incollati e poi riutilizzati –pericolo di incidente!
- Non sedersi sui cuscinetti – pericolo per i punti di pressione, in particolare quelli dovuti ai cricchetti (e)!
- Non sollevare la sedia a rotelle dal **PELVI.LOC®** - pericolo di incidente!
- Fare attenzione a non mettere le mani tra la cintura forata e il tubo del telaio - o della seduta - pericolo di schiacciamento!

Restrizioni sull'uso / effetti collaterali indesiderati

- Non utilizzare il **PELVI.LOC®** se nell'area dei punti di contatto dei cuscinetti sono presenti ferite o altre lesioni non guarite – pericolo di lesioni!

- Non utilizzare il **PELVI.LOC®** in presenza di osteoporosi, osteogenesi imperfetta o forti disturbi alla circolazione sanguigna – pericolo di lesioni!
- Dopo la pulizia, verificare che il **PELVI.LOC®** funzioni correttamente!
- Riparare tempestivamente il **PELVI.LOC®** qualora fosse danneggiato –pericolo di incidente!



Attenzione:

- il **PELVI.LOC®** non è parte del sistema di supporto dello schienale della sedia a rotella e/o della persona durante il trasporto in un veicolo di trasporto per disabili.
- Nell'ambito della garanzia del prodotto, il produttore e il distributore respingono ogni responsabilità per danni o rischi relativi al prodotto, causati da bambini non supervisionati!

Utilizzo

1. Per utilizzare il **PELVI.LOC®** posizionare i cuscinetti (a) sopra l'area dell'articolazione delle anche



Attenzione: verificare che sotto i cuscinetti non si trovi alcun oggetto! In questo modo si evitano punti di pressione dolorosi.

2. **Importante:** non appoggiare sul bacino o sulla spina!
 3. Dopodiché, condurre la cinghia dentata (b) attraverso il rispettivo cricchetto. Azionare contemporaneamente la fibbia a cricchetto (e) corrispondente.
 4. Successivamente, tendere la cinghia dentata (b) in modo che resti lo spazio per una mano aperta tra la coscia e il cuscinetto.
 5. Verificare che i giunti a scatto della fibbia a cricchetto (e) si aggancino ai denti della cinghia dentata!
- Eseguire una prova di tensione!

Se durante l'uso del **PELVI.LOC®** si verifica un allentamento involontario del sistema di posizionamento, è possibile rimediare a ciò tendendo nuovamente le cinghie.

Per aprire il PELVI.LOC® azionare il giunto a scatto della fibbia a cricchetto (e) ed estrarre la cinghia dentata.

- Fare attenzione a non far finire i cuscinetti negli interstizi della ruota motrice!

Pulizia e disinfezione

- Lavabile in lavatrice fino a 40 gradi.
- Disinfezione chemioterica possibile mediante l'aggiunta di ELTRA 40 al ciclo di lavaggio
- Non centrifugare
- Non idoneo per l'asciugatrice

Manutenzione

Controllare periodicamente la presenza di danni sul **PELVI.LOC®** e il suo corretto funzionamento.

Riparazioni



Sostituire tempestivamente il **PELVI.LOC®** se è difettoso.

Smaltimento

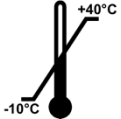

- Smaltire l'imballaggio del dispositivo nella raccolta differenziata.
- Smaltire le parti metalliche nei rifiuti metallici.
- Smaltire le parti in plastica nella raccolta della plastica.
- Smaltire i rifiuti ai sensi della normativa nazionale vigente.
- Chiedere alle amministrazioni cittadine e comunali informazioni in merito ai servizi di smaltimento locali.

Dati tecnici

	XXXS	XXS	XS	S	M	L	XL
Larghezza seduta (cm)		12 - 20	16 - 24	20 - 32	30 - 40	36 - 46	
Dimensione cuscinetti (cm)		14 x 6	18 x 7	21 x 8	25,5 x 8	26,5 x 8,5	
Peso (g)		220	220	220	280	280	
Punto di rottura target (per circa kg)		40	60	60	80	80	

Cinghia dentata gr. XXXS- XXS		<p>Prodotto privo di latex</p>  
Cinghia dentata gr. XS - S	1,9 x 0,2 x 40 cm	
Cinghia dentata gr. M- L- XL	2,4 x 0,2 x 40 cm	
Fibbia a cricchetto gr. XXXS		
Fibbia a cricchetto gr. XXS		
Fibbia a cricchetto gr. XS - S	B-19-ERGO-BL	
Fibbia a cricchetto gr. M- L- XL	B-24-ERGO-BL	

Condizioni di stoccaggio e trasporto

	<p>L'intervallo di temperatura per lo stoccaggio a lungo termine è compreso tra -10°C e +40°C.</p> <p>I picchi di temperatura a breve termine, ad esempio durante il trasporto, da -20°C a +60°C, sono ben tollerati dal materiale e non hanno alcun effetto sulla sicurezza e sulle prestazioni del prodotto.</p>
	<p>Proteggere dall'umidità durante lo stoccaggio e il trasporto</p>

Garanzia

Per il presente prodotto forniamo una garanzia in conformità alle disposizioni giuridiche. Questa copre difetti del materiale e della lavorazione. Sono escluse dalla garanzia le parti soggette ad usura e le parti/i gruppi soggette/i a normale consumo, così come i danni causati da una sovrastimolazione, da “uso non conforme”, danneggiamento volontario o modifiche/riparazioni non conformi. In caso di richieste di risarcimento rivolgersi al proprio rivenditore specializzato da cui è stato acquistato il prodotto. Ai fini della garanzia, i lavori di riparazione, manutenzione ordinaria e straordinaria devono essere svolta dai rivenditori specializzati autorizzati, mediante l'uso di pezzi di ricambio originali



Produttore:

A2J GmbH

Am Fuchsberg 13

D-87452 Altusried

Fon: +49 (08373) 987269

Fax: +49 (08373) 987276

eMail: info@a2j-intl.com

Internet: www.a2j-intl.com

Versione 01.01.2025



Questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali del Regolamento UE 2017/745 sui dispositivi medici - Regolamento sui dispositivi medici (MDR).

Il produttore si riserva il diritto di apporre modifiche tecniche