




PELVI.LOC® Sistema di seduta anatomica per bacino PL-CSS -S, -M, -L



Per usare questo prodotto in sicurezza, prima del primo utilizzo leggere e osservare le presenti istruzioni per il montaggio e l'uso

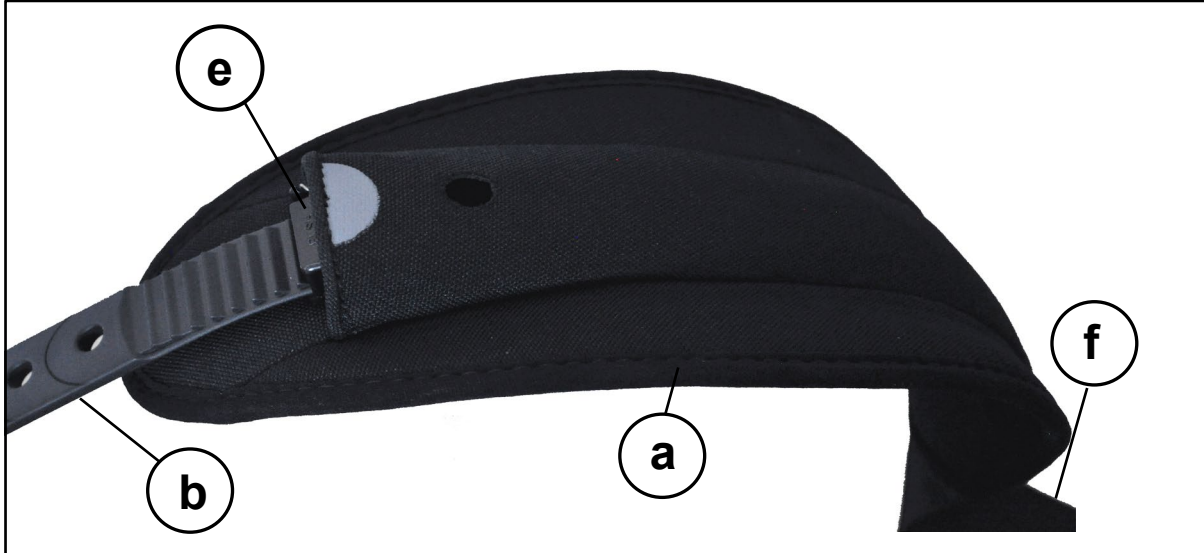

Ambito d'uso

Il sistema di seduta anatomico per bacino PL-CSS **PELVI.LOC®** serve per il posizionamento e la ritenuta del bacino per le persone con mobilità ridotta su una sedia, per es. sedia a rotelle per doccia, lettino spiaggia, sedia a rotelle, piano di un sedile, sedia terapeutica, passeggini posturali, attrezzo sportivo ed impedisce di scivolare in avanti.

Gruppi di pazienti target:

- Bambini, giovani e adulti
- Sesso: femminile e maschile

Controllo fornitura

Disimballare completamente il prodotto e verificare l'integrità dell'oggetto di fornitura e la presenza di danni di trasporto. Qualora si dovesse riscontrare inaspettatamente un difetto, procedere come segue:

1. presentare tempestivamente un reclamo allo spedizioniere
2. far protocollare il danno / difetto
3. informare tempestivamente noi o il proprio rivenditore specializzato

Oggetto di fornitura

- 1) 1 x **PELVI.LOC®** PL-CSS -S, -M, -L premontato
- 2) 1 x informazioni per il download elettronico delle istruzioni per il montaggio e l'uso

Combinazione di dispositivi medici

Adatto per ausili predisposti per l'uso di una cintura di ritenuta del bacino

Montaggio



Il montaggio deve essere eseguito da una persona dotata delle necessarie competenze tecniche

1. Disporre ciascun cuscinetto (a) rispettivamente nell'area del bacino e dell'articolazione dell'anca e del cavallo.
2. Fissare la cinghia dentata (b) al tubo della seduta della sedia a rotelle (Fare riferimento alle istruzioni di montaggio!)
 - Le bretelle (f) vengono fissate individualmente sulla seduta della sedia a rotelle
3. Impostare la distanza dei cuscinetti sopra la cinghia forata (b). La cintura 3 D viene stretta azionando le fibbie a pressione (e).
4. Tendere la cinghia dentata (b) su entrambi i lati in modo che resti lo spazio sufficiente per una mano aperta tra la coscia e il cuscinetto.
5. Se necessario, è possibile tagliare a emiciclo le estremità della cinghia dentata. Eventualmente sbavare le estremità della cinghia dentata tagliata. –Pericolo di lesioni!
6. Verificare che la cinghia dentata sia ben salda e bloccata su entrambi i lati!



Istruzioni per l'uso



Indicazioni di sicurezza

Nonostante le strutture siano solide, componenti come cinture forate, bretelle, cinghie dentate e cuscinetti sono soggetti ad usura. Si consiglia pertanto di controllare accuratamente **PELVI.LOC**[®] ogni 3 mesi. Verificare in tale occasione anche che le cuciture e i collegamenti a vite siano ben saldi!

- Assicurarsi prima dell'utilizzo che il prodotto sia in condizioni idonee all'utilizzo e che sia posizionato correttamente – pericolo di incidente!
- I componenti danneggiati come cinghie forate/bretelle (f), cinghie dentate (b) o cuscinetti (a) non devono essere riparati o incollati e poi riutilizzati –pericolo di incidente!
- Non sedersi sui cuscinetti – pericolo per i punti di pressione, in particolare quelli dovuti alle fibbie a pressione (e)!
- Non sollevare la sedia a rotelle dal **PELVI.LOC**[®] - pericolo di incidente!
- Fare attenzione a non mettere le mani tra la cintura forata e il tubo del telaio - o della seduta - pericolo di schiacciamento!

Restrizioni sull'uso / effetti collaterali indesiderati

- Non utilizzare il **PELVI.LOC**[®] se nell'area dei punti di contatto dei cuscinetti sono presenti ferite o altre lesioni non guarite – pericolo di lesioni!
- Non utilizzare il **PELVI.LOC**[®] in presenza di osteoporosi, osteogenesi imperfetta o forti disturbi alla circolazione sanguigna – pericolo di lesioni!

- Dopo la pulizia, verificare che il **PELVI.LOC**[®] funzioni correttamente!
- Riparare tempestivamente il **PELVI.LOC**[®] qualora fosse danneggiato –pericolo di incidente!



Attenzione:

- il **PELVI.LOC**[®] non è parte del sistema di supporto dello schienale della sedia a rotella e/o della persona durante il trasporto in un veicolo di trasporto per disabili.
- Nell'ambito della garanzia del prodotto, il produttore e il distributore respingono ogni responsabilità per danni o rischi relativi al prodotto, causati da bambini non supervisionati!

Utilizzo

1. Per utilizzare il **PELVI.LOC**[®] posizionare i cuscinetti (a) sopra l'area del bacino/articolazione delle anche



Attenzione: verificare che sotto i cuscinetti non si trovi alcun oggetto! In questo modo si evitano punti di pressione dolorosi.

2. Dopodiché, condurre la cinghia dentata (b) attraverso il rispettivo cricchetto. Azionare contemporaneamente la fibbia a cricchetto (e) corrispondente.
 3. Successivamente, tendere la cinghia dentata (b) in modo che resti lo spazio per una mano aperta tra la coscia e il cuscinetto.
 4. Verificare che le fibbie a pressione (e) si aggancino ai denti della cinghia dentata!
- Eseguire una prova di tensione!

Se durante l'uso del **PELVI.LOC**[®] si verifica un allentamento involontario del sistema di posizionamento, è possibile rimediare a ciò tendendo nuovamente le cinghie.

Per aprire il **PELVI.LOC[®]** azionare la fibbia a pressione (e/US) ed estrarre la cinghia dentata.

- Fare attenzione a non far finire i cuscinetti negli interstizi della ruota motrice!

Pulizia e disinfezione

- Lavabile in lavatrice fino a 40 gradi.
- Disinfezione chemioterica possibile mediante l'aggiunta di ELTRA 40 al ciclo di lavaggio
- Non centrifugare
- Non idoneo per l'asciugatrice

Manutenzione

Controllare periodicamente la presenza di danni sul **PELVI.LOC**[®] e il suo corretto funzionamento.

Riparazioni

Sostituire tempestivamente il **PELVI.LOC**[®] se è difettoso.

Smaltimento

- Smaltire l'imballaggio del dispositivo nella raccolta differenziata.
- Smaltire le parti metalliche nei rifiuti metallici.
- Smaltire le parti in plastica nella raccolta della plastica.
- Smaltire i rifiuti ai sensi della normativa nazionale vigente.
- Chiedere alle amministrazioni cittadine e comunali informazioni in merito ai servizi di smaltimento locali.



Dati tecnici

	S	M	L
Larghezza seduta (cm)	30 - 35	36 - 39	40 - 46
Dimensione cuscinetti (cm)	20 x 7	29 x 11	36 x 14
Seduta (cm)	30 x 15	36 x 20	40 x 26

Cinghia dentata gr. S - M- L	2,4 x 0,2 x 40 cm
-------------------------------------	-------------------

Prodotto
privo di latex



Garanzia

Per il presente prodotto forniamo una garanzia in conformità alle disposizioni giuridiche. Questa copre difetti del materiale e della lavorazione. Sono escluse dalla garanzia le parti soggette ad usura e le parti/i gruppi soggette/i a normale consumo, così come i danni causati da una sovrasollecitazione, da "uso non conforme", danneggiamento volontario o modifiche/riparazioni non conformi. In caso di richieste di risarcimento rivolgersi al proprio rivenditore specializzato da cui è stato acquistato il prodotto. Ai fini della garanzia, i lavori di riparazione, manutenzione ordinaria e straordinaria devono essere svolta dai rivenditori specializzati autorizzati, mediante l'uso di pezzi di ricambio originali



Produttore:

A2J GmbH
Am Fuchsberg 13
D-87452 Altusried
Telefono: +49 (08373) 987269
Fax: +49 (08373) 987276



Il presente prodotto è conforme ai requisiti base della direttiva CE 93/42/CEE per dispositivi medici

e-mail: info@a2j-intl.com
Internet: www.a2j-intl.com

Versione 01/05/2019

Il produttore si riserva il diritto di apporre
modifiche tecniche