




## **PELVI.LOC® PL-3DB - XS, -S, -M, -L, -XL**



For sikker bruk av dette produktet, vennligst les og følg denne monterings- og bruksanvisningen før første bruk

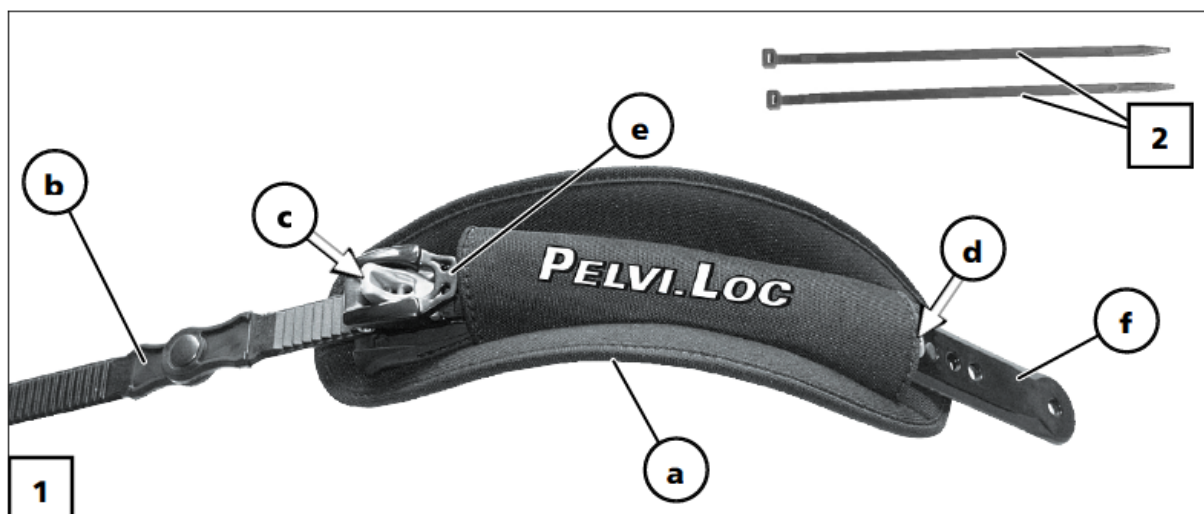

### **Bruksområde**

**PELVI.LOC®** PL-3DB er til bruk av mennesker med nedsatt bevegelighet, spesielt for bekkenplassering i rullestoler og aktivitetsrullestoler og forhindrer at brukeren glir fremover.

### **Beregnet pasientgruppe:**

- Barn, ungdom og voksne
- Kjønn: kvinner og menn

### **Mottakskontroll**

Pakk ut produktet helt og kontroller at forsendelsen er fullstendig og uten transportskader. Hvis du opplever at forsendelsen har en uventet feil, så:

1. Klag straks til transportøren
2. Få registrert skaden / feilen
3. Informer oss eller forhandleren din umiddelbart

### **Leveringsomfang**

- 1) 1 x **PELVI.LOC®** PL-3DB -XS, -S, -M, -L, -XL forhåndsmontert
- 2) 2 x Kabelfeste 7,8 mm
- 3) 1 x Informasjon for online nedlasting av monterings- og bruksanvisningen

### **Kombinasjon av medisinsk utstyr**

Egnet som hjelpemiddel ved bruk av et bekkenbelte

## Montering



Monteringen må utføres av en person med spesialkunnskap

1. Plasser polsteret (a) henholdsvis på bekkenområdet/hoftebøyen, med tannbeltet (b) vendt oppover.
  - Logoen på polsteret kan dermed leses forfra.
2. Still inn avstanden til polsteret via tannbeltet (b) ved å bruke skrallespennene (e).
  - Hengslet på det perforerte beltet skal så legges midt mellom polstrene.
  - Trekk ut tannbeltet maksimalt så langt at to tenner bak hver av skrallespennene (c) er frie.
  - Borrelåsen (g) kan frigjøres og polstringen åpnes ved regulering (følges bare ved belter med dekkede sperrespennere)
3. Så festes hullstroppen/stroppene (f) til rammerøret på rullestolen
4. Så strammes tannbåndet (b) på begge sider så mye at det fremdeles er nok plass til å legge en håndflate mellom låret og polsteret.
5. Om nødvendig kan endene av tannbeltet avrundes. Puss endene av det kuttete tannbeltet om nødvendig. – Fare for personskade.
6. Kontroller at festet sitter godt og er låst på begge sider av tannbeltet.



## Bruksanvisning



## Sikkerhetsanvisninger

Til tross for den stabile konstruksjonen, er komponenter som låsebelter, tannbelter og polster utsatt for en viss mengde slitasje. Derfor anbefales det å gjennomføre en grundig inspeksjon av **PELVI.LOC®** hver 3. måned. Forsikre deg også om at nagle- og skrueforbindelsene er sikre!

- Du må kontrollere at produktet er i brukbar stand og har riktig passform før bruk - fare for ulykke!
- Ikke lapp eller lim ødelagte deler som låsestropper/sikkerhetsbelter (f) tannbelter (b) eller polstre (a), for så å bruke dem igjen – fare for ulykke.
- Ikke sitt på polsteret – Fare for trykkpunkter spesielt på grunn av sperrene (c).
- Ikke løft rullestolen over **PELVI.LOC®**. Fare for ulykke.
- Forsikre deg om at hendene ikke kommer mellom det tannbeltet og rammen eller seterøret - fare for klemskader!

## Begrensninger i bruk / uønskede bivirkninger

- Ikke bruk **PELVI.LOC®** hvis det er bloduttredelser, sår eller andre skader som ikke er grodd i området til polsteret – fare for personskader.
- Ikke bruk **PELVI.LOC®** i tilfelle beintap, beinskjørhet eller alvorlige sirkulasjonsforstyrrelser - fare for personskade.
- Etter rengjøring må det påses at **PELVI.LOC®** virker som den skal.
- En skadet **PELVI.LOC®** bør skiftes ut umiddelbart – fare for ulykke.

**Advarsel:**

- **PELVI.LOC**® er ikke en del av sikkerhetssystemet for rullestolen og/eller brukeren ved transport av personer med nedsatt funksjonsevne i et kjøretøy.
- Når det gjelder produktansvar, kan verken produsenten eller distributøren holdes ansvarlig for skader eller risiko i tilknytning til barn uten tilsyn i forbindelse med produktet.

**Bruk**

1. For å bruke **PELVI.LOC**® legges polsteret (a) på bekkenområdet/hofteleddet.



**Advarsel:** Forsikre deg om at det ikke er gjenstander under polsteret! På den måten unngår du smertefulle trykksteder.

2. Før så tannbeltet (b) gjennom den respektive sperren. For å gjøre dette, bruk den tilhørende skrallespennen (e).
  3. Så strammes tannbåndet (b) så mye at det fremdeles er nok plass til å legge en håndflate mellom låret og polsteret.
  4. Forsikre deg om at spennene (c) griper inn i tennene på tannbeltet.
- Gjennomfør en strekkprøve.

Hvis posisjoneringssystemet løsner utilsiktet mens du bruker **PELVI.LOC**®, kan dette avhjelpes ved å stramme spennen på nytt.

**For å åpne **PELVI.LOC**®** trykk på spennen (c) og trekk ut tannbeltet.

- Pass på at polstrene ikke kommer inn mellom eikene på drivhjulet.

**Rengjøring og desinfisering**

- Kan vaskes i maskin ved 40 grader.
- Kjemotermisk desinfisering mulig ved å tilsette ELTRA 40 til vaskesyklusen
- Ingen sentrifugering
- Egner seg ikke i tørketrommelen

**Vedlikehold**

**PELVI.LOC**® må regelmessig sjekkes for skader og funksjonalitet.

**Reparasjon**

Defekt **PELVI.LOC**® må skiftes ut omgående.

## Avfallsbehandling

- Emballasjen til enheten kan gjenvinnes.
- Metalldelene kan kastes i metallavfall, og er gjenvinnbare.
- Plastmaterialene er gjenvinnbare.
- Avfallshåndteringen må skje i henhold til respektive forskrifter på stedet.
- Spør lokalt / kommunen om lokale avfallsselskaper.



## Tekniske data

	<b>XS</b>	<b>S</b>	<b>M</b>	<b>L</b>	<b>XL</b>
<b>Setebredde (cm)</b>	16 – 24	20 – 32	30 – 40	36 – 46	40 – 48
<b>Polstringsstørrelse (cm)</b>	18 x 7	21 x 8	25,5 x 8	26,5 x 8,5	28,5 x 9
<b>Vekt (g)</b>	220	220	280	280	280
<b>Forutbestemt bruddpunkt (ca. kg)</b>	60	60	80	80	80

<b>Størrelse tannbånd XS - S</b>	1,9 x 0,2 x 17,0 cm
<b>Størrelse tannbånd M - XL</b>	2,4 x 0,2 x 17,0 cm

Produktet er  
lateksfritt



## Garanti

Vi aksepterer garantien for dette produktet i samsvar med gjeldende lovbestemmelser. Den gjelder materiale og produksjonsfeil. Utelukket fra dette er slitasjedeler og deler / delegrupper som er utsatt for normal slitasje, samt skader som skyldes overdreven bruk, "feil bruk", voldelig skade eller uautorisert modifisering / reparasjon. Ved garantikrav, kontakt spesialistforhandleren du kjøpte dette produktet fra. Av hensyn til produktansvar, må reparasjon, vedlikehold og reparasjonsarbeid kun utføres av autoriserte spesialforhandlere som bruker originale reservedeler



### Produsent:

A2J GmbH  
Am Fuchsberg 13  
D-87452 Altusried  
Tlf.: +49 (08373) 987269  
Faks: +49 (08373) 987276  
e-post: info@a2j-intl.com  
Internett: [www.a2j-intl.com](http://www.a2j-intl.com)



Dette produktet er i samsvar med de grunnleggende bestemmelsene i EUs forskrift 93/42/EU om medisinske produkter.

Versjon 01.10.2019

Tekniske endringer forbeholdes