




PELVI.LOC® Pelvi – Contour - Sitzsystem PL-CSS -S, -M, -L



Für die sichere Anwendung dieses Produktes lesen und beachten Sie bitte vor dem Erstgebrauch diese Montage- und Gebrauchsanweisung

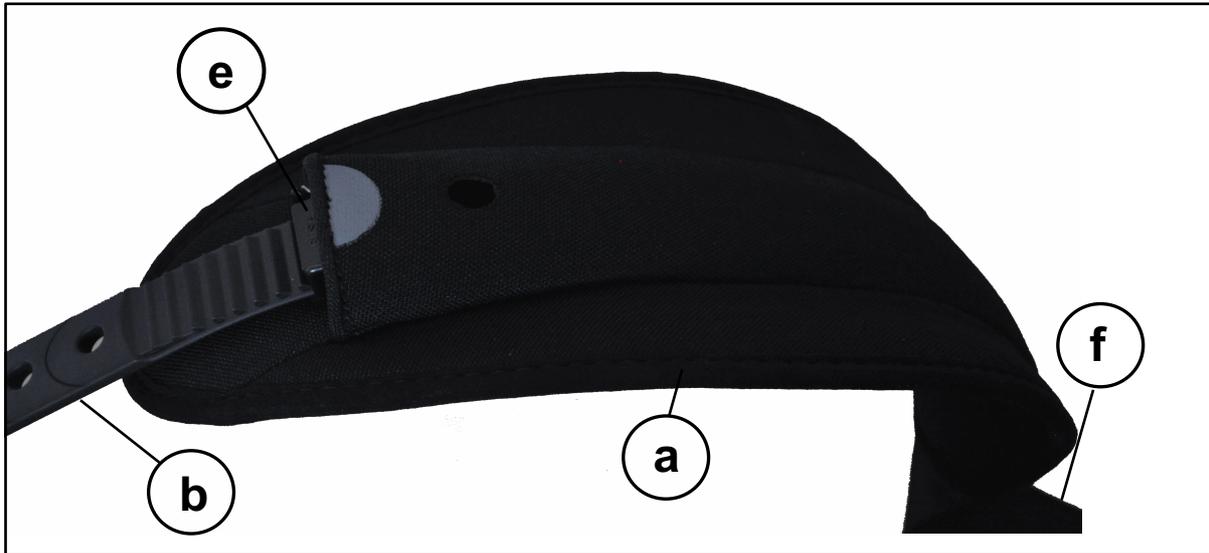

Anwendungsbereich

Das **PELVI.LOC®** Pelvi – Contour – Sitzsystem PL-CSS dient zur Positionierung und Beckenretraktion für Personen mit eingeschränkter Mobilität auf einer Sitzfläche und verhindert ein nach vorne rutschen im Rollstuhl, Aktiv-Rollstuhl, Sitzschale, Therapiestuhl, Reha Buggy, Sportgerät.

Vorgesehene Patientengruppe:

- Kinder, Jugendliche und Erwachsene
- Geschlecht : weiblich und männlich

Empfangskontrolle

Packen Sie das Produkt komplett aus und prüfen Sie die Sendung auf Vollständigkeit und Transportschäden. Sollten Sie feststellen, dass die Sendung wider Erwarten einen Fehler aufweist, so:

1. Reklamieren Sie unverzüglich beim Frachtführer
2. Lassen Sie den Schaden / Fehler protokollieren
3. Informieren Sie uns oder Ihren Fachhändler unverzüglich

Lieferumfang

- 1) 1 x **PELVI.LOC®** PL-CSS -S, -M, -L vormontiert
- 2) 1 x Informationen zum online Download der Montage- und Gebrauchsanweisung

Kombination von Medizinprodukten

Geeignet für Hilfsmittel die für den Einsatz eines Beckenretraktionsgurtes vorgesehen sind

Montage



Die Montage sollte durch eine Person mit fachlichen Kenntnissen erfolgen

1. Die Polster (a) jeweils im Beckenbereich / Hüftbeugefalte / Schritt anlegen.
2. Das Zahnband (b) am Sitzrohr des Rollstuhls befestigen (Montage Hinweise beachten!)
 - Das Gurtband (f) wird individuell auf der Sitzfläche des Rollstuhls befestigt
3. Den Abstand der Polster über das Zahnband (b) einstellen. Durch betätigen der Druckschnallen (e) wird der 3 D Gurt gestrafft.
4. Das Zahnband (b) auf beiden Seiten soweit spannen, dass noch Platz für eine flache Hand zwischen Oberschenkel und Polster ist.
5. Bei Bedarf können die Enden des Zahnbands halbrund abgelängt werden. Die Enden des abgelängten Zahnbands ggf. entgraten. –Verletzungsgefahr!
6. Den festen Sitz sowie die Arretierung auf beiden Seiten des Zahnbands prüfen!



Gebrauchsanweisung



Sicherheitshinweise

Trotz der stabilen Bauweisen unterliegen Bauteile wie Lochgurte, Gurtbänder, Zahnbänder und Polster einem gewissen Verschleiß. Daher wird empfohlen, den **PELVI.LOC®** alle 3 Monate gründlich zu kontrollieren. Hierbei ist auch auf den festen Sitz von Nieten- und Schraubverbindungen zu achten!

- Überzeugen Sie sich vor der Benutzung von dem gebrauchstauglichen Zustand sowie dem korrekten Sitz des Produktes – Unfallgefahr!
- Beschädigte Bauteile wie Lochriemen/Gurtband (f), Zahnband (b) oder Polster (a) nicht flicken bzw. kleben und wieder einsetzen – Unfallgefahr!
- Setzen Sie sich nicht auf die Polster – Gefahr von Druckstellen speziell durch die Druckschnallen (e)!
- Heben Sie den Rollstuhl nicht über den **PELVI.LOC®** an - Unfallgefahr!
- Achten Sie darauf, dass die Hände nicht zwischen Lochgurt und Rahmen- oder Sitzrohr geraten - Quetschgefahr!

Anwendungsbeschränkungen / unerwünschte Nebenwirkungen

- Verwenden Sie den **PELVI.LOC®** nicht, wenn sich in dem Bereich der Polster Druckstellen, Wunden oder andere nicht verheilte Verletzungen befinden – Verletzungsgefahr!
- Verwenden Sie den **PELVI.LOC®** nicht bei Knochenschwund, Glasknochen oder starken Durchblutungsstörungen – Verletzungsgefahr!
- Nach dem Reinigen die korrekte Funktion des **PELVI.LOC®** sicherstellen!
- Ein beschädigter **PELVI.LOC®** sollte unverzüglich erneuert werden – Unfallgefahr!



Achtung:

- Der **PELVI.LOC**[®] ist nicht Teil des Rückhaltesystems für den Rollstuhl und/oder Insassen beim Transport in einem Behindertentransportfahrzeug.
- Weder Produzent noch Vertrieb können, im Sinne der Produkthaftung, für Schäden oder Risiken haftbar gemacht werden, die durch unbeaufsichtigte Kinder, im Zusammenhang mit dem Produkt, verursacht werden!

Anwendung

1. Zum Gebrauch des **PELVI.LOC**[®] werden die Polster (a) in den Beckenbereich/Hüftbeugefalte gelegt



Achtung: Achten Sie darauf, dass sich keine Gegenstände unter dem Polster befinden! So vermeiden Sie schmerzhaft Druckstellen.

2. Dann das Zahnband (b) durch die jeweilige Ratsche führen. Dazu die entsprechende Ratschenschnalle (e) betätigen.
 3. Anschließend das Zahnband (b) soweit spannen, dass noch Platz für eine flache Hand zwischen Oberschenkel und Polster ist.
 4. Stellen Sie sicher, dass die Druckschnallen (e) in die Zähne des Zahnbands greifen!
- Zugprobe durchführen!

Kommt es während der Anwendung des **PELVI.LOC**[®] zu einer ungewollten Lockerung des Positionierungssystems, so kann diese durch ein erneutes Spannen behoben werden.

Zum Öffnen des **PELVI.LOC[®]** die Druckschnalle (e) betätigen und das Zahnband herausziehen.

- Darauf achten, dass die Polster nicht zwischen die Speichen des Antriebsrades geraten!

Reinigung und Desinfektion

- Geeignet für die Waschmaschine bis 40 Grad.
- Chemothermische Desinfektion möglich durch Zugabe von ELTRA 40 zum Waschgang
- Nicht schleudern
- Nicht geeignet für den Trockner

Wartung

Der **PELVI.LOC**[®] ist regelmäßig auf Beschädigung und Funktion zu überprüfen.

Reparaturen

Defekten **PELVI.LOC**[®] unverzüglich austauschen.

Entsorgung

- Die Geräteverpackung kann der Wertstoffwiederverwendung zugeführt werden.
- Die Metallteile können der Altmetallverwertung zugeführt werden.
- Kunststoffteile können der Kunststoffverwertung zugeführt werden.
- Die Entsorgung muss gemäß den jeweiligen nationalen gesetzlichen Bestimmungen erfolgen.
- Fragen Sie bitte bei der Stadt-/Gemeindeverwaltung nach örtlichen Entsorgungsunternehmen.



Technische Daten

	S	M	L
Sitzbreite (cm)	30 - 35	36 - 39	40 - 46
Polstergröße (cm)	20 x 7	29 x 11	36 x 14
Sitzfläche (cm)	30 x 15	36 x 20	40 x 26

Zahnband Gr. S - M - L	2,4 x 0,2 x 40 cm
-------------------------------	-------------------

Produkt ist
latexfrei



Gewährleistung

Für dieses Produkt übernehmen wir die Gewährleistung, entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen. Diese erstreckt sich auf Material- und Verarbeitungsfehler. Hiervon ausgeschlossen sind Verschleißteile und Teile/Baugruppen, die einer bestimmungsgemäßen Abnutzung unterliegen sowie Schäden, die sich als Folge übermäßiger Beanspruchung, „nicht-bestimmungsgemäßer Anwendung“, gewaltsamer Beschädigung oder unzulässiger Änderung/Instandsetzung ergeben. Im Gewährleistungsfall wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler, bei dem Sie dieses Produkt gekauft haben. Aus Gründen der Produkthaftung dürfen Reparatur-, Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten nur durch autorisierte Fachhändler, unter Verwendung von Original-Ersatzteilen, durchgeführt werden



Hersteller:

A2J GmbH
Am Fuchsberg 13
D-87452 Altusried
Fon: +49 (08373) 987269
Fax: +49 (08373) 987276
eMail: info@a2j-intl.com
Internet: www.a2j-intl.com



Dieses Produkt ist konform mit den Grundlegenden Anforderungen der EG Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte

Stand 01.05.2019

Technische Änderungen vorbehalten