

PELVI.LOC® PL-2DAS Aktiv für Sitzschalen

PELVI.LOC® PL-2D Oberschenkelgurte

HMV.Nr.: 26.99.02.2000



Modell

2D-Gurt für Rollstuhlfahrer - der Gurt für den höheren Anspruch, zur Montage an Sitzschalen.

Die vergrößerten Oberschenkel-Pelotten sorgen auch bei hoher Zugkraft, z.B. durch sportliche Betätigung, für eine optimale Druckverteilung und Stabilität im Sitz.

Ausführung


Anwendungsbeispiel Rollstuhlbasketball:
Nationalmannschaft, Bild von EM Frankfurt 2013



Zusatzartikel

Befestigungs-Sets für Sitzschalen-Gurte zur Befestigung an der Sitz-Schale oder am Rollstuhl.

Artikelnummer
PB-BL-53

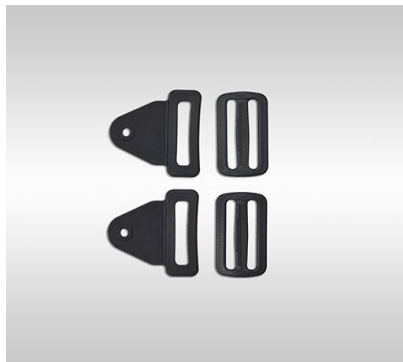

Anwendungsbereich

- Sicherheit mit der 2D-Becken-Positionierung in der Sitzschale
- Als Thorax-Positionierung im Stehständer und Sportgerät einsetzbar.

Besondere Merkmale

Die im Polster verdeckten Ratschenschnallen verhindern das unbeabsichtigte Öffnen des Gurtes und bieten einen Schutz gegen Verletzungen, verursacht durch unkontrollierte Bewegungen.

Ein Nylongurt dient der Befestigung und wird durch die Sitzschale geführt.

Die facettenartige Ausdünnung des Polstermaterials im Übergang von den Oberschenkel-Pelotten zum Befestigungsgurt verhindert seitliche Druckstellen am Oberschenkel.

Der Befestigungsgurt in 50mm Breite ist extrem belastbar. Auch in der Extremsituation für optimale Sicherheit.

Artikelnummern

PL-2DAS-S für SB 20-32 cm

PL-2DAS-M für SB 30-40 cm

PL-2DAS-L für SB 36-46 cm

Technische Daten

	XXXX Bambino	XXS	XS	S	M	L	XL
Sitzbreite (cm)				20 - 32	30 - 40	36 - 46	
Polstergröße (cm)				19 x 11	23 x 12	28 x 14	
Gewicht (g)				220	280	280	
Sollbruchstelle (bei ca. kg)				60	80	80	

Zahnband Gr. XXXS - XXS		Produkt ist latexfrei 	 LIZENZIERTER PARTNER REG. NR. DE5914274696739-V
Zahnband Gr. XS - S	2,4 x 0,2 x 17,0 cm		
Zahnband Gr. M - L - XL	2,4 x 0,2 x 17,0 cm		
Ratschenschnalle Gr. XXXS			
Ratschenschnalle Gr. XS - S	B-24-FLAT-LO-BL		
Ratschenschnalle Gr. M - L - XL	B-24-ERGO-BL		
Lochriemen	LR-BL-320		