

PELVI.LOC® PL-3DAS Aktiv Schale

PELVI.LOC® PL-3D Beckengurte

HMV.Nr.: 26.99.02.2000



Modell

Becken-Retraktions-Gurt für Sitzschalen

Großflächiger 3D-Gurt für Rollstuhlfahrer - der Gurt für den höheren Anspruch, zur Montage an Sitzschalen. Die vergrößerten Oberschenkel-Pelotten sorgen auch bei hoher Zugkraft, z.B. durch sportliche Betätigung, für eine optimale Druckverteilung und Stabilität im Sitz.


Zusatzartikel

Befestigungs-Set für Sitzschalen. Mit diesem Befestigungs-Set kann der Beckenretraktions-Gurt an der Sitzschale befestigt werden und erleichtert das Umsitzen in den Rollstuhl.

Artikelnummern

BS-24-BL

PB-BL

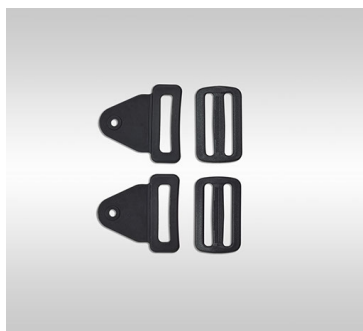

Anwendungsbereich

Für Sitzschalen zur besseren Becken-Positionierung im Rollstuhl oder der Sitzschale.

Besondere Merkmale

Der Gurt für hohe Zugkräfte mit 1/3 mehr Pelotten-Fläche als 3D Basic. Mit einfach zu bedienenden Ratschen-Schnallen wird die Passform des Gurtes eingestellt. Die im Polster verdeckten Ratschenschnallen verhindern das unbeabsichtigte Öffnen des Gurtes und bieten einen Schutz gegen Verletzungen, verursacht durch unkontrollierte Bewegungen. Die Becken-Pelotten werden in der Mitte über einen Zahnriemen verbunden, der zur Sicherheit zusätzlich in einer Lasche geführt wird. Die facettenartige Ausdünnung des Polstermaterials im Übergang von der Pelotte zum Befestigungsgurt verhindert seitliche Druckstellen am Becken.

Artikelnummern

PL-3DAS-XS für SB 16-24 cm

PL-3DAS-S für SB 20-32 cm

PL-3DAS-M für SB 30-40 cm

PL-3DAS-L für SB 36-46 cm

PL-3DAS-XL für SB 44-52 cm

Technische Daten

	XXXS Bambino	XXS	XS	S	M	L	XL
Sitzbreite (cm)			16 - 24	20 - 32	30 - 40	36 - 46	44 - 52
Polstergröße (cm)			17,5 x 9	20 x 11	23 x 13	25,5 x 14	29 x 16
Gewicht (g)			220	220	280	280	280
Sollbruchstelle (bei ca. kg)			60	60	80	80	80

Zahnband Gr. XXXS - XXS		Produkt ist latexfrei 	
Zahnband Gr. XS - S	1,9 x 0,2 x 17,0 cm		
Zahnband Gr. M - L - XL	2,4 x 0,2 x 17,0 cm		
Zahnband Gr. XL	2,4 x 0,2 x 22,5 cm		
Ratschenschnalle Gr. XXXS			
Ratschenschnalle Gr. XXS			
Ratschenschnalle Gr. XS - S	B-19-ERGO-BL		
Ratschenschnalle Gr. M - L - XL	B-24-ERGO-BL		
Lochriemen			