

PELVI.LOC® PL-3DS Schale

PELVI.LOC® PL-3D Beckengurte

HMV.Nr.: 26.99.02.2000



Modell


Die Becken-Pelotten sind 3-dimensional geformt zur optimalen Fixierung des Beckens ohne Druck auf die Spina anterior superior. Mit einfach zu bedienenden Ratschen-Schnallen wird die Passform des Gurtes eingestellt. Zur Sicherung des Rollstuhlfahrers werden die Becken-Pelotten in der Mitte über einen Zahnriemen verbunden, der zur Sicherheit zusätzlich in einer Lasche geführt wird, um Verletzungen zu vermeiden. Ein Gurtband ist in den Größen XXXS, XXS, XS, S, M, L und XL erhältlich.

PL-3DS-XXXS Bambino mit **B-14-STAR** Druckschnalle zum Öffnen und Schließen.

Ausführung

Anwendungsbeispiel:


- Sitzschale mit **PL-3DS-S** Beckenretraktions-Gurt

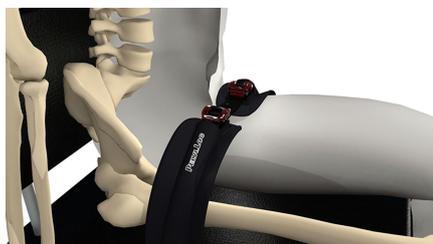

Zusatzartikel

Zur Befestigung an der Sitz-Schale oder am Rollstuhl.

Artikelnummer: **PB-BL**

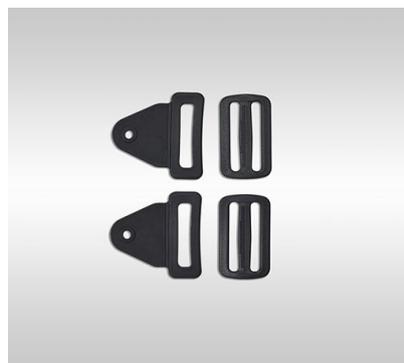

Anwendungsbereich

Für die Becken- Positionierung in der Sitzschale.

Besondere Merkmale

Ein Nylongurt dient der Befestigung und wird durch die Sitzschale geführt. Die facettenartige Ausdünnung des Polstermaterials im Übergang von der Pelotte zum Befestigungsgurt verhindert seitliche Druckstellen am Oberschenkel.

Artikelnummern

PL-3DS-XXXS für SB 8-16 cm Bambino

PL-3DS-XXS für SB 12-20 cm

PL-3DS-XS für SB 16-24 cm

PL-3DS-S für SB 20-32 cm

PL-3DS-M für SB 30-40 cm

PL-3DS-L für SB 36-46 cm

PL-3DS-XL für SB 44-52 cm

Technische Daten

	XXXS Bambino	XXS	XS	S	M	L	XL
Sitzbreite (cm)	8 - 16	12 - 20	16 - 24	20 - 32	30 - 40	36 - 46	44 - 52
Polstergröße (cm)	11 x 6	14 x 6	18 x 7	21 x 8	25,5 x 8	26,5 x 8,5	28,5 x 9
Gewicht (g)	220	220	220	220	280	280	280
Sollbruchstelle (bei ca. kg)	40	40	60	60	80	80	80

Zahnband Gr. XXXS - XXS	1,4 x 0,2 x 14,0 cm	<p>Produkt ist latexfrei</p> 	
Zahnband Gr. XS - S	1,9 x 0,2 x 17,0 cm		
Zahnband Gr. M - L - XL	2,4 x 0,2 x 17,0 cm		
Ratschenschnalle Gr. XXXS	B-14-STAR-BL		
Ratschenschnalle Gr. XXS	B-14-GO-BL		
Ratschenschnalle Gr. XS - S	B-19-ERGO-BL		
Ratschenschnalle Gr. M - L - XL	B-24-ERGO-BL		
Lochriemen			