

PELVI.LOC® PL-UG Unterschenkelgurt

PELVI.LOC® Unterschenkelgurte

HMV.Nr.: 18.99.99.0905



Modell

Die zwei-dimensional geformten Unterschenkel-Pelotten werden über einen Lochriemen vorne miteinander verbunden und eingestellt. Zur seitlichen Fixierung am Rahmen gewährleisten die Zahnriemen **R24-BL-ERGO-400** und die Druck-Schnallen **B24-ERGO-BL** hohe Belastbarkeit; auch mit anderen Schnallen und Zahnriemen lieferbar.

Der Unterschenkel-Gurt wird mittels der Ratschenschnalle individuell an die Sitzposition angepasst und kann millimetergenau eingestellt werden. Ebenso kann der Gurt auch schnell über die Druckschnalle geöffnet werden.

Zusatzartikel

Rohrschellen zur Befestigung des Gurtes am Rollstuhlrahmen in folgenden Durchmessern lieferbar:

Artikelnummern


RS-20: Rohrdurchmesser 20 mm

RS-22: Rohrdurchmesser 22 mm

RS-25: Rohrdurchmesser 25 mm

RS-30: Rohrdurchmesser 30 mm

RS-32: Rohrdurchmesser 32 mm

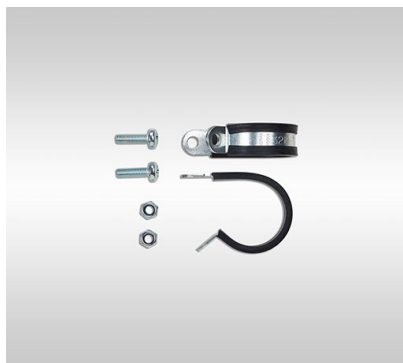

Anwendungsbereich

Der Pelvi.Loc Unterschenkel-Gurt verhindert das nach-vorne-Rutschen im Rollstuhl.

Besondere Merkmale

Der Lochriemen wird von einem Polster verdeckt, um Verletzungen zu verhindern. Über die am Rahmen zu befestigende Ratschenschnalle und den einzuhängenden Lochriemen ist eine einfache Handhabung gesichert. Auch mit anderen Schnallen z.B. B24-Star lieferbar.

Artikelnummern

PL-UG-XXXS für SB 8-16 cm

PL-UG-XXS für SB 12-20 cm

PL-UG-XS für SB 16-24 cm

PL-UG-S für SB 20-32 cm

PL-UG-M für SB 30-40 cm

PL-UG-L für SB 36-46 cm

PL-UG-XL für SB 44-52 cm

Technische Daten

	XXXS Bambino	XXS	XS	S	M	L	XL
Sitzbreite (cm)	8 - 16	12 - 20	16 - 24	20 - 32	30 - 40	36 - 46	44 - 52
Polstergröße (cm)	11 x 6	14 x 6	18 x 7	21 x 8	25,5 x 8	26,5 x 8,5	28,5 x 9
Gewicht (g)	220	220	220	220	280	280	280
Sollbruchstelle (bei ca. kg)	40	40	60	60	80	80	80

Zahnband Gr. XXXS - XXS	1,4 x 0,2 x 14,0 cm	Produkt ist latexfrei 	 LIZENZIERTER PARTNER REG. NR. DE5014274696739-V
Zahnband Gr. XS - S	1,9 x 0,2 x 17,0 cm		
Zahnband Gr. M - L - XL	2,4 x 0,2 x 17,0 cm		
Ratschenschnalle Gr. XXXS	B-14-STAR-BL		
Ratschenschnalle Gr. XXS	B-14-GO-BL		
Ratschenschnalle Gr. XS - S	B-19-ERGO-BL		
Ratschenschnalle Gr. M - L - XL	B-24-ERGO-BL		
Lochriemen			